

Premium Laboratory Equipment Gesamtkatalog **2013**



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung

Unser Service für Sie

Liebe Kunden,

es macht richtig Freude, in der Labortechnik zu arbeiten. Einzelne Forschungsgebiete, wie die Biochemie und Molekularbiologie, erleben regelrecht Wissensexplosionen, andere, wie z. B. die Pharmakologie, haben sich zu Universitäts-Fachrichtungen weiter entwickelt.

Egal, aus welchem Fachbereich Sie kommen, wir alle verfolgen letztendlich ein gemeinsames Ziel: Mit neuen Wirkstoffen Krankheiten bekämpfen oder lindern, gesündere Nahrungsmittel gewährleisten, neue innovative Materialien entwickeln. Kurzum, die Gesundheit und Lebensumstände von Menschen verbessern. **Sie forschen, und wir unterstützen Sie dabei.**

In unserem Gesamtkatalog werden Sie auf einen Blick über alles informiert. Hierin sind nicht nur unsere Produkte, sondern auch unsere Dienstleistungen und Innovationen in einem übersichtlichen Rahmen präsentiert.

Wir freuen uns auf eine intensive Zusammenarbeit mit Ihnen, bei der wir Sie aktiv und individuell unterstützen und entlasten werden. Das verstehen wir unter **„Research made easy“**. Damit Sie den Kopf frei zum Forschen haben - im Sinne Ihrer Forschungsergebnisse, für Ihr Unternehmen und für Millionen von Menschen weltweit.

Es grüßen Sie



Wolfgang Jaenicke
Geschäftsführer



Kevan White
Marketing- & Gesamtvertriebsleiter



„Ich antworte Ihnen innerhalb von 24 Stunden auf jedes Anliegen“

Cornelia Kroboth
Durchwahl: 09122/9920-67
Cornelia.Kroboth@Heidolph.de

Beratung und Support

- Sie können alle Geräte während einer kostenlosen, 14-tägigen Probestellung auf Herz und Nieren testen
- Promovierte Chemiker prüfen auf Wunsch Ihre spezielle Applikation, um das richtige Gerät für Ihre Anwendung zu finden
- Kurze Lieferzeiten von 7 Tagen ermöglichen Ihnen einen Kauf in „letzter Minute“
- Reparaturen an Ihrem Gerät werden innerhalb von nur 4 Tagen ausgeführt
- Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort auf alle Anfragen

Service vor Ort

- Ihr Ansprechpartner bei Heidolph berät und unterstützt Sie direkt vor Ort
- Wir installieren Ihr neues Heidolph Gerät kostenfrei und geben Ihnen eine umfassende Einweisung in das System
- Wir kümmern uns für Sie um die Entsorgung Ihrer Altgeräte
- Bei Bedarf erhalten Sie ein kostenloses Leihgerät innerhalb von 48 Stunden

3 Jahre Garantie auf alle Geräte – ohne Kompromisse!

www.heidolph.com





Als innovatives und global agierendes Unternehmen sind wir führend in der Herstellung von Laborgeräten. Mit unseren Produkten unterstützen wir in 80 Ländern die pharmazeutische Forschung, die kosmetische Industrie, den Biologie- sowie den Chemiesektor und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen weltweit.

Der Standort unseres Unternehmens ist Schwabach bei Nürnberg. Hier erfolgt zentral die Entwicklung und Produktion unserer Systeme sowie die Koordinierung und Steuerung der nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten.

Garanten für unsere sehr dynamische Entwicklung ist die Leistungsbereitschaft und Wertschätzung unserer Mitarbeiter. Denn sie setzen kontinuierlich neue Maßstäbe für exzellente Produktqualität und Kundenorientierung sowie beispiellose Serviceleistungen für unsere Kunden in aller Welt.



Made in Germany

„Made in Germany“ ist ein international anerkanntes Qualitätssiegel und ein Synonym für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und geringe Reparaturanfälligkeit des Produktes. Gerade im Zeitalter der ökonomischen Globalisierung ist es ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Heidolph Instruments bekennt sich als Hersteller von hochqualitativen Premiumartikeln zum Standort Deutschland.



Alle Produkte werden am Stammsitz entwickelt und hergestellt. Auch für Zukaufteile haben wir hohe Standards definiert: Wartungsfreie Motoren „Made in Germany“ verhindern Ausfallzeiten, Wartungen und kostspielige Reparaturen. Der Standort Deutschland, der ein zentraler Teil der Unternehmensphilosophie ist, garantiert die Entwicklung und Fertigung von Produkten für den jahrelangen Dauereinsatz.

Von Deutschland aus haben wir die Möglichkeit, schnell auf Kundenwünsche weltweit zu reagieren. Das trifft sowohl für Produktentwicklungen zu, als auch für die Produktion selbst. Durch einen hohen Innovationsgrad und kurze Lieferzeiten erfüllen wir Ihre Anforderungen und machen Ihre Heidolph Anschaffung – bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren – zu einer lohnenswerten Investition.

Inhalt

Rotationsverdampfer Intelligent Destillieren	➤ 8
Großrotationsverdampfer Intelligent Destillieren	➤ 38
Magnetrührer Sicher Heizen und Mischen	➤ 56
Laborrührer Kraftvoll Rühren	➤ 78
Schüttel- & Mischgeräte Temperiert Schütteln	➤ 98
Peristaltikpumpen Präzise Fördern und Dosieren	➤ 120
Dispergierer Leise Dispergieren	➤ 142
Premium Service & Premium Qualität	➤ 149
Service- und Wartungsverträge	➤ 150
Technischer Service - Miet-Service	➤ 152
Unsere Mitarbeiter	➤ 153
Zertifizierung	➤ 154
Ansprechpartner Außendienst	➤ 155
Ansprechpartner Innendienst	➤ 156
Impressum	➤ 157

Intelligent Destillieren



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung





Erwarten Sie höchste Sicherheitsstandards, eine einfache Bedienung und nur minimale Ersatzteilkosten?

Intelligent Destillieren...

...bedeutet Schutz vor ungewolltem Aufheizen und Wassermangel im Heizbad, bequeme Bedienung dank des abnehmbaren Bedienpanels und jahrelanger Dauereinsatz von Vakuumdichtung und Dampfdurchführung!

Höchste Sicherheit

- Zwei **Sicherheitsfunktionen** vermeiden eine Überhitzung Ihres Heizbades: Bei Überschreitung der eingestellten Temperatur um 5 °C und bei Wassermangel schaltet sich Ihr Heizbad automatisch ab
- Um eine Überhitzung der Probe auszuschließen, können Sie beim Hei-VAP Precision eine **Temperaturobergrenze** des Heizbades nach Ihren Vorgaben einstellen
- Bei Motorlift-Modellen wird Ihre Probe vor thermischen Schäden geschützt, da der Kolben bei Stromausfall automatisch aus dem Heizbad gefahren wird
- Um Sie vor Spritzern und Verbrühungen zu schützen, erfolgt das **Wechseln der Heizbadflüssigkeit gefahrlos** über den integrierten Ausgießer
- Ihr Heizbad verfügt über eine doppelte Wand. Diese **schützt Sie vor Verbrennungen** und das Bad gegen Wärmeverlust
- Eine optionale **Schutzhaube** deckt das Heizbad komplett ab und schützt Sie zuverlässig vor Implosionen und Spritzern
- Eine Metallverbindung zwischen Heizbad und Verdampfer **verhindert ein Abkippen** des gefüllten Bades
- Um Kurzschlüsse und Korrosion bei Ihrem Hei-VAP Heizbad systematisch auszuschließen, erfüllt die Kabelverbindung die **Schutzklasse IP 67**
- Die **Bedienelemente** befinden sich zu Ihrer Sicherheit unterhalb des Tragegriffes und damit **außerhalb der Gefahrenzone**
- Um Sie vor Verbrühungen zu schützen, verfügen alle Heizbäder über **antirutschbeschichtete Tragegriffe**
- Ein separater Ein/Aus Schalter für die Heizfunktion **verhindert ein ungewolltes Aufheizen**. Die aktivierte Heizfunktion ist durch die Beleuchtung der Taste eindeutig erkennbar
- Bei signifikanten Abweichungen der Applikationsparameter erfolgt ein Warnhinweis
- Die optional erhältliche und völlig transparente Kunststoffbeschichtung der Glassätze garantiert Ihnen **klare Sicht und höchste Sicherheit**

➤ Hei-VAP Heizbad



IHRE VORTEILE


- Nur das Hei-VAP Heizbad erreicht eine Temperatur von 210 °C
- Das universelle Bad kann für Kolben bis 5 Liter verwendet werden
- Das Heizbad kann bis 200 mm horizontal verschoben werden
- Um Kurzschlüsse und Korrosion auszuschließen, erfüllt die Kabelverbindung die Schutzklasse IP 67
- Antirutschbeschichtete Tragegriffe garantieren einen sicheren Transport und schützen vor Verbrühungen
- Sicheres Wechseln der Badflüssigkeit über den integrierten Ausgießer

Bester **Bedienkomfort**

- Das **abnehmbare Panel** kann durch Klettband oder eine spezielle Aufhängung auf Augenhöhe fixiert werden und ermöglicht Ihnen somit eine **schnelle und bequeme** Bedienung auch außerhalb geschlossener Abzugshauben
- Ihre Kolbenklemme kann nicht verloren gehen, da sie zentral mit der Verschraubung verbunden ist
- Durch eine integrierte Schraubvorrichtung und die patentierte Klemmhülse können Sie **feststehende Kolben leicht abnehmen**
- Das universelle Heizbad erlaubt Ihnen die Verwendung von **Kolben bis zu 5 Liter** und kann spielend leicht horizontal um 200 mm verschoben werden
- In Sekundenschnelle können Sie die **Eintauchtiefe bis 160 mm** und den Neigungswinkel des Verdampferkolbens von 20° bis 80° individuell einstellen
- Das optional erhältliche Automatikmodul Hei-VAP Distimatic ermöglicht Ihnen die **vollautomatische Destillation** im unbeaufsichtigten Dauerbetrieb

Dauerhafte **Kostenreduzierung**

- Erzielen Sie bis zu **30 % kürzere Prozesszeiten**
- Die chemikalienbeständige PTFE Vakuumdichtung **erspart Ihnen Ersatzteilkosten bis 75 %**
- Ähnlich **hohe Einsparungen** erlangen Sie durch die langlebige Dampfdurchführung
- Verwenden Sie das universelle Heizbad für Kolben bis zu 5 Liter, ohne weitere Zusatzkosten
- Alle Produkte verfügen über **wartungs- und funkenfreie Motoren** und sind hervorragend für den jahrelangen Dauereinsatz geeignet. Das macht Ihren Hei-VAP zu einer **lohnenswerten Investition!**
- Die Schraubverbindung zur Befestigung des Kühlers besteht aus PPS und ist daher chemikalienbeständiger als Edelstahl. Dadurch verringert sich Korrosion auf ein Minimum und **erspart Ihnen zusätzliche Wartungskosten**
- Nur Hei-VAP Heizbäder erreichen eine Temperatur von 210 °C und ermöglichen Ihnen Anwendungen, die bisher nicht durchführbar waren, z. B. Bitumendestillation. Dieser erweiterte Anwendungsbereich erspart Ihnen zusätzliche Investitionen
- Eine Kondenswasser abweisende Lack-Formel macht die Verdampfer der Hei-VAP Serie korrosionsbeständiger, **erhöht die Lebensdauer und reduziert Wartungskosten**
- Das **abgedichtete Gehäuse** schützt Ihren Rotationsverdampfer zuverlässig vor Korrosion und erhöht die Nutzungsdauer im Schnitt auf über 10 Jahre bei gleichzeitiger Reduzierung Ihrer Wartungs- und Reparaturkosten
- Sparen Sie Zeit und **destillieren Sie unbegrenzte Mengen vollautomatisch im zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb** mit dem optional erhältlichen Automatikmodul Hei-VAP Distimatic
- **Reduzieren Sie Ihre Anschaffungskosten:** Das Automatikmodul Hei-VAP Distimatic für Ihren Hei-VAP ist eine preislich attraktive Alternative zu Großrotationsverdampfern

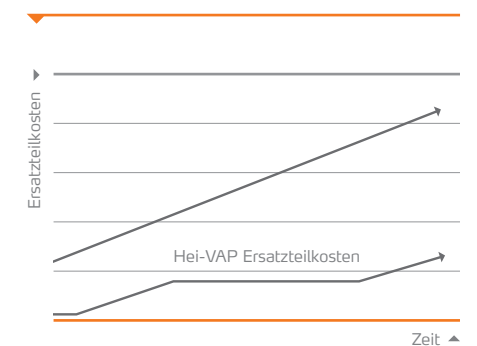

Intelligent Destillieren

Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

IHRE VORTEILE

- Die Dampfdurchführung lässt sich dank der patentierten Klemmhülse spielend leicht aus dem Antrieb entfernen und ist daher für den jahrelangen Dauereinsatz prädestiniert
- Die lange Lebensdauer reduziert Ersatzteilkosten bis 75 %
- Die Dampfdurchführung bleibt nicht im Antrieb stecken und verhindert damit Glasbruch
- Schnelles und leichtes Abnehmen der Dampfdurchführung gestaltet Arbeitsabläufe einfacher und komfortabler

Der Flansch besteht aus PPS und ist daher chemikalienbeständiger als Edelstahl. Dadurch **verringert sich Korrosion** auf ein Minimum und **erspart zusätzliche Wartungs- und Ersatzteilkosten**

Die **Dampfdurchführung** für den jahrelangen Dauereinsatz **bleibt dank der patentierten Klemmhülse nicht im Antrieb stecken**, verhindert Glasbruch und reduziert Ersatzteilkosten erheblich

Die chemikalienbeständige **Vakuumdichtung für den jahrelangen Dauereinsatz** reduziert Ersatzteilkosten bis 75 %

Die Kabelverbindung zum Heizbad erfüllt die hohe Schutzklasse IP 67, **Korrosion und Kurzschlüsse sind damit ausgeschlossen**

Das **Sicherheits-Heizbad** schaltet bei Wassermangel und bei 5°C Übertemperatur komplett ab

Das **210°C-Heizbad** mit Sicherheitsgriffen und Ausgießer für Kolben **bis 5 Liter** erweitert den Anwendungsbereich


Das abnehmbare Panel für **sichere und bequeme Bedienung** außerhalb geschlossener Abzugshauben

Unbegrenzte Mengen können mit dem Automatikmodul Hei-VAP Distimatic mit Rückstandsabsaugung im **zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb** kontinuierlich abdestilliert werden. Dies stellt eine kostengünstige Alternative zu Großrotationsverdampfern dar

Ein separater Ein/Aus Schalter für die Heizfunktion **verhindert ungewolltes Aufheizen** – Die aktive Heizfunktion ist durch die Beleuchtung am Panel eindeutig erkennbar

Eine **Metallverbindung** zwischen Heizbad und Verdampfer **verhindert ein Abkippen** des gefüllten Bades

Dampfdurchführung mit patentierter Klemmhülse

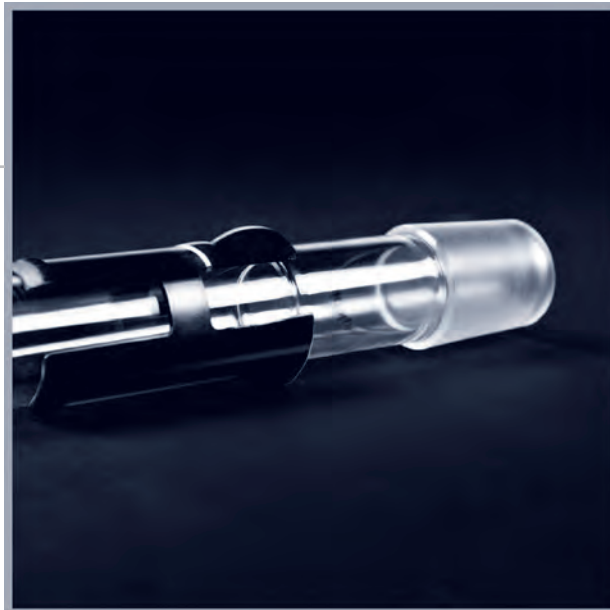

Kontrollpanel



IHRE VORTEILE

- Schnellste Bedienung ermöglicht ein sofortiges Eingreifen in laufende Prozesse und vereinfacht den Arbeitsablauf
- Die aktive Heizfunktion wird durch eine Beleuchtung am Panel angezeigt
- Das abnehmbare Panel garantiert eine sichere und bequeme Bedienung außerhalb geschlossener Abzugshauben

➤ Hei-VAP Value

Mit Handlift für alle Standardanwendungen

Modell mit allen genannten Vorteilen für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung



Stellen Sie bequem den gewünschten Neigungswinkel des Verdampferkolbens nach Ihren Anforderungen ein

Nutzen Sie den Höhenanschlag zur Begrenzung der Eintauchtiefe des Verdampferkolbens

Die Kolbenklemme kann Ihnen nicht mehr verloren gehen, da sie zentral mit der Verschraubung verbunden ist

Zu Ihrem Schutz befindet sich das Kontrollpanel unterhalb des Heizbades und somit außerhalb der Gefahrenzone

Hei-VAP Value HL/G3
Best. Nr. 560-01300-00

- Die Rotationsgeschwindigkeit und die Heizbadtemperatur können mittels Drehknöpfen eingestellt werden
- Für begrenzte Budgets empfehlen wir als Zubehör den manuellen Vakuumregler
- Hei-VAP Value Modelle haben kein digitales Display

Hei-VAP Value Digital

Mit allen Merkmalen des Hei-VAP Value, plus:

Digitales Display mit Anzeige der Soll- und Ist-Heizbadtemperatur



Modell	Hei-VAP Value Handlift (HL)		Hei-VAP Value Digital Handlift (HL)	
	standard	beschichtet	standard	beschichtet
G1 Diagonalkühler	560-01100-00	560-01110-00	560-01102-00	560-01112-00
G3 Vertikalkühler	560-01300-00	560-01310-00	560-01302-00	560-01312-00
G5 Trockeneiskühler	560-01500-00	560-01510-00	560-01502-00	560-01512-00
G6 Rückflusskühler	560-01600-00	560-01610-00	560-01602-00	560-01612-00

➤ Hei-VAP Advantage

Für komplexere Aufgaben und reproduzierbare Ergebnisse

Modell mit allen genannten Vorteilen für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung



Das digitale 3,5" LCD Display zeigt Drehzahl, Heizbad- und Dampftemperatur an

Wir empfehlen als Zubehör den manuellen Vakuumregler

Zum automatischen Beenden der Applikation kann die Timerfunktion aktiviert werden. Motorlift-Modelle fahren automatisch den Verdampferkolben aus dem Heizbad

Den Hei-VAP Advantage gibt es als preisgünstige Handlift-Modelle und als Motorlift-Modelle für höchsten Bedienkomfort. Er kann durch das Upgrade-KIT zum Hei-VAP Precision erweitert werden

Upgrade-KIT Advantage Precision-HL
Best. Nr. 569-30009-00

Upgrade-KIT Advantage Precision-ML
Best. Nr. 569-40009-00

Hei-VAP Advantage ML/G3
Best. Nr. 562-01300-00

Lesen Sie am übersichtlichen LCD Display alle Parameter einfach ab

Bedienen Sie den Motorlift bequem und schnell anhand der Steuerungsknöpfe


Modell	Hei-VAP Advantage Handlift (HL)		Hei-VAP Advantage Motorlift (ML)	
	standard	beschichtet	standard	beschichtet
G1 Diagonalkühler	561-01100-00	561-01110-00	562-01100-00	562-01110-00
G3 Vertikalkühler	561-01300-00	561-01310-00	562-01300-00	562-01310-00
G5 Trockeneiskühler	561-01500-00	561-01510-00	562-01500-00	562-01510-00
G6 Rückflusskühler	561-01600-00	561-01610-00	562-01600-00	562-01610-00

➤ Hei-VAP Precision

Automatisierte Destillationen und eingebauter Vakuum-Controller

Modell mit allen genannten Vorteilen für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

- Das 4,3" Grafik-Farbdisplay zeigt alle Applikationsparameter und Automatisierungsprogramme auf einen Blick an
- Bei anspruchsvollen Applikationen kann nachgeregelt oder automatisiert werden, um ein Schäumen und Siedeverzüge zu verhindern
- Zum automatischen Beenden der Applikation kann die Timerfunktion aktiviert werden. Motorlift-Modelle fahren automatisch den Verdampferkolben aus dem Heizbad
- Es ist keine Konfiguration mehr erforderlich, da alle angeschlossenen Komponenten selbstständig erkannt werden
- 30 unterschiedliche Anwendungen können gespeichert und jederzeit per Knopfdruck abgerufen werden
- Steuern Sie Ihren Prozess individuell durch die freie Programmierung von Druckgradienten im Gradient-Modus
- Ein USB-Anschluss ermöglicht die Dokumentation aller Prozessdaten
- Ein Vakuum-Controller ist im Hei-VAP Precision bereits integriert

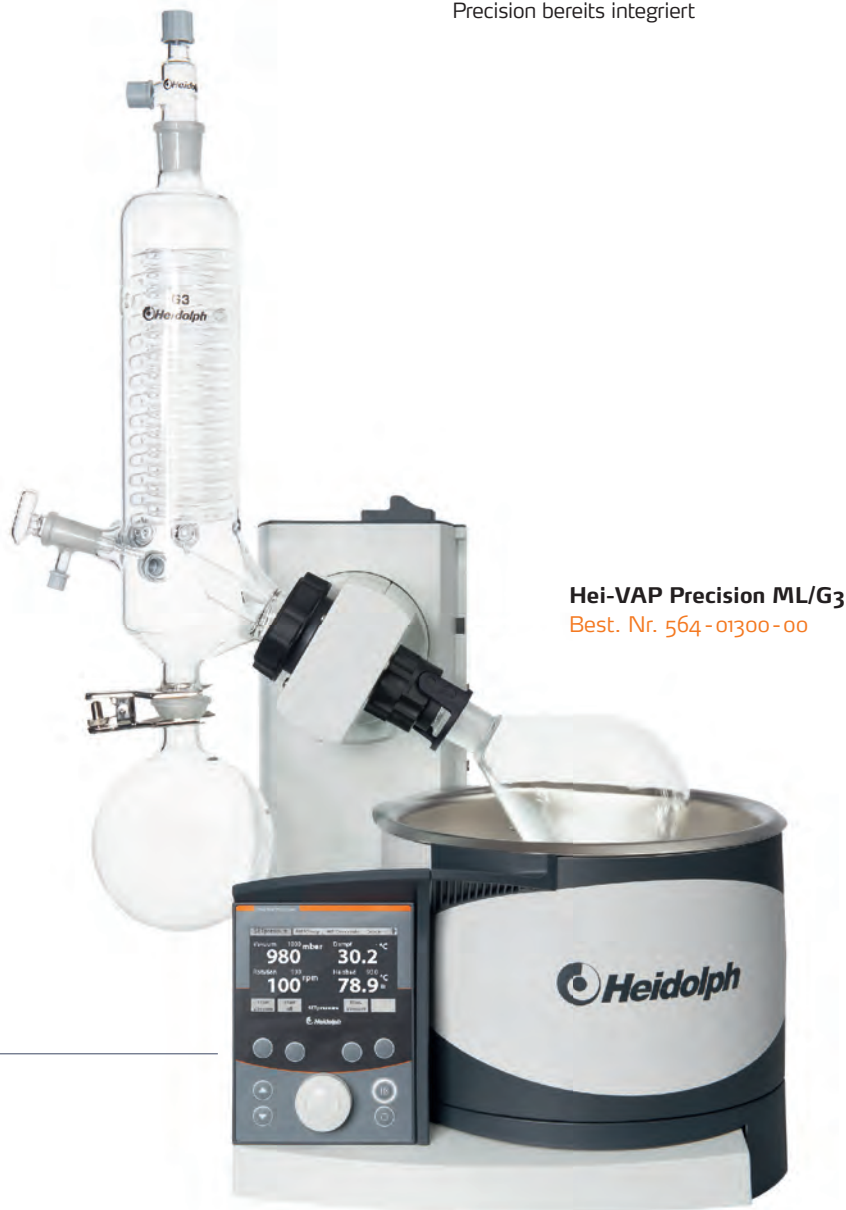


Im Set-up Menü können Sie die maximal einstellbare Temperatur individuell begrenzen

Selbst aus der Entfernung können Sie die eingestellten Parameter exakt ablesen

Im großen Grafik-Farbdisplay werden Ihre Applikationsparameter und Automatisierungsprogramme angezeigt

Programme zur Prozesssteuerung


Verkürzen Sie Ihre Prozesszeiten mit 3 Programmen für die automatisierte Destillation

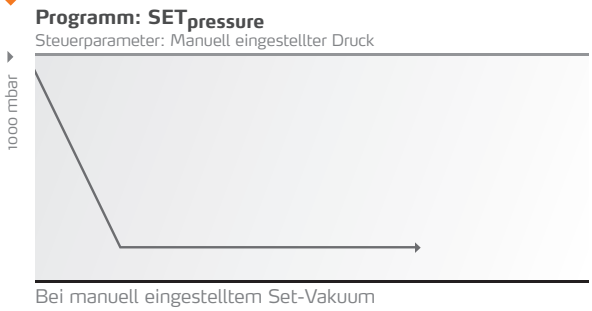

SET_{pressure}

Zur Vakuumregelung für die Stofftrennung


Mit diesem Programm wird ein gewünschter Enddruck konstant gehalten. Während der Evakuierung wird die volle Flexibilität, um per Knopfdruck jedes beliebige Vakuum konstant zu halten, gewährleistet

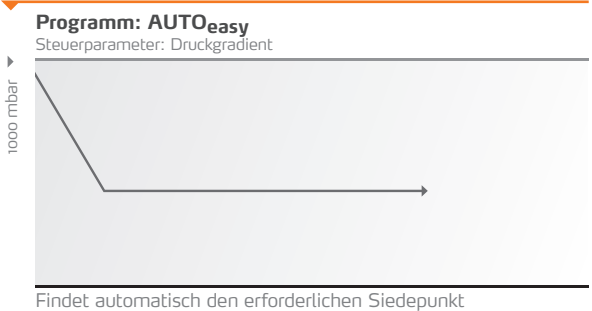

AUTO_{easy}

Zur automatischen Vakuumregelung für die Destillation von Lösungsmitteln

Der erforderliche Siedepunkt wird durch das System selbst ermittelt. Dieses Programm eignet sich für alle Heidolph Glassätze und kann ohne Zubehör verwendet werden

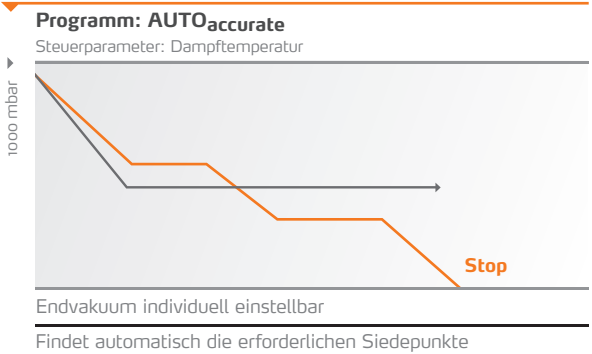

AUTO_{accurate}

Zur automatischen Vakuumregelung für die Destillation von Lösungsmitteln und -gemischen

Dieses Programm bietet die gleichen Optionen wie das Programm AUTO_{easy}, kann aber zusätzlich mehrere Siedepunkte automatisch finden und gewährleistet eine deutlich höhere Genauigkeit. Um die Vorteile dieses Programmes nutzen zu können, ist als Zubehör der AUTO_{accurate}-Fühler erforderlich. Dieses Programm kann bei den Glassätzen G1 und G5 nicht genutzt werden.

» Sparen Sie Zeit mit der automatischen Prozesssteuerung

Modell	Hei-VAP Precision Handlift (HL)		Hei-VAP Precision Motorlift (ML)	
	standard	beschichtet	standard	beschichtet
G1 Diagonalkühler	563-01100-00	563-01110-00	564-01100-00	564-01110-00
G3 Vertikalkühler	563-01300-00	563-01310-00	564-01300-00	564-01310-00
G5 Trockeneiskühler	563-01500-00	563-01510-00	564-01500-00	564-01510-00
G6 Rückflusskühler	563-01600-00	563-01610-00	564-01600-00	564-01610-00

➤ Automatikmodul – Hei-VAP Distimatic

Für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb – mit Rückstandsabsaugung
 Sparen Sie Zeit und destillieren Sie unbegrenzte Mengen vollautomatisch im zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb

- Das zu destillierende Gemisch wird automatisch zu- und das Kondensat kontinuierlich abgeführt
- **Die weltweit einzigartige automatisierte Rückstandsabsaugung** eröffnet Ihnen völlig neue Möglichkeiten hinsichtlich der vollautomatischen Destillation im Dauerbetrieb
- Alle Parameter können individuell eingestellt werden
- Das Automatikmodul ist mit allen Verdampfern der Serien Hei-VAP und Laborota 4000 sowie mit anderen vergleichbaren Bench-Top Verdampfern kompatibel
- Unter Berücksichtigung der Nachfüll- und Ausschleuszyklen können die Vorrats- und Produktbehälter auch während des Prozesses jederzeit getauscht werden

- Automatische Zudosierung in den Verdampferkolben**
- Ein Sensor misst den Füllstand im Verdampferkolben
 - Der gewünschte Füllstand kann individuell eingestellt werden
 - Die Zudosierung erfolgt ventilgesteuert über den Systemdruck
 - Ein Sensor überwacht den Vorrat des zu destillierenden Gemisches und beendet den Prozess, sobald dieser verbraucht ist

- Automatische Kondensatentnahme**
- Eine Ventilmatrix steuert das kontinuierliche Abführen des Kondensats aus dem Verdampfer in einen Zwischenspeicher. Von dort wird das Kondensat mittels einer Chemiemembran-Pumpe in einen Sammelbehälter Ihrer Wahl abgesaugt
- Automatische Rückstandsabsaugung**
- Der Rückstand im Verdampferkolben wird prozessabhängig in einen Sammelbehälter Ihrer Wahl abgesaugt. Anschließend beginnt der Prozess durch das automatische Zuführen des zu destillierenden Gemisches in den Verdampferkolben erneut

- Optionen zum Beenden des Vorgangs**
- Der Prozess kann nach dem Verdampfen des zu destillierenden Gemisches automatisch oder jederzeit manuell beendet werden

IHRE VORTEILE


- Nutzen Sie dieses System als kostengünstige Alternative zu Großrotationsverdampfern
- Zu Ihrer Sicherheit überwachen Sensoren permanent den gesamten Prozess und schalten das komplette System inkl. aller angeschlossenen Peripheriegeräte im Notfall vollständig ab
- Profitieren Sie von den frei einstellbaren Parametern, die Ihnen ein umfangreiches Anwendungsspektrum und eine exakte Justierung entsprechend Ihrer Anwendung ermöglichen
- Reduzieren Sie Ihre Energiekosten – Das Automatikmodul schaltet nach Beenden des Prozesses automatisch auch die angeschlossenen Peripheriegeräte vollständig ab
- Das System kann unter einem standardmäßigen Laborabzug betrieben werden und garantiert Ihnen damit höchste Sicherheit

Hei-VAP Distimatic mit Rückstandsabsaugung
 Best. Nr. 591-53000-00

Hei-VAP Distimatic ohne Rückstandsabsaugung
 Best. Nr. 591-51000-00



Funktionsskizze Hei-VAP Distimatic mit Rückstandsabsaugung

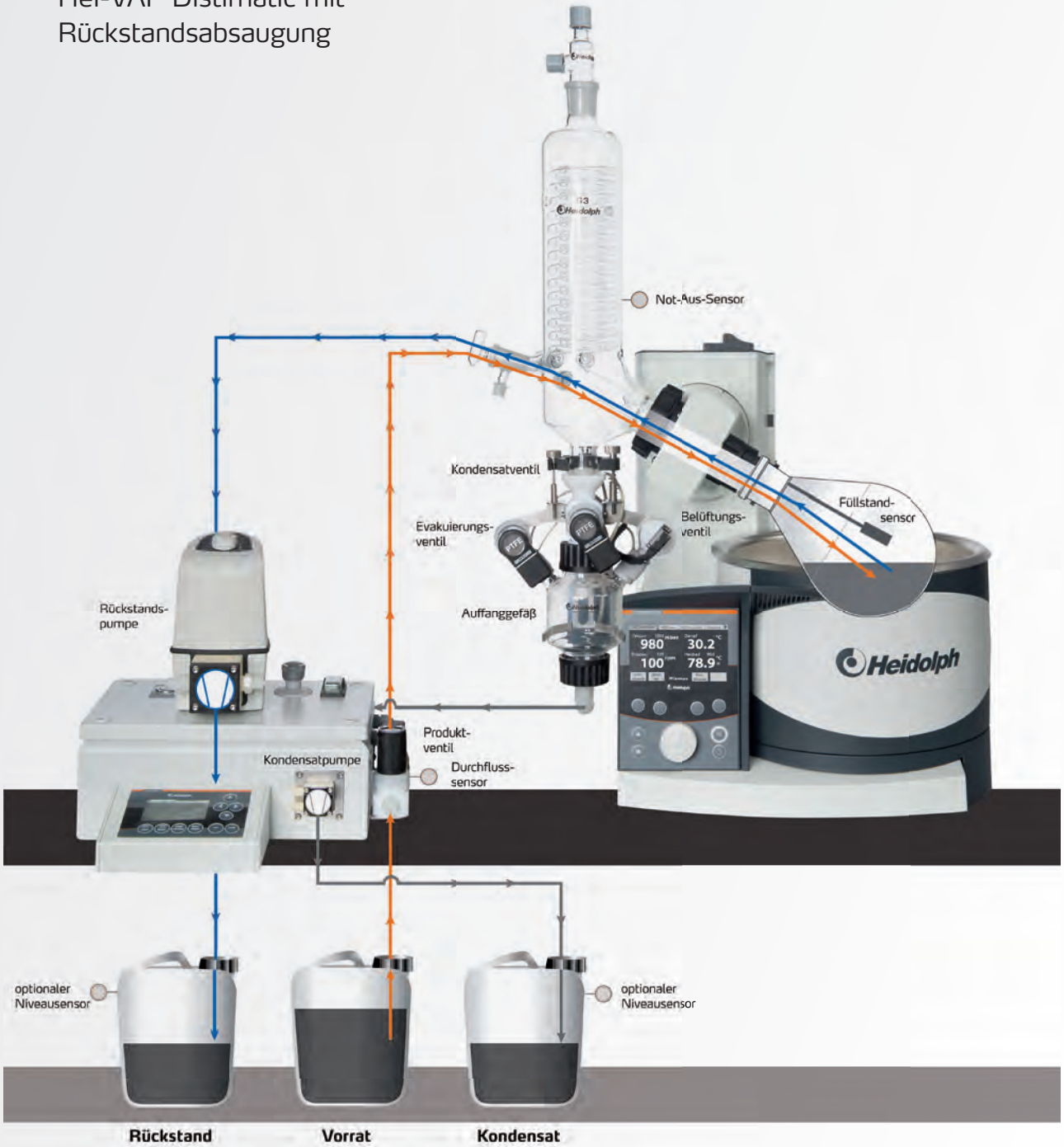

Verdampfungsraten (Dauerlauf)

Hei-VAP Distimatic	Delta T 40°C
L/h Wasser	1,2
L/h Ethanol	3,5
L/h Aceton	4,4
L/h Toluol	6,3

➤ Vakuumpumpen


Vorteile aller chemiebeständigen Membran-Vakuumpumpen



- Alle medienberührten Teile weisen dank Fluorkunststoffen durchgängig von der Saugseite bis zur Druckseite eine hervorragende chemische Beständigkeit auf
- Das bewährte PTFE Sandwichdesign führt zu einer überdurchschnittlichen Membranlebensdauer
- Der Kopfdeckel und die Spannscheibe besitzen einen zusätzlichen Stabilitätskern aus Metall für eine herausragende Langzeitstabilität der Betriebsparameter
- Der riemenfreie Direktantrieb ist frei von Verschleißteilen und läuft extrem leise und vibrationsarm
- Das physikalisch optimierte Gasballastventil vermeidet Kondensatbildung in den Pumpen

➤ Drehzahlgeregelte Vakuumpumpen

Drehzahlgeregelte Vakuumpumpen kontrollieren die Drehzahl individuell und schalten sich automatisch ab, sobald das gewünschte Set-Vakuum erreicht ist

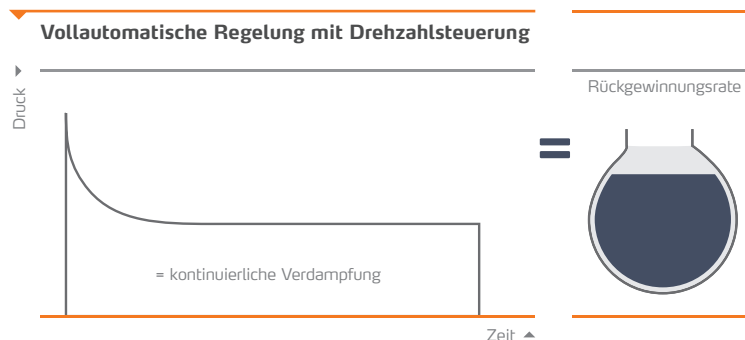

IHRE VORTEILE

- Sobald das gewünschte Set-Vakuum erreicht ist, stoppt die Pumpe automatisch und hält das Vakuum zuverlässig konstant
- Aufgrund dieser minimalen Laufleistung erhöht sich die Lebensdauer der Membran entscheidend
- Diese Pumpen garantieren einen geräusch- und vibrationsarmen Lauf
- Erzielen Sie damit signifikante Energieeinsparungen
- Mit drehzahlgeregelten Pumpen können Sie das präziseste Vakuum überhaupt erzielen

» **Höchste Destillationsraten bei Reduzierung der Prozesszeiten um 30 %**

» **Lösungsmittelrückgewinnung bis 100 %**

➤ Drehzahlgeregelte Vakuumpumpen

Rotavac Vario Pumpstand

Eigenständig regulierbarer Pumpstand, bestehend aus Vakuumpumpe und Vakuum-Controller – für Hei-VAP Value und Hei-VAP Advantage geeignet



Rotavac Vario Tec

Geeignet für Hei-VAP Precision



Rotavac Vario Control

Geeignet für Hei-VAP Precision



Rotavac Vario Pumpstand
Best. Nr. 591-00142-00
Kondensatkühler
Best. Nr. 591-00084-00

- 3-stufige Membranpumpe aus chemikalienbeständigem Material
- Hohe Saugleistung von 1,7 m³/h für eine schnelle Evakuierung
- Erzeugt einen minimalen Enddruck von 5 mbar
- Die punktgenaue Vakuumregelung verhindert Siedeverzüge und vermeidet Probenverlust
- Durch die automatische Nachführung des Vakuums an die Prozessparameter wird Zeit für wichtigere Labortätigkeiten gewonnen
- Der Pumpstand kann mit einem Kondensatkühler kombiniert werden
- Leistungsaufnahme: 160 W, Gewicht: 6,0 kg
- Abmessungen: B263/H299/T193 mm

Rotavac Vario Tec
Best. Nr. 591-00171-00
Kondensatkühler
Best. Nr. 591-00084-00

- 2-stufige Membranpumpe aus chemikalienbeständigem Material
- Saugleistung von 1,0 m³/h
- Erzeugt einen minimalen Enddruck von 12 mbar
- Empfohlen für Lösungsmittel im niedrigen bis mittleren Siedetemperaturbereich
- Die Pumpe kann mit einem Kondensatkühler kombiniert werden
- Leistungsaufnahme: 160 W, Gewicht: 4,3 kg
- Abmessungen: B236/H196/T156 mm

Rotavac Vario Control
Best. Nr. 591-00141-00
Kondensatkühler
Best. Nr. 591-00084-00

- 3-stufige Membranpumpe aus chemikalienbeständigem Material
- Hohe Saugleistung von 1,7 m³/h für eine schnelle Evakuierung
- Erzeugt einen minimalen Enddruck von 2 mbar
- Selbst bei geöffnetem Gasballastventil wird beim Arbeiten mit leicht kondensierbaren Dämpfen ein sehr gutes Endvakuum erreicht. Ein Verdampfen bei Hochsiedern wie DMF oder DMSO bei niedrigen Temperaturen wird so ermöglicht
- Die Pumpe kann mit einem Kondensatkühler kombiniert werden
- Leistungsaufnahme: 160 W, Gewicht: 5,4 kg
- Abmessungen: B236/H196/T167 mm

› Ventilgesteuerte Vakuumpumpen

Standard Vakuumpumpen, die zur manuellen und ventilgesteuerten Vakuumregelung geeignet sind

Rotavac Valve Tec

Geeignet für alle Hei-VAP Modelle



Rotavac Valve Tec Best. Nr. 591-00160-00
Kondensatkühler Best. Nr. 591-00083-00

- 2-stufige Membranpumpe aus chemikalienbeständigem Material
- Saugleistung von 0,75 m³/h
- Erzeugt einen minimalen Enddruck von 12 mbar
- Empfohlen für Lösungsmittel im niedrigen bis mittleren Siedetemperaturbereich
- Die Vakuumregelung kann ventilgesteuert oder manuell erfolgen
- Die Pumpe kann mit einem Kondensatkühler kombiniert werden
- Leistungsaufnahme: 80 W, Gewicht: 6 kg
- Abmessungen: B315/H169/T145 mm

Rotavac Valve Control

Geeignet für alle Hei-VAP Modelle



Rotavac Valve Control Best. Nr. 591-00130-00
Kondensatkühler Best. Nr. 591-00083-00

- 2-stufige Membranpumpe aus chemikalienbeständigem Material
- Hohe Saugleistung von 2,0 m³/h für eine schnelle Evakuierung
- Erzeugt einen minimalen Enddruck von 7 mbar
- Ausreichende Saugleistung für 3 Rotationsverdampfer gleichzeitig
- Die Vakuumregelung kann ventilgesteuert oder manuell erfolgen
- Das Ein- und Ausschalten der Vakuumpumpe kann bedarfsgerecht über die Switchbox erfolgen
- Die Pumpe kann mit einem Kondensatkühler kombiniert werden
- Leistungsaufnahme: 180 W, Gewicht: 12,8 kg
- Abmessungen: B245/H310/T195 mm

› Umlaufkühler

Rotacool

Höchste Leistung auf kleinstem Raum



Rotacool
Best. Nr. 591-00200-00

- Der weltweit einzigartige Umlaufkühler für Rotationsverdampfer, bei dem durch seine innovative L-Form nur ein minimaler Platzbedarf besteht
- Abmessungen des Umlaufkühlers: B470/H443/T580 mm
- Abmessungen der Stellfläche für den Rotationsverdampfer: B470/T405 mm
- Temperaturbereich von -10 °C bis +40 °C
- Hohe Regelgenauigkeit von ±0,5 °C
- Die Einstellung der Kühlertemperatur erfolgt über ein digitales Display
- Maximale Kühlleistung von 420 Watt

Rotacool Mini

Für Standardanwendungen



Rotacool Mini
Best. Nr. 591-00210-00

- Ist für alle Standardanwendungen geeignet
- Abmessungen des Umlaufkühlers: B225/H400/T450 mm
- Die Kühltemperatur ist konstant auf 7 °C eingestellt
- Die Kühlleistung beträgt 370 W
- Regelgenauigkeit von ±1 °C
- Kein digitales Display

RotaChill

Das kostengünstige Modell



RotaChill
Best. Nr. 591-00220-00

- Temperaturbereich von 0 °C bis +100 °C
- Präzise Regelgenauigkeit von ±0,2 °C
- Abmessungen des Umlaufkühlers: B210/H570/T450 mm
- Um die notwendige Pumpleistung zu gewährleisten, sollte der RotaChill direkt neben dem Rotationsverdampfer platziert werden

	Rotacool	Rotacool Mini	RotaChill
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-10 bis +40	7 konstant	0 bis +100
Kühlflüssigkeitsfüllung [L]	2	3	6
Kühlleistung* bei: +20 °C [W]	420		200
+7 °C		370	
0 °C	350		140
-10 °C	220		

* bei 20 °C Umgebungstemperatur

➤ Das modulare Konzept

Das modulare Konzept besteht aus einem Rotationsverdampfer mit Vakuumtechnik und Umlaufkühler



IHRE VORTEILE

- Alle Elemente sind in puncto Leistung technisch aufeinander abgestimmt
- Arbeiten Sie unabhängig von zentralen Vakuum- und Wasseranschlüssen
- Heidolph bietet Ihnen ein komplettes Baukastensystem aus „einer Hand“
- Nutzen Sie den Platz in Ihrem Labor effizient: Das modulare System nimmt nur eine Stellfläche von 470 x 580 mm ein

➤ Zubehör




Schutzhaube

- Besteht aus widerstandsfähigem, hochtransparentem Kunststoff
 - Zum Schutz vor Implosionen
 - Einfacher und schneller Zugriff auf den Kolben und das Heizbad
- Best. Nr. 569-00010-00



Schutzschild

- Besteht aus widerstandsfähigem, hochtransparentem Kunststoff
 - Zum Schutz beim Kolbenwechseln
 - Wird auf dem Heizbadrand befestigt
- Best. Nr. 569-00020-00

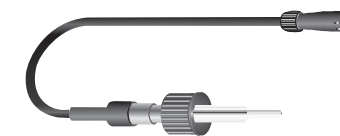

Siedetemperaturfühler

- Für Hei-VAP Advantage und Hei-VAP Precision
- Best. Nr. 569-00030-00



AUTOaccurate-Fühler

- Für Hei-VAP Precision
 - Nur in Kombination mit Glassatz G3 oder G6 kompatibel
- Best. Nr. 569-00040-00



Heizbadflüssigkeit (5 L)

- Mit Wasser vermischbare Heizbadflüssigkeit
 - Maximaltemperatur: 240 °C
- Best. Nr. 515-31000-00



Ersatz Vakuumdichtung (PTFE)

- Best. Nr. 23-30-01-01-30



Aqua Stop

Ein Ventil schließt die Wasserzufuhr automatisch, sobald der Rotationsverdampfer ausgeschaltet wird. Dies verhindert unnötigen Wasserverbrauch und senkt so Ihre Kosten. Außerdem verhindert dieser Sicherheitsmechanismus eine Überflutung im Labor (Nur für Hei-VAP Advantage und Hei-VAP Precision)

Best. Nr. 569-00500-00



Ersatz Klemmhülse

- Best. Nr. 23-30-01-05-31

Ersatz Dampfdurchführung NS 29/32

- Best. Nr. 514-00000-01



Schlauchset


- Besteht aus einem Vakuumschlauch und einem Wasserschlauch je 6,25 m
- Best. Nr. 591-35000-00

> Glassätze

- Im Lieferumfang ist je ein 1.000 ml Verdampfungs- und ein 1.000 ml Auffangkolben enthalten
- Alle Glassätze sind auch mit völlig transparenter Kunststoffbeschichtung (Surlyn®-Beschichtung) lieferbar
Ausnahme: Glassatz G5 mit Halar-Beschichtung
- Standardschliff ist NS 29/32, auf Wunsch auch mit Schliff NS 24/29 lieferbar
- Nur die Glassätze G3 und G6 sind für das automatische Destillationsprogramm AUTOaccurate mit Hei-VAP Precision Modellen geeignet
- Auf Anfrage sind auch Glassätze für Soxhlet-Extraktion und absteigende Kühlsysteme lieferbar
- Durch ein GL 10 Gewinde am Einfüllstutzen kann der Einleitschlauch befestigt werden


Glassatz G1

- Diagonalkühler für alle Standarddestillationen; die **preisgünstige Variante**

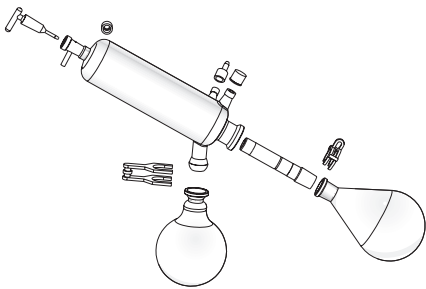


Glassatz G5

- Für tiefsiedende Lösungsmittel; **Trockeneiskühler**

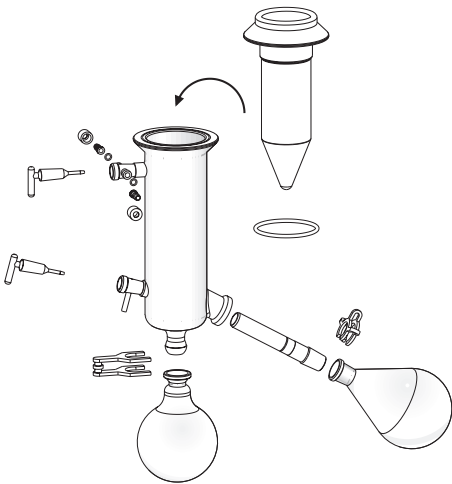


Glassatz G3

- Vertikalkühler für alle Destillationen; die **platzsparende Variante**

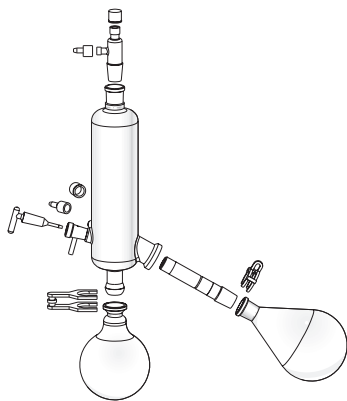


Glassatz G6

- Vertikalkühler; Mittelstück mit Ventil **für Rückflussdestillationen**

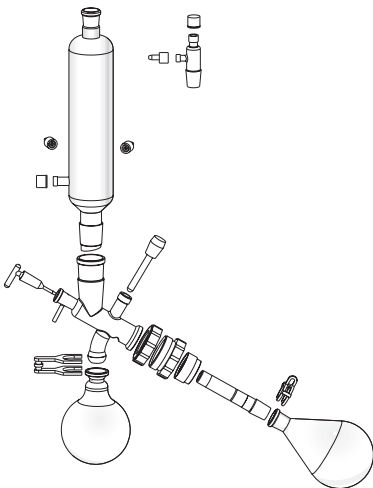

> Zubehör

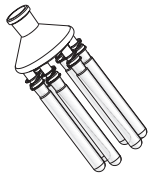

Verdampferkolben	NS 29/32	NS 24/29
Verdampferkolben * 50 ml	514-70000-00	514-70000-01
Verdampferkolben 100 ml	514-71000-00	514-71000-01
Verdampferkolben 250 ml	514-72000-00	514-72000-01
Verdampferkolben 500 ml	514-73000-00	514-73000-01
Verdampferkolben 1.000 ml	514-74000-00	514-74000-01
Verdampferkolben 2.000 ml	514-75000-00	514-75000-01
Verdampferkolben 3.000 ml	514-76300-00	514-76300-01
Verdampferkolben 5.000 ml	514-78000-00	514-78000-03

* Verdampferkolben NS 14,5 inkl. Adapter (NS 29 oder NS 24)

Auffangkolben	standard	beschichtet
Auffangkolben - NS 35/20 100 ml	514-81000-00	514-81000-02
Auffangkolben - NS 35/20 250 ml	514-82000-00	514-82000-02
Auffangkolben - NS 35/20 500 ml	514-83000-00	514-83000-02
Auffangkolben - NS 35/20 1.000 ml	514-84000-00	514-84000-02
Auffangkolben - NS 35/20 2.000 ml	514-85000-00	514-85000-02
Auffangkolben - NS 35/20 3.000 ml	514-87000-00	514-87000-02

Pulverkolben	NS 29/32	NS 24/29
Pulverkolben 500 ml	514-73200-00	514-73200-01
Pulverkolben 1.000 ml	514-74200-00	514-74200-01
Pulverkolben 2.000 ml	514-75300-00	514-75300-01

Spinne	NS 29/32	NS 24/29
Spinne mit 6 Destillierhülsen NS 14,5 20 ml	15-300-005-09	15-300-005-12
Spinne mit 12 Destillierhülsen NS 14,5 20 ml	15-300-005-10	15-300-005-13
Spinne mit 20 Destillierhülsen NS 14,5 20 ml	15-300-005-11	15-300-005-06

Spinne	NS 29/32	NS 24/29
Spinne mit 5 Kolben NS 24 50 ml	15-300-005-04	15-300-005-08
Spinne mit 5 Kolben NS 24 100 ml	15-300-005-07	15-300-005-05

Verdampfungszyylinder	NS 29/32	NS 24/29
Verdampfungszyylinder 500 ml	514-00070-00	514-00070-01
Verdampfungszyylinder 1.500 ml	514-00071-00	514-00071-01

Schaumbremse	NS 29/32	NS 24/29
Schaumbremse inkl. Kolbenklemme	514-00004-00	514-00005-00

Vial-Adapter	NS 29/32
Vial-Adapter GL18	15-300-002-81-0
Vial-Adapter GL25	15-300-002-82-0

› **Vakuumbzubehör**

Switchbox

Verbindet 3 Verdampfer mit einer Vakuumpumpe



Switchbox
Best. Nr. 569-00400-00

- Ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 3 Rotationsverdampfern, die individuell angesteuert werden können
- Die Vakuumpumpe kann automatisch abgeschaltet werden, wenn kein Vakuum benötigt wird
- Ein überhöhter Energieverbrauch wird vermieden
- Die Lebensdauer der Vakuumpumpe wird erhöht, da diese beim Erreichen des Soll-Vakuums ausgeschaltet wird
- Bei Applikationen mit verschiedenen Druckeinstellungen ist für jeden Verdampfer ein Vakuumventil und ein Rückschlagventil notwendig
- Im Lieferumfang sind 3 Rückschlagventile enthalten
- Gewicht: 0,6 kg
- Abmessungen: B80/H45/T160 mm
- Ist für Hei-VAP Precision geeignet

Manueller Vakuumregler

Für Hei-VAP Value und Hei-VAP Advantage



Manueller Vakuumregler
Best. Nr. 591-26000-00

- Zur Regelung bereits vorhandener ventilgesteuerter Vakuumpumpen oder Hausvakuum
- Skala: 0 bis 1020 mbar
- Skala-Einteilung in 50 mbar Schritten
- Der Anschluss ist für Schläuche von 8 mm Innendurchmesser ausgelegt
- Eine Montage am Verdampfer selbst ist möglich. Ein Stativ ist im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: B80/H150/T80 mm
- Ein Vakuumventil ist nicht erforderlich

Vakuumventil

Erforderlich zur Vakuumregelung für Hei-VAP mit ventilgesteuerter Vakuumpumpe



Vakuumventil
Best. Nr. 569-00060-00

- Ist durch die Positionierung leicht zur Reinigung zugänglich
- Ist mit der Woulff'schen Flasche zu einer Einheit montierbar
- Ist nicht bei manueller Vakuumregelung erforderlich

Woulff'sche Flasche

Best. Nr. 569-00070-00

- Zum Abscheiden von Kondensat, um die Ventile der Vakuumpumpe zu schützen
- Wird direkt am Vakuumventil angeschlossen
- Ein Anschluss für die Vakuumleitung zum Vakuum-Controller ist vorhanden
- Volumen von 250 ml

› **Gerätekonfigurationen**

Rotationsverdampfer



Hei-VAP Value






Hei-VAP Advantage



Hei-VAP Precision

Vakuumpumpe

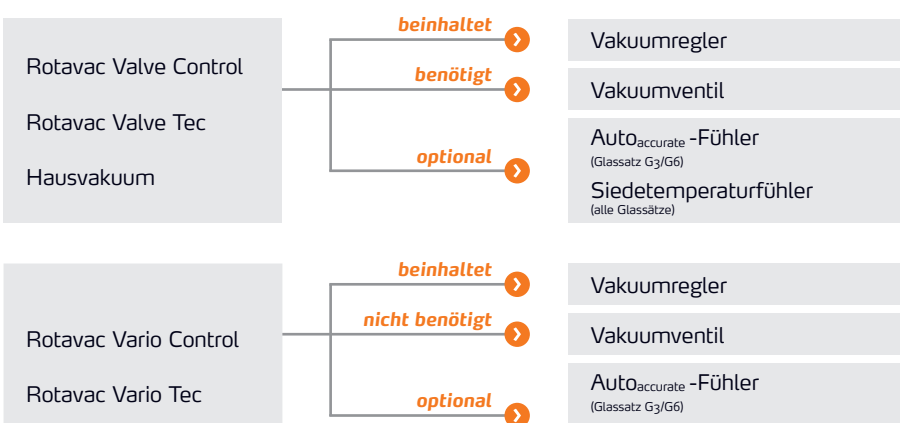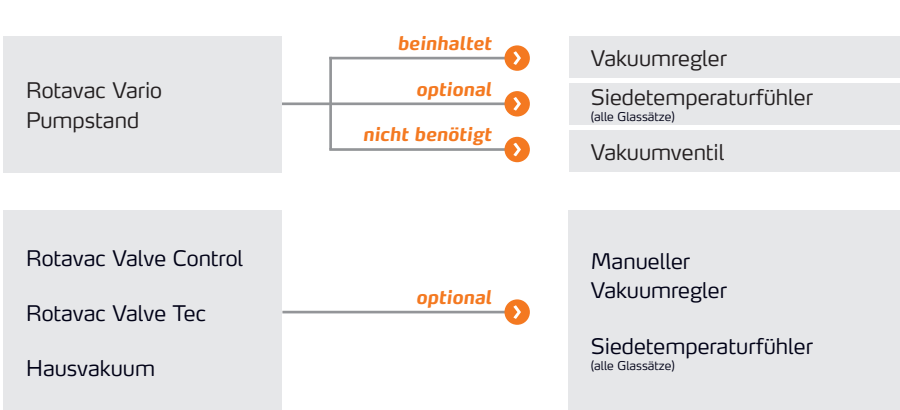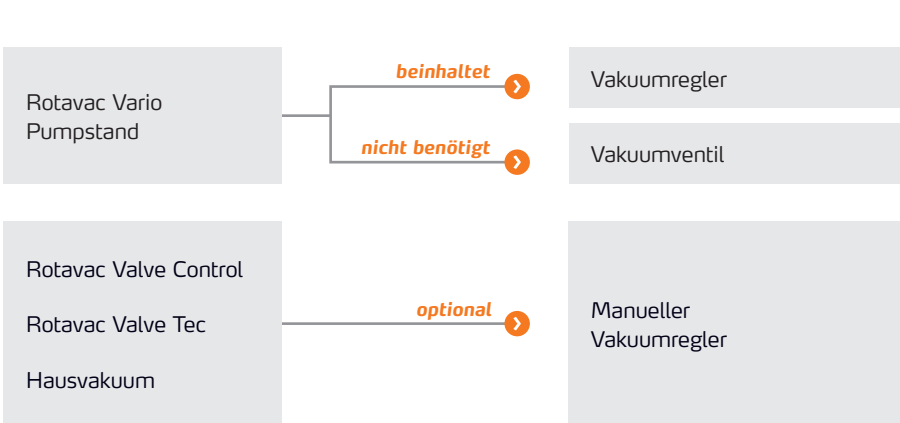

➤ Hei-VAP Plug & Play Pakete



Hei-VAP Plug & Play Value Cool
Best. Nr. 560-91309-00

Hei-VAP Plug & Play Value

Grundausstattung für Ihr Labor

Hei-VAP Plug & Play Value 1

- Hei-VAP Value mit Handlift und vertikalem Glassatz G3
- Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec
- Manueller Vakuumregler
- Schlauchset

Best. Nr. 560-91300-00

Hei-VAP Plug & Play Value 2

- Hei-VAP Value mit Handlift und beschichtetem vertikalem Glassatz G3B
- Vakuumpumpe Rotavac Valve Control
- Manueller Vakuumregler
- Schlauchset

Best. Nr. 560-81310-00

Hei-VAP Plug & Play Value Cool

- Hei-VAP Value mit Handlift und vertikalem Glassatz G3
- Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec
- Manueller Vakuumregler
- Umlaufkühler RotaChill
- Schlauchset

Best. Nr. 560-91309-00



Hei-VAP Plug & Play Advantage Cool
Best. Nr. 562-91307-00

Hei-VAP Plug & Play Advantage

Für Standardanwendungen mit geregelterm Vakuum

Hei-VAP Plug & Play Advantage 1

- Hei-VAP Advantage mit Handlift und vertikalem Glassatz G3
- Siedetemperaturfühler
- Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec
- Manueller Vakuumregler
- Schlauchset

Best. Nr. 561-41300-00

Hei-VAP Plug & Play Advantage 2

- Hei-VAP Advantage mit Motorlift und beschichtetem vertikalem Glassatz G3B
- Siedetemperaturfühler
- Vakuumpumpe Rotavac Vario Pumpstand
- Schlauchset

Best. Nr. 562-11310-00

Hei-VAP Plug & Play Advantage Cool

- Hei-VAP Advantage mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3
- Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec
- Manueller Vakuumregler
- Umlaufkühler Rotacool Mini
- Schlauchset

Best. Nr. 562-91307-00



Hei-VAP Plug & Play Precision 2
Best. Nr. 563-51310-00

Hei-VAP Plug & Play Precision

Automatische Destillation mit Hei-VAP Precision Handlift-Modellen und ventilgesteuerter Vakuumpumpe

Hei-VAP Plug & Play Precision 1

- Hei-VAP Precision mit Handlift und vertikalem Glassatz G3
- Siedetemperaturfühler
- Vakuumventil
- Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec mit Kondensatkühler
- Schlauchset

Best. Nr. 563-61300-00

Hei-VAP Plug & Play Precision 2

- Hei-VAP Precision mit Handlift und beschichtetem vertikalem Glassatz G3B
- Temperaturfühler AUTO_{accurate}
- Vakuumventil
- Vakuumpumpe Rotavac Valve Control mit Kondensatkühler
- Schlauchset

Best. Nr. 563-51310-00

Hei-VAP Plug & Play Safety Upgrade

Für höchste Sicherheit

Hei-VAP Plug & Play Safety Upgrade

Aufpreis für die Beschichtung des Glassatzes und eine zusätzliche Schutzhaube beim Kauf eines Hei-VAP Plug & Play Paketes

Best. Nr. 569-00311-00



Hei-VAP Plug & Play Premium Cool
Best. Nr. 564-31318-00

Hei-VAP Plug & Play Premium

Automatisierte Destillation mit Hei-VAP Precision Motorlift-Modellen und drehzahl geregelter Vakuumpumpe

Hei-VAP Plug & Play Premium 1

- Hei-VAP Precision mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3
- Temperaturfühler AUTO_{accurate}
- Vakuumpumpe Rotavac Vario Tec mit Kondensatkühler
- Woulff'sche Flasche
- Schlauchset

Best. Nr. 564-21300-00

Hei-VAP Plug & Play Premium 2

- Hei-VAP Precision mit Motorlift und beschichtetem vertikalem Glassatz G3B
- Temperaturfühler AUTO_{accurate}
- Vakuumpumpe Rotavac Vario Control mit Kondensatkühler
- Woulff'sche Flasche
- Schlauchset

Best. Nr. 564-31310-00

Hei-VAP Plug & Play Premium Cool

- Hei-VAP Precision mit Motorlift und beschichtetem vertikalem Glassatz G3B
- Temperaturfühler AUTO_{accurate}
- Vakuumpumpe Rotavac Vario Control mit Kondensatkühler
- Woulff'sche Flasche
- Umlaufkühler Rotacool
- Schlauchset

Best. Nr. 564-31318-00

Technische Daten – Rotationsverdampfer

Modell	Hei-VAP Value (HL)	Hei-VAP Advantage (HL)	Hei-VAP Advantage (ML)	Hei-VAP Precision (HL)	Hei-VAP Precision (ML)
Hand- / Motorlift	Handlift	Handlift	Motorlift	Handlift	Motorlift
Hubgeschwindigkeit	manuell	manuell	30 mm/s	manuell	30 mm/s
Hubweg (mm)	155	155	155	155	155
Drehzahlbereich (U/min)	20 – 280	20 – 280	20 – 280	20 – 280	20 – 280
Drehzahlanzeige	Skala	3,5" LCD Display	3,5" LCD Display	4,3" LCD Farbdisplay	4,3" LCD Farbdisplay
Antrieb	Bürstenloser Gleichstrommotor mit elektronischer Drehzahlregelung				
Heizleistung (W)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Temperaturbereich Heizbad (°C)	20 – 210	20 – 210	20 – 210	20 – 210	20 – 210
Regelgenauigkeit Heizbad (°C)	±1	±1	±1	±1	±1
Übertemperaturschutz (°C)	Abschaltung bei 5 °C über Solltemperatur (mit separatem PT 1000)				
Anzeige Heizbadtemperatur****	Skala	3,5" LCD Display	3,5" LCD Display	4,3" LCD Farbdisplay	4,3" LCD Farbdisplay
Regelung Heizbadtemperatur	elektronisch/digital	elektronisch/digital	elektronisch/digital	elektronisch/digital	elektronisch/digital
Übertemperaturbegrenzer (°C)	250	250	250	250	250
Material Heizbad	Edelstahl V4A (1.4404)	Edelstahl V4A (1.4404)	Edelstahl V4A (1.4404)	Edelstahl V4A (1.4404)	Edelstahl V4A (1.4404)
Durchmesser Heizbad (mm)	255	255	255	255	255
Volumen Heizbad (l)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Anzeige Siedetemperatur (dazu benötigtes Zubehör)	nein	ja Siedetemperaturfühler	ja Siedetemperaturfühler	ja Siedetemperaturfühler	ja Siedetemperaturfühler
Vakuum-Controller integriert	nein	nein	nein	ja	ja
Timer	nein	ja	ja	ja	ja
Vakuumregelmodus SET _{pressure} **	nein	nein	nein	ja	ja
Vakuumregelmodus AUTO _{easy} **	nein	nein	nein	ja	ja
Vakuumregelmodus AUTO _{accurate} ** erfordert AUTO _{accurate} -Fühler	nein	nein	nein	ja	ja
Funktionen der Fernbedienung					
- Lift	nein	nein	ja	nein	ja
- Start Rotation	ja	ja	ja	ja	ja
- Start Vakuum	nein	nein	nein	ja	ja
- Start Heizbad	ja	ja	ja	ja	ja
Programmierung von Rampen	nein	nein	nein	ja	ja
Anschlussleistung (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Gewicht (ohne Glassatz) (kg)	16	16	16	17	17
Abmessungen (B x H x T) (mm)	395 x 430 x 490	395 x 430 x 490	395 x 430 x 420	395 x 430 x 490	395 x 430 x 420
Schutzart*** (DIN EN 60529)	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Zulässige Umgebungsbedingungen (°C)	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Verdampfungsrate* (L/h)					
- Toluol	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
- Aceton	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
- Ethanol	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- Wasser	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Kühlfläche (cm²)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

* Bei einem ΔT von 40 °C zwischen Heizbadtemperatur und Siedetemperatur
** Nur in Verbindung mit Vakuumsystemen möglich
*** IP 67 für Anschlusskabel Heizbad
**** Hei-VAP Value Digital: digitales Display

Standard Anschlussspannung: 230 V - andere Anschlussspannungen auf Anfrage



Zertifikat

Bescheinigung für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb von Rotationsverdampfern der Hei-VAP Serie

Die Rotationsverdampfer der Hei-VAP Serie sind mit Übertemperatur-Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 61010-1:2001 und DIN EN 61010-2-010:2003 und somit für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet.

Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung und die Arbeitsweise nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin, der Laborrichtlinie, der Unfallverhütungsvorschriften und der Gefahrstoffverordnung.

Schwabach, im Januar 2013

Jan Welzien

i. V. Jan Welzien
Leiter Technik

S. Richter

i. A. Stefan Richter
Leiter Qualitätssicherung

➤ Innovative Vakuumregelung für Rotationsverdampfer

Verschiedene Methoden der Vakuumregelung für Rotationsverdampfer werden hinsichtlich ihres Nutzens für den Anwender verglichen. Wichtige Kriterien sind die Prozesszeit, die Lösungsmittelrückgewinnungsrate sowie einfache Handhabung und Flexibilität. Drehzahlgesteuerte Membranpumpensysteme mit vollautomatischem Regler bieten klare Vorteile und dazu unerreichte Standzeiten der Verschleißteile.



Abbildung 1: Rotationsverdampfer, drehzahlgeregelte Vakuumpumpe und Umlaufkühler als modulares System

Vakuum als Werkzeug im Chemielabor

In den letzten Jahren hat sich die Membranpumpe im chemischen Labor weitgehend durchgesetzt. Zahlreiche Anwendungen werden vorteilhaft mit einem geregelten Vakuum geführt. Bestes Beispiel ist der Rotationsverdampfer, bei dem durch geeigneten Unterdruck - möglichst nahe am Siedepunkt des Lösungsmittels - die Verdampfung des Lösungsmittels bei schonenden Temperaturen erfolgt (Abbildung 1). Ist der Druck zu hoch, dauert die Verdampfung unnötig lange, ist er zu niedrig, tendiert das Gemisch zum Übersäumen. Fragt sich, wie den Druck optimal regeln - manuell oder automatisch, und falls automatisch, wie? Die Technik der Regelung ist für Leistung, Wirtschaftlichkeit und Umweltaspekte entscheidend. Kein Mensch würde heute noch die Temperatur des Wasserbades am Rotationsverdampfer von Hand einstellen.

Obwohl ein geschickter Anwender - wenn er denn die Zeit hat, permanent am Heizungsregelknopf nachjustieren - dies so gut könnte wie ein elektronischer Regler, ist eine solche Vorstellung in einem modernen chemischen Labor ziemlich abwegig. Kaum jemand verwendet heute noch Quecksilberthermometer zur „Regelung“, sondern eben elektronische Regler zumindest mit PID - Charakteristik. Mit der nötigen Geduld lassen sich mit solchen manuellen Systemen sicher gute Ergebnisse erzielen - aber vielen Anwendern ist es zu mühsam, regelmäßig den optimalen Druck zu finden und nachzuregulieren, und dies zum Teil über viele Stunden hinweg. Man muss sich vergegenwärtigen, dass mit einem Handregelventil nicht der Druck, sondern nur das Saugvermögen eingestellt wird. Durch die Abdampfung verändern sich Temperatur und Lösungsmittelzusammensetzung des Gemisches laufend. Folglich driftet der Siededruck, und der Anwender muss kontinuierlich das Ventil von Hand nachstellen. In der heutigen Forschungslandschaft mit hohem Kosten- und Zeitdruck ist dies kaum noch sinnvoll. Anlass genug zur Entwicklung automatischer Vakuum-Controller, die den Druck zumindest auf einem fest eingestellten Wert halten. Dies ist heute Stand der Technik - wobei es durchaus Unterschiede in der Realisierung gibt.

Eine herkömmliche Methode ist die Regulierung des Durchflusses mittels elektromagnetisch betätigtem Zweipunktregelventil. Die Pumpe läuft kontinuierlich auf voller Leistung. Überschreitet der Ist-Druck einen voreingestellten Druckwert (Soll-Druck plus Hysterese), öffnet das Ventil auf vollen Durchfluss. Das System wird schlagartig evakuiert bis der Ist-Druck unter den Soll-Druck fällt. Mit diesen Systemen lässt sich mit entsprechender Vorkenntnis und Vernunft ein respektables Ergebnis erzielen. Bei simplen Reglern tauchen Probleme mit

„Unterschießen“ des Drucks oder schwingenden Regelkreisen auf - was zu Aufschäumen und Überkochen des Lösungsmittels führen kann. Ein weiteres Problem ist, dass ein solches System wegen der regelungstechnisch bedingt großen Hysterese einen Großteil der Zeit weit oberhalb des optimalen Betriebsdrucks arbeitet. Die geringe Effizienz spiegelt sich in langen Verdampfungszeiten wieder. Darüber hinaus arbeiten nur die wenigsten der handelsüblichen Vakuumregler wirklich „automatisch“: Der Anwender muss aus seiner Erfahrung vernünftige Einstellwerte für Soll-Druck und Hysterese kennen und einprogrammieren. Leider sind diese Werte für jedes Lösungsmittelgemisch und Temperatur unterschiedlich. Die Temperatur im Verdampfergefäß wird nach einsetzender Verdampfung hauptsächlich durch die Heizleistung am Wasserbad und die Verdunstungswärme des Lösungsmittels - und damit auch die Lösungsmittelmenge - bestimmt. Manche Hersteller versuchen dies durch Druckstufen oder -rampen auszugleichen, doch erhöht dies die Zahl der freien Parameter, die in den Controller einzuprogrammieren sind, weiter. Woher soll der Anwender den optimalen Druckverlauf kennen? Diese Systeme sind nicht in der Lage, Siededruckniveaus selbsttätig zu erkennen und nachzuführen. Dies würde bei der „grobe“ Art der Vakuumregelung über ein Ventil mit zwei Stellungen (Auf - Zu) auch kaum Sinn machen.



Abbildung 2: Drehzahlgeregelte Membranpumpe für Heidolph Rotationsverdampfer

Drehzahlgesteuerte Vakuumpumpensysteme mit vollautomatischem Regler

Die Lösung ist die kontinuierliche Vakuumregelung mit drehzahlgesteuertem Motor als Antrieb der Membranpumpe. Das Konzept ist einfach, die praxisgerechte und wirtschaftliche Realisierung der Frequenzregelung erforderte viel technisches Wissen. Und erst die Verbindung mit einem integrierten PID-Regler bringt dem Gesamtsystem all seine Talente: Unterschießen, Überspringen und Ähnliches gehören der Vergangenheit an (Abb. 2: Rotavac vario control). Verdampfung und Trocknung sind komplizierte Prozesse, die von einer Vielzahl von Parametern beeinflusst werden. Einfache Stufenregler zur Ansteuerung einer drehzahlgeregelten Membranpumpe bieten kaum Vorteile im Vergleich mit Zweipunktventilreglern, da sie wieder auf die Programmierung von Soll-Drücken durch den Anwender angewiesen sind. Vollautomatische Regler finden anhand der Dampftemperatur den Siedepunkt (oder auch mehrere nacheinander in Gemischen), fahren diesen „gefühlvoll“ ohne Unterschießen an und

folgen ihm auch bei Temperaturänderungen im Bad. Der Controller regelt den Druck stets exakt am Siedepunkt, um optimale Verdampfungsraten und kürzestmögliche Prozesszeiten zu realisieren. Das Prinzip der kontinuierlichen Vakuumregelung ist in Abbildung 3 dargestellt. An die Stelle des systembedingten Schwankens des Ist-Drucks um den Soll-Druck bei Zweipunktregelung tritt eine prozessgerechte Annäherung und Nachführung des Siededrucks. Abbildung 4 illustriert den Zeitgewinn bei Verwendung des drehzahlgeregelten Systems mit Siededrucknachführung (beim Heidolph Hei-VAP Precision Mode AUTO_{accurate}) im Vergleich mit einer herkömmlichen Zweipunktregelung ohne Siededrucknachführung unter sonst gleichen Testbedingungen. Die Destillation erfolgt mit dem drehzahlgeregelten System mit Siededrucknachführung wesentlich schneller. Dieser Zeitgewinn bei der Prozessführung verkürzt die Durchlaufzeiten und damit die Betriebskosten im Laboralltag. Werden die Kosten für den täglichen Arbeitszeitaufwand mit herkömmlichen Pumpständen im Sinne einer „Cost of Ownership“-Kalkulation mit einbezogen, sind drehzahlgeregelte

Systeme mit Siedepunktnachführung die klaren Gewinner. Mit dem drehzahlgeregelten System finden Destillationen im Gleichgewicht mit optimaler Effizienz statt. Die Rückgewinnungsrate des Lösungsmittels ist nahe 100 % und kaum mit einer simplen manuellen „Regelung“ oder programmierten Druckstufen zu erreichen. Bei Zweipunktreglern wird beim „Unterschießen“ des Soll-Drucks häufig eine große Menge Lösungsmittel in die Pumpe mitgerissen und führt zu Kondensationsproblemen im Schöpfraum und an den Ventilen.

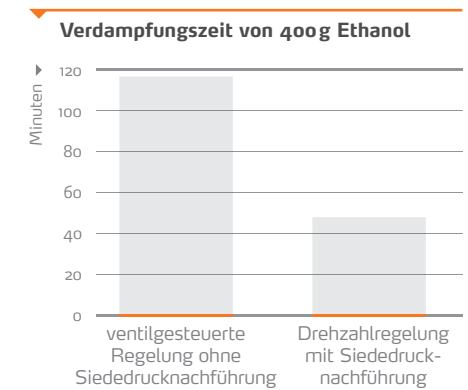


Abbildung 4: Zeit für Verdampfung von Lösungsmittel: Zweipunktregelung - drehzahlgeregeltes System

Vergleich: Zweipunktregelung - Vollautomatische Regelung mit Drehzahlsteuerung

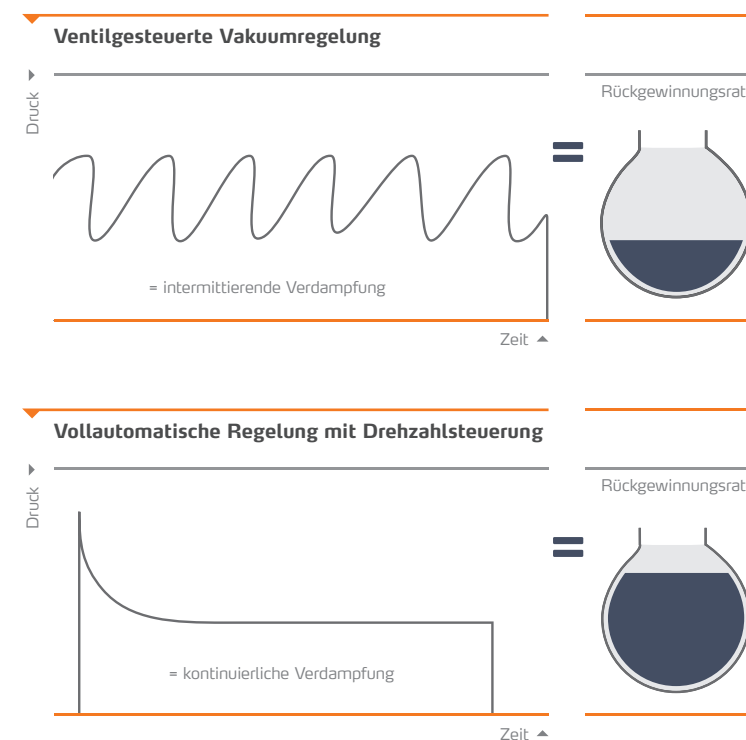


Abbildung 3: Schematischer Druckverlauf: Zweipunktregelung - drehzahlgeregeltes System

Besonders zweizylindrige Membranpumpen sind eher anfällig für Kondensation und benötigen einen Gasballast, der jedoch den Enddruck verschlechtert. Die einzige echte Lösung bleibt die dreistufige Pumpe, möglichst mit Drehzahlsteuerung.

Neben den überragenden regelungstechnischen Vorteilen bietet die drehzahlgesteuerte Pumpe weitere Pluspunkte für den Anwender. Die Pumpe läuft bedarfsgerecht nur dann, wenn sie gebraucht wird, also meistens mit minimaler Drehzahl von wenigen Hertz. Dies schlägt sich in niedrigem Geräusch, geringen Vibrationen und erheblich verlängerter Standzeit der Membrane und Ventile nieder. Die Membranlebensdauer bestimmt sich nach der Zahl der Hübe. So werden aus den 10.000 Stunden Membranlebensdauer (bei 50 Hertz) von Vacuubrand Membranpumpen schnell viele Jahre wartungsfreier Betrieb für drehzahlgeregelte Systeme.

Danksagung

Wir danken Dr. Jürgen Dirscherl, Technischer Leiter der Firma Vacuubrand für die freundliche Unterstützung und die Bereitstellung von Daten für diesen Artikel.

Intelligent Destillieren



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung





Ist eine schnelle Bedienung ohne fremde Hilfe bei einem einzigartig hohen Maß an Sicherheit selbstverständlich für Sie?

Intelligent Destillieren

Mit den Laborota 20 Großrotationsverdampfern ist ein Kolbenwechsel, auch wenn Sie alleine sind, in Sekundenschnelle erledigt. Darüber hinaus profitieren Sie von einem einzigartigen Sicherheitskonzept!

Höchste Sicherheit

- Schützen Sie sich zuverlässig: Die **Schutzhaube aus Metall** und **Sicherheitsglas** hält aufsteigenden Dampf, spritzende Heizbadflüssigkeit und Splitter bei Glasbruch zuverlässig von Ihnen ab
- Der Glassatz befindet sich hinter einer robusten **PMMA-Schutzscheibe**. Das macht eigene Sicherheitsmaßnahmen gegen Explosionen und Implosionen entbehrlich
- Um Glasbruch und austretendes Lösungsmittel zu verhindern, werden die Auffangkolben durch eine PMMA – Schutzscheibe und ein **patentiertes Kassettensystem** geschützt
- Der integrierte **Übertemperaturschutz** schaltet bei unkontrolliertem Aufheizen das Bad vollständig ab und verhindert so Schäden durch Überhitzung
- Um Unfälle zu vermeiden, müssen Rotationsgeschwindigkeit, Heizbadtemperatur und Vakuum nach Eingabe des Sollwertes separat durch einen Knopfdruck gestartet werden
- Sie, als GMP-zertifizierter Kunde, können eine optionale **IQ-OQ** Abnahme und Dokumentation erwerben
- Bei Überdruck schaltet ein Sicherheitskreis das Gerät sofort ab
- Um Gefahren beim Wechsel des Verdampferkolbens auszuschließen, muss der Antrieb dazu komplett blockiert werden
- Im Falle einer unmittelbaren Gefahr lässt sich der Verdampfer durch einen **Not-Aus-Schalter** unverzüglich stoppen
- Im nicht betriebsbereiten Zustand werden am Bedienpanel **sicherheitsrelevante Funktionen** angezeigt, die zum Starten erfüllt sein müssen. Vorher ist eine Inbetriebnahme nicht möglich
- **Überlaufschutz** durch automatische Wasserbadnachspeisung: Bei Modellen mit Wasserbad misst ein Sensor den Stand Ihres Wasserbades und verhindert ein Überlaufen beim Eintauchen des Verdampferkolbens
- Wird die Schutzhaube während des laufenden Betriebes geöffnet, schaltet sich die Rotation aus Sicherheitsgründen automatisch ab

➤ Sicherheitsrelevante Funktionen




1) Separates Display für alle Prozessparameter

2) Sicherheitsrelevante Anzeigen:

- Schutzhaube offen
- Kolbenentnahmesystem wurde aktiviert
- Rotation blockiert
- Übertemperaturschutz eingeschaltet
- Emergency-Funktion wurde aktiviert

3) Not-Aus-Schalter

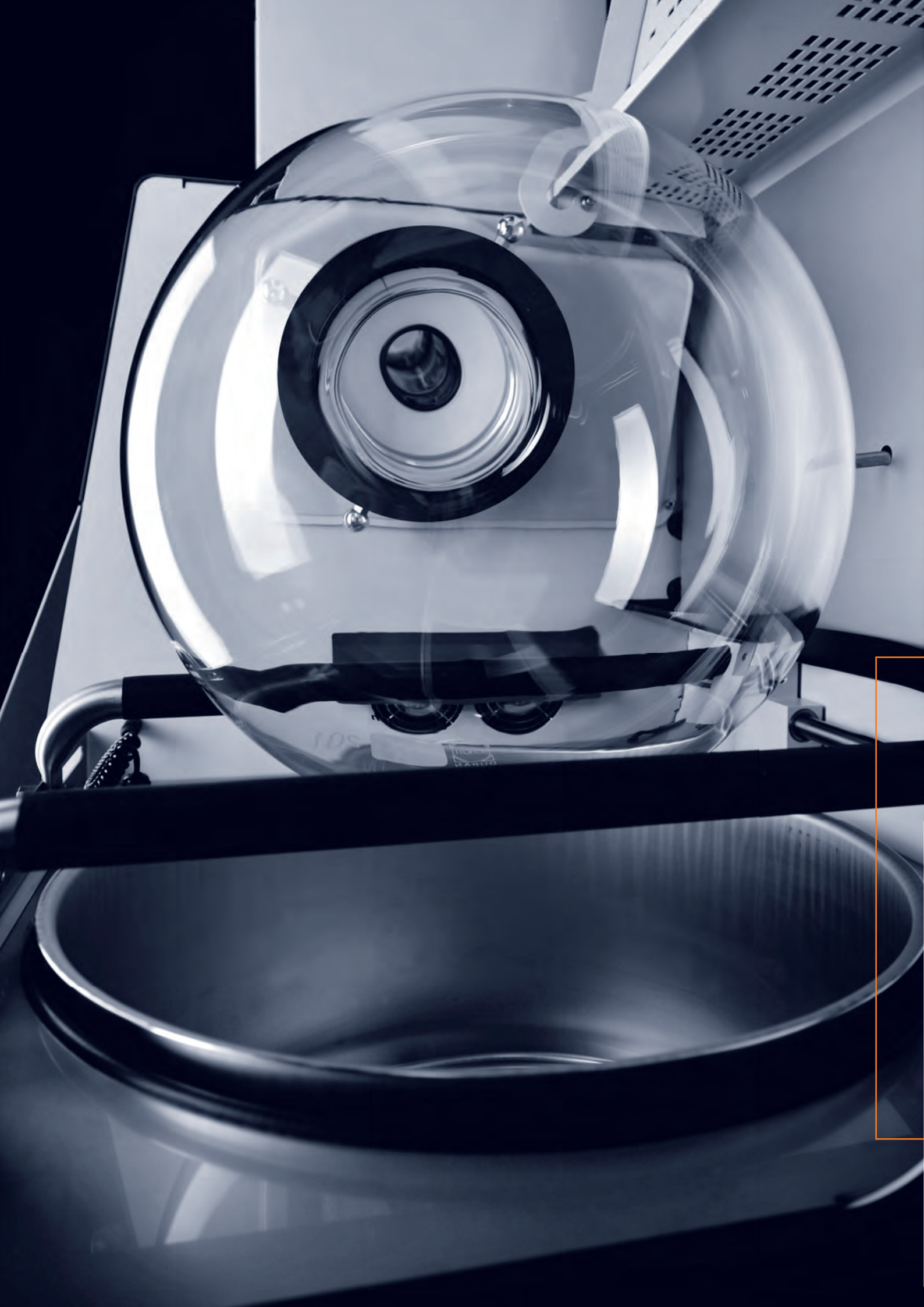

Bester Bedienkomfort

- Eine einzigartige Vorrichtung erlaubt Ihnen den sicheren Wechsel des Verdampferkolbens ohne fremde Hilfe
- Der optionale mobile Unterbau gibt Ihnen **höchste Flexibilität** bei der Aufstellung und beim Transport des Gerätes
- Das Kassettensystem schützt Ihre Auffangkolben und gewährleistet ihnen einen sicheren Stand auf ebenen Flächen
- Alle Auffangkolben verfügen über Ablassventile zum **schnellen Entleeren**
- Um Kondensatbildung im Bereich des Verdampferkolbens zu vermeiden und **visuelle Reaktionskontrolle** zu gewährleisten, wird dieser Bereich durch zwei leistungsstarke Ventilatoren belüftet
- Zur **einfachen Pflege und Reinigung** lässt sich das Wasserbad über einen Bodenablass schnell und sicher leeren
- Bei anspruchsvollen Applikationen kann nachgeregelt oder automatisiert werden, um ein Schäumen und Siedeverzüge zu verhindern
- Ein optionales Softwareprogramm erleichtert Ihnen die PC-gesteuerte Rampenprogrammierung und vollständige **Dokumentation Ihrer Prozesse**. Nutzen Sie dazu die RS 232 Schnittstelle Ihres Laborota 20
- **Keine wiederholte Eingabe von Prozessparametern** durch die Speicherung von Rampen für Ihre am häufigsten benutzte Applikation
- Prozesse können individuell durch freie Programmierung von Druck- und Temperaturgradienten gesteuert werden
- Die Timerfunktion beendet Ihre Applikation automatisch
- Verkürzen Sie Ihre Prozesszeiten durch zwei Programme für die **automatisierte Destillation**
- Nie wieder Ärger durch ausgetrocknete Wasserbäder: Die automatische Wasserbadnachspeisung sorgt immer für **ausreichend Flüssigkeit** im Wasserbad
- Das optional erhältliche Automatikmodul ermöglicht Ihnen die **vollautomatische Destillation** im unbeaufsichtigten Dauerbetrieb

Dauerhafte Kostenreduzierung

- Durch die Wasserbadnachspeisung und den Übertemperaturschutz bedarf es im Prozessablauf **keiner zeitaufwendigen Überprüfung**
- Das notwendige Zubehör wie Vakuum-Controller, Vakuumventil und Vakuumsensor sind im Lieferumfang bereits enthalten. Sparen Sie sich dadurch Zusatzkosten!
- Die hohe Qualität erhöht die Nutzungsdauer im Schnitt auf über 10 Jahre bei gleichzeitiger **Reduzierung Ihrer Wartungs- und Reparaturkosten**
- **Reduzieren Sie Ihre Anschaffungskosten:** Das Automatikmodul Laborota 20 Distimatic für Ihren Laborota 20 compact/safety ist eine preislich attraktive Alternative zu konventionellen 50 oder 100 Liter Verdampfern
- Nutzen Sie Ihre Arbeitszeit sinnvoll! Durch die automatisierte Anwendung können Sie sich zeitgleich wichtigeren Aufgaben zuwenden und **unbegrenzte Mengen im zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb destillieren**

➤ Laborota 20 Kontrollpanel

Vakuum _____

Dampftemperatur _____

Badtemperatur _____

Drehzahl Verdampferkolben _____

Prozesssteuerung _____

- Rampen individuell programmieren
- Programme P(const) und T(auto) anwählen
- Timer aktivieren

Emergency-Schalter _____

RS 232 Schnittstelle _____



Separater Ein/Aus Schalter
für alle Prozessparameter

Höheneinstellung
Verdampferkolben

Änderung der Prozessparameter

Ein/Aus Hauptschalter

➤ Zwei Programme zur Prozesssteuerung

P(const)

Zur Vakuumregelung für die Stofftrennung

- Mit diesem Programm wird ein gewünschter Druck konstant gehalten

Programm: P(const)

Steuerparameter: Manuell eingestellter Druck



Bei manuell eingestelltem Set-Vakuum


T(auto)

Zur automatischen Vakuumregelung für die Destillation von einem Lösungsmittel und Lösungsmittelgemischen


- Die erforderlichen Siedepunkte werden automatisch durch Druckabsenkung gefunden und gewährleisten eine hohe Genauigkeit

Programm: T(auto)

Steuerparameter: Dampftemperatur

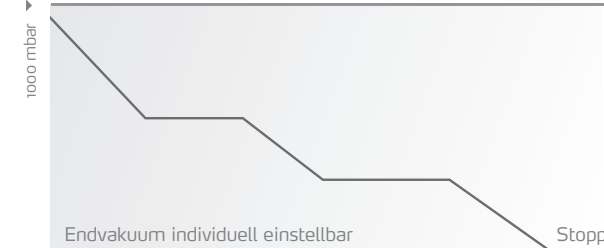

Endvakuum individuell einstellbar
Findet automatisch die erforderlichen Siedepunkte

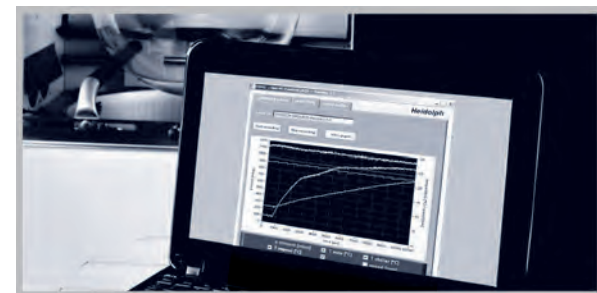

PC-Software

Die optionale PC-Software erleichtert Ihnen die Rampenprogrammierung und vollständige Dokumentation. Der Datenaustausch erfolgt über die RS 232 Schnittstelle Ihres Laborota 20

Best. Nr. 592-51800-00

Intelligent Destillieren



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.



Schutzhaube aus Metall und Sicherheitsglas verhindert jeden Kontakt mit dem Heizbad bei voller visueller Reaktionskontrolle

Ein Sensor misst den Stand Ihres Wasserbades und verhindert ein Überlaufen beim Eintauchen des Verdampferkolbens

Höchste Sicherheit:
Glassatz und Auffangkolben hinter einer robusten PMMA-Schutzscheibe

Einzigartige integrierte Vorrichtung zum sicheren Wechsel des Verdampferkolbens durch EINE Person und ohne fremde Hilfe

Ein Kassettensystem gibt den Auffangkolben sicheren Stand auf ebenen Flächen

Übertemperaturschutz schaltet bei unkontrolliertem Aufheizen das Bad ab. Bei Überdruck und Glasbruch wird das Gerät vollständig abgeschaltet

Die automatische Wasserbadnachspeisung sorgt immer für ausreichend Flüssigkeit im Heizbad

Unbegrenzte Mengen können mit dem Automatikmodul Laborota 20 Distimatic mit Rückstandsabsaugung im zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb kontinuierlich abdestilliert werden. Dies stellt eine kostengünstige Alternative zu 50 und 100 Liter Verdampfern dar

➤ Laborota 20 safety

Für gehobene Ansprüche mit Vakuumkontrolle und für höchste Sicherheit

Modell mit allen genannten Vorteilen für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung



Laborota 20 safety mit Wasserbad und Glassatz R (ohne Unterbau)
Best. Nr. 518-11100-00

➤ Laborota 20 compact

Für gehobene Anwendungen mit Vakuumkontrolle

Dieses Modell entspricht in seiner Funktionalität exakt dem Laborota 20 safety, wird jedoch für begrenzte Budgets um diese sicherheitsrelevanten Aspekte reduziert:

- Implosionsschutzhaube über dem Verdampferkolben
- PMMA-Schutzscheibe vor dem Glassatz
- PMMA-Schutzscheibe vor dem Auffangkolben



Laborota 20 compact mit Wasserbad und Glassatz R (ohne Unterbau)
Best. Nr. 518-21100-00

➤ **Automatikmodul – Laborota 20 Distimatic**

Für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb – mit Rückstandsabsaugung
Sparen Sie Zeit und destillieren Sie unbegrenzte Mengen vollautomatisch im zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb

- Das zu destillierende Gemisch wird automatisch zu- und das Kondensat kontinuierlich abgeführt
- **Die weltweit einzigartige automatisierte Rückstandsabsaugung** ermöglicht Ihnen die vollautomatische Destillation im Dauerbetrieb
- Alle Parameter können individuell eingestellt werden
- Das Automatikmodul ist mit allen Laborota 20 Modellen sowie mit anderen vergleichbaren Großrotationsverdampfern kompatibel
- Unter Berücksichtigung der Nachfüll- und Ausschleuszyklen können die Vorrats- und Produktbehälter auch während des Prozesses jederzeit getauscht werden

Automatische Zudosierung in den Verdampferkolben

- Ein Sensor misst den Füllstand im Verdampferkolben
- Der gewünschte Füllstand kann individuell eingestellt werden
- Die Zudosierung erfolgt ventilgesteuert über den Systemdruck
- Ein Sensor überwacht den Vorrat des zu destillierenden Gemisches und beendet den Prozess, sobald dieser verbraucht ist

Automatische Kondensatentnahme

- Eine Ventilmatrix steuert das kontinuierliche Abführen des Kondensats aus dem Verdampfer in einen Zwischenspeicher. Von dort wird das Kondensat mittels einer Chemiemembran-Pumpe in einen Sammelbehälter Ihrer Wahl abgesaugt

Automatische Rückstandsabsaugung

- Der Rückstand im Verdampferkolben wird prozessabhängig in einen Sammelbehälter Ihrer Wahl abgesaugt. Anschließend beginnt der Prozess durch das automatische Zuführen des zu destillierenden Gemisches in den Verdampferkolben erneut

Optionen zum Beenden des Vorgangs

- Der Prozess kann nach dem Verdampfen des zu destillierenden Gemisches automatisch oder jederzeit manuell beendet werden

IHRE VORTEILE

- Nutzen Sie dieses System als kostengünstige Alternative zu 50 oder 100 Liter Verdampfern
- Zu Ihrer Sicherheit überwachen Sensoren permanent den gesamten Prozess und schalten das Automatikmodul inkl. aller angeschlossenen Peripheriegeräte im Notfall vollständig ab
- Profitieren Sie von den frei einstellbaren Parametern, die Ihnen ein umfangreiches Anwendungsspektrum und eine exakte Justierung entsprechend Ihrer Anwendung ermöglichen
- Reduzieren Sie Ihre Energiekosten! Das Automatikmodul schaltet nach Beenden des Prozesses automatisch auch die angeschlossenen Peripheriegeräte vollständig ab


Laborota 20 Distimatic mit Rückstandsabsaugung und Adapter für Glassatz A
Best. Nr. 591-54000-00

Laborota 20 Distimatic mit Rückstandsabsaugung und Adapter für Glassatz R
Best. Nr. 591-55000-00

Laborota 20 Distimatic ohne Rückstandsabsaugung
Best. Nr. 591-52000-00




Funktionsskizze Laborota 20 Distimatic mit Rückstandsabsaugung

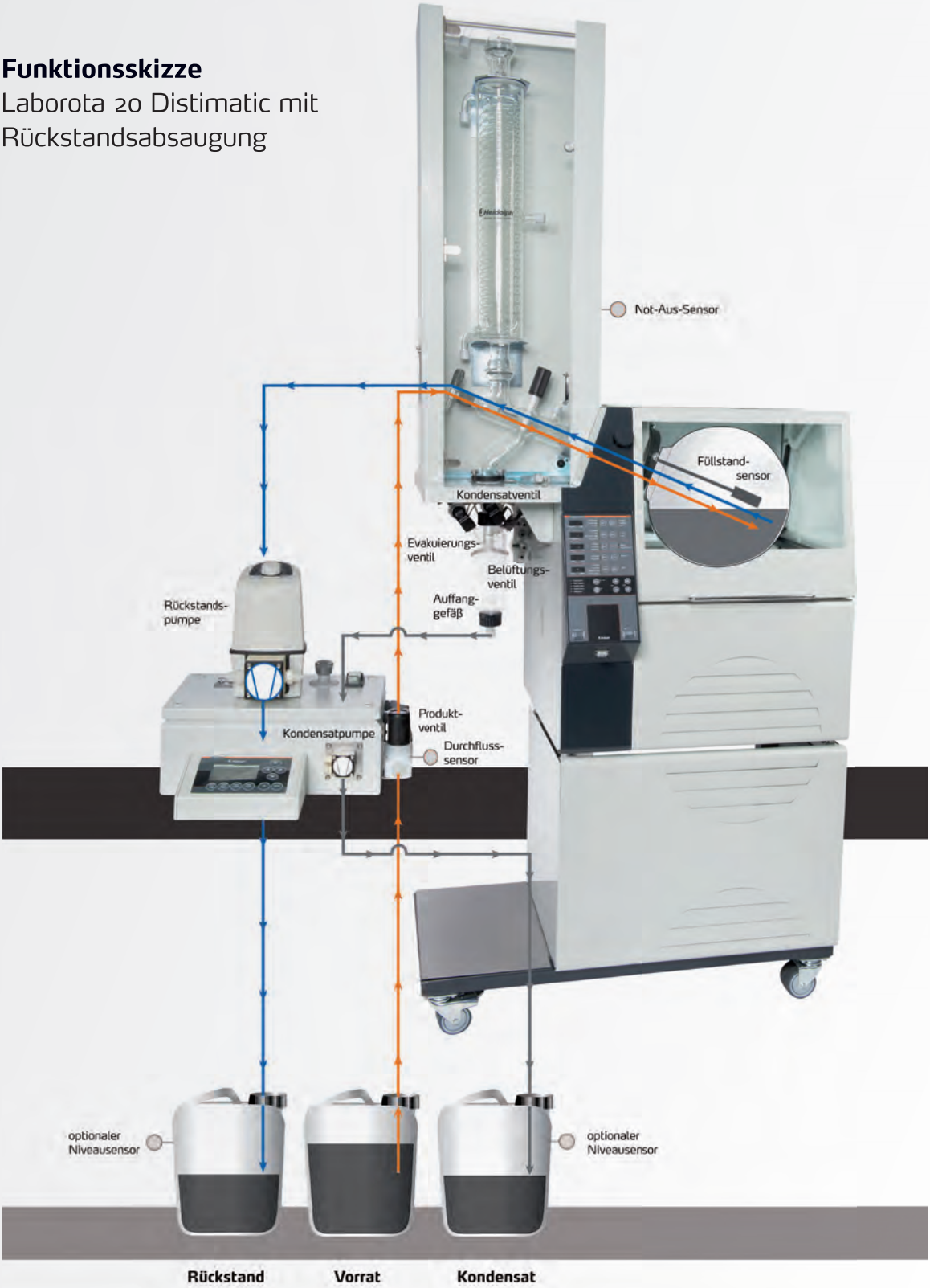

Verdampfungsraten (Dauerlauf)


Laborota 20 Distimatic	Delta T 40°C
L/h Wasser	4,7
L/h Ethanol	12,9
L/h Aceton	25,9
L/h Toluol	26,0

➤ Glassätze – Laborota 20

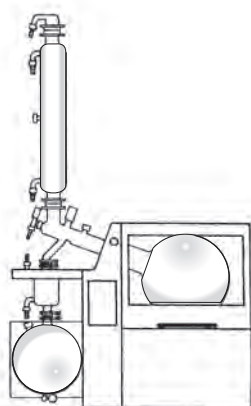


Glassatz R

- Beinhaltet einen Kühler, einen 20 Liter Verdampferkolben und einen 10 Liter Auffangkolben
- Vielseitig einsetzbarer **Standardglassatz** für Destillationen und Reaktionen mit Rückflussventil

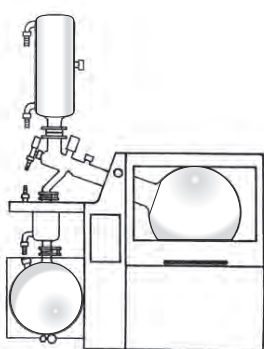


Glassatz Shorty R

- Besonders geeignet für die Anwendung unter **Abzügen oder unter beengten Verhältnissen**
- Lieferumfang wie Glassatz R, trotz 32 cm geringerer Kühlerhöhe ist die Kondensationsoberfläche identisch

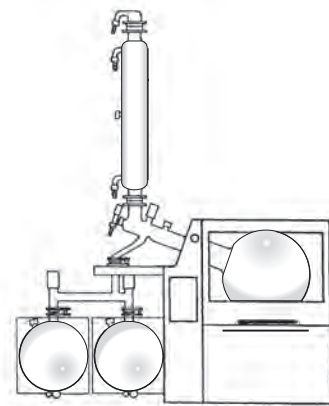


Glassatz RC

- Mit Glassatz R identisch, inklusive zusätzlichem 10 Liter Auffangkolben als Wechselvorlage

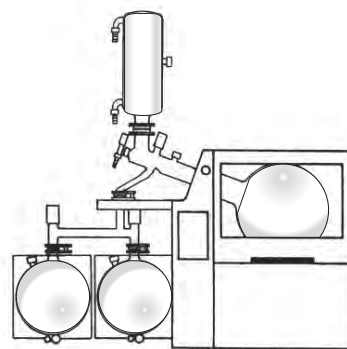


Glassatz Shorty RC

- Mit Glassatz Shorty R identisch, inklusive zusätzlichem 10 Liter Auffangkolben als Wechselvorlage

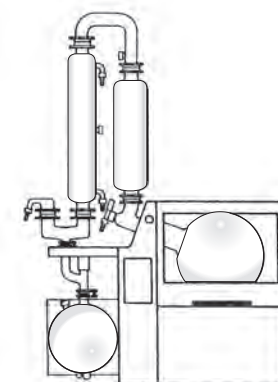


Glassatz A

- Beinhaltet einen Kühler, ein Expansionsgefäß, einen 20 Liter Verdampferkolben und einen 10 Liter Auffangkolben
- Besonders geeignet für Destillationen von **spritzenden und schäumenden Substanzen**

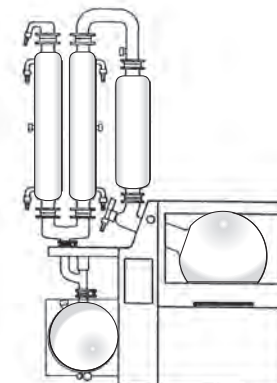


Glassatz A2

- Beinhaltet einen aufsteigenden und einen absteigenden Kühler, ein Expansionsgefäß, einen 20 Liter Verdampferkolben und einen 10 Liter Auffangkolben
- Für **leicht siedende Lösungsmittel und höchste Rückgewinnungsraten**

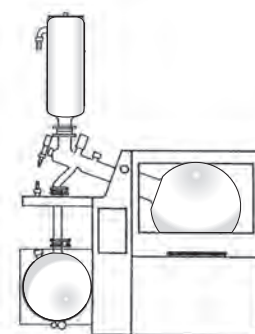


Glassatz K

- Kühlfalle für **tiefsiedende Lösungsmittel** – Kühlung durch Trockeneis
- Beinhaltet einen 20 Liter Verdampferkolben und einen 10 Liter Auffangkolben

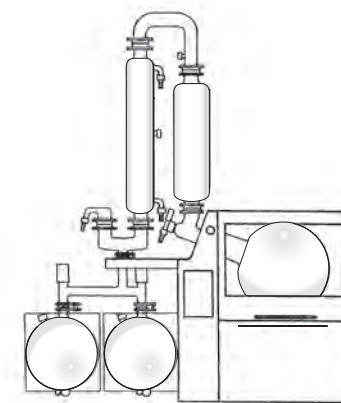


Glassatz AC

- Mit Glassatz A identisch, inklusive zusätzlichem 10 Liter Auffangkolben als Wechselvorlage

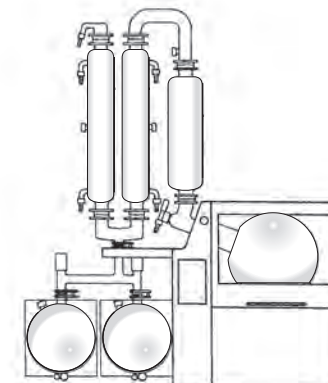

Glassatz A2C

- Mit Glassatz A2 identisch, inklusive zusätzlichem 10 Liter Auffangkolben als Wechselvorlage

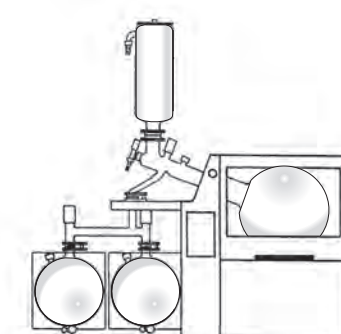

Glassatz KC

- Mit Glassatz K identisch, inklusive zusätzlichem 10 Liter Auffangkolben als Wechselvorlage

➤ **Vakuumpumpe**

Ventilgesteuerte Vakuumpumpe Rotavac 20

Mit Kondensatkühler und Ansauger

Dieses Chemie-Vakuumsystem findet ein breites Anwendungsgebiet zum Evakuieren, Eindampfen und Abpumpen von Gasen und Dämpfen. Der druckseitige Emissionskondensator ermöglicht die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösungsmitteln

- Hervorragende Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
- Sehr tiefes Endvakuum von 2 mbar
- Sehr leiser und vibrationsarmer Betrieb
- Besonders hohes Saugvermögen von 3,0 m³/h
- Abmessungen: L350/B275/H495 mm
- Gewicht: 19,9 kg



Best. Nr. 591-07210-00


➤ **Zubehör**

Verdampferkolben



Verdampferkolben 6 l
Best. Nr. 15-300-003-20
Verdampferkolben 10 l
Best. Nr. 15-300-003-16
Verdampferkolben 20 l
(Im Standardlieferumfang enthalten)
Best. Nr. 15-300-003-17

Verdampferkolben NS 14,5 inkl.
Adapter (NS 29 oder NS 24)

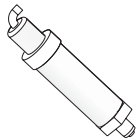

Vakuumsensor

(Im Standardlieferumfang für
Laborota 20 Modelle enthalten)
Best. Nr. 591-21000-00




Heizbadflüssigkeit 5 l

Best. Nr. 591-31000-00

Pulverkolben



Pulverkolben 10 l
Best. Nr. 15-300-003-18
Pulverkolben 20 l
Best. Nr. 15-300-003-19

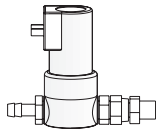

Vakuumventil


(Im Standardlieferumfang für
Laborota 20 Modelle enthalten)
Best. Nr. 591-20000-00




PC-Software

Für Modelle Laborota 20 compact,
safety und automatic
Best. Nr. 592-51800-00

Auffangkolben

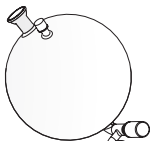

Mit Bodenablassventil 10 l
Best. Nr. 15-300-004-11

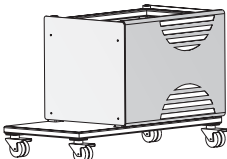

Unterbau

Für Laborota 20 Modelle
Best. Nr. 591-23000-00



Schlauchset

Beinhaltet einen 6,25 m
Vakuumschlauch und einen 10 m
Wasserschlauch
Best. Nr. 591-34000-00



Siedetemperaturfühler

Best. Nr. 14-014-003-06

➤ **Bestellnummern – Laborota 20**

Laborota 20 safety

Ohne Unterbau

Glassatz	Wasserbad	Ölbad
R	518-11100-00	518-11200-00
Shorty R	518-18100-00	518-18200-00
RC	518-12100-00	518-12200-00
Shorty RC	518-19100-00	518-19200-00
A	518-13100-00	518-13200-00
AC	518-15100-00	518-15200-00
Az	518-14100-00	518-14200-00
AzC	518-16100-00	518-16200-00
K	518-18102-00	518-18202-00
KC	518-19102-00	518-19202-00



Laborota 20 compact

Ohne Unterbau

Glassatz	Wasserbad	Ölbad
R	518-21100-00	518-21200-00
Shorty R	518-28100-00	518-28200-00
RC	518-22100-00	518-22200-00
Shorty RC	518-29100-00	518-29200-00
A	518-23100-00	518-23200-00
AC	518-25100-00	518-25200-00
Az	518-24100-00	518-24200-00
AzC	518-26100-00	518-26200-00
K	518-28102-00	518-28202-00
KC	518-29102-00	518-29202-00

Technische Daten – Großrotationsverdampfer

Modell	Laborota 20
Drehzahlbereich (U/min)	6 – 160
Drehzahlanzeige	digital
Hand- / Motorlift	Motorlift
Hubgeschwindigkeit (mm/s)	45
Hubweg Motorlift (mm)	200
Antrieb	Kondensatormotor
Heizleistung (W)	4.000
Temperaturbereich Heizbad (°C)	20 – 100 (H ₂ O) 20 – 180 (Öl)
Regelgenauigkeit Heizbad (°C)	±1
Übertemperaturschutz (°C)	110 (H ₂ O) / 210 (Öl)
Anzeige Badtemperatur	digital
Regelung Heizbadtemperatur	Mikroprozessor
Material Heizbad	V4A (1.4404)
Durchmesser Heizbad (mm)	400
Volumen Heizbad (l)	24 (H ₂ O) / 22 (Öl)
Anzeige Siedetemperatur (dazu benötigtes Zubehör)	digital Temperatursensor

* Δ T = Differenz zwischen Heizbadtemperatur und Siedetemperatur
** Nur in Verbindung mit Vakuumsystemen möglich

Standard Anschlussspannung: 400 V - andere Anschlussspannungen auf Anfrage

Modell	Laborota 20
Vakuum-Controller integriert	ja
Timer	ja
Vakuumregelmodus P _(const) **	ja
Vakuumregelmodus T _(auto) ** erfordert T _(auto) Sensor	ja
Programmierung von Rampen	ja
Anschlussleistung (W)	4.500
Gewicht (ohne Glassatz) (kg)	ca. 120
Abmessungen (o. Glassatz) (B x H x T) (mm)	1.000 x 1.620 x 700
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 20
Zulässige Umgebungsbedingungen (°C)	0 – 40 bei 80 % relativer Luftfeuchtigkeit
Verdampfungsrate (L/h) bei 40 °C * Temperaturdifferenz - Toluol - Aceton - Ethanol - Wasser	26,0 25,9 12,9 4,7
Maximale Kühlfläche (m²)	1,2



Zertifikat

Bescheinigung für den
zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb
von Großrotationsverdampfern der Laborota 20 Serie

Die Großrotationsverdampfer der Laborota 20 Serie sind mit Übertemperatur-Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 61010-1:2001 und DIN EN 61010-2-010:2003 und somit für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet.

Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung und die Arbeitsweise nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin, der Laborrichtlinie, der Unfallverhütungsvorschriften und der Gefahrstoffverordnung.

Schwabach, im Januar 2013

i. V. Jan Welzien
Leiter Technik

i. A. Stefan Richter
Leiter Qualitätssicherung

Sicher

Heizen und Mischen



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung






Schnellste Aufheizzeiten und chemische Beständigkeit von Heizplatten klingen für Sie nach einem Widerspruch?

Sicher Heizen und Mischen

Dank der einzigartigen Kera-Disk® Heizplatte bekommen Sie beides in einem! Die Heizplatte aus Aluminium sorgt für schnellste Aufheizzeiten und eine hauchdünne Keramikbeschichtung macht die Platte chemikalienbeständig und kratzfest!

Höchste Sicherheit

- Um Unfälle und Feuer kategorisch auszuschließen, verfügen alle MR-Modelle über einen **Überhitzungsschutz**, der im Falle eines ungewollten Temperaturanstiegs die Heizplatte automatisch abschaltet
- In Kombination mit Heat-On Aufsätzen verwandeln Sie Ihr Labor in eine **"Sicherheitszone"**
- Ein Schaden am Gerät ist selbst bei höchsten Temperaturen ausgeschlossen – alle Modelle verfügen über ein **feuerfestes Druckgussgehäuse**
- Um Sie vor Spritzern zu schützen, wird die Drehzahl durch einen Sanftanlauf langsam an den gewünschten Wert herangeführt
- **Vermeiden Sie Verbrennungen** an der Heizplatte Ihres bereits abgeschalteten MR Hei-End. Solange die Oberflächentemperatur mehr als 50 °C beträgt, wird ein Warnhinweis im Display angezeigt
- Aus Sicherheitsgründen wird das Gerät bei Kurzschluss, Fühlerbruch des Temperatursensors, bei einem defekten Motor und bei einer Störung des Prozessors **vollständig abgeschaltet**
- Sollte Ihre Heizplatte ausfallen, wird der Rührvorgang nicht unterbrochen. Ein Überhitzen Ihrer Probe wird dadurch verhindert
- Durch eine separate On/Off Taste für die Heizfunktion **verhindern Sie ein ungewolltes Aufheizen**. Die aktivierte Heizfunktion ist durch die Beleuchtung der Taste eindeutig erkennbar

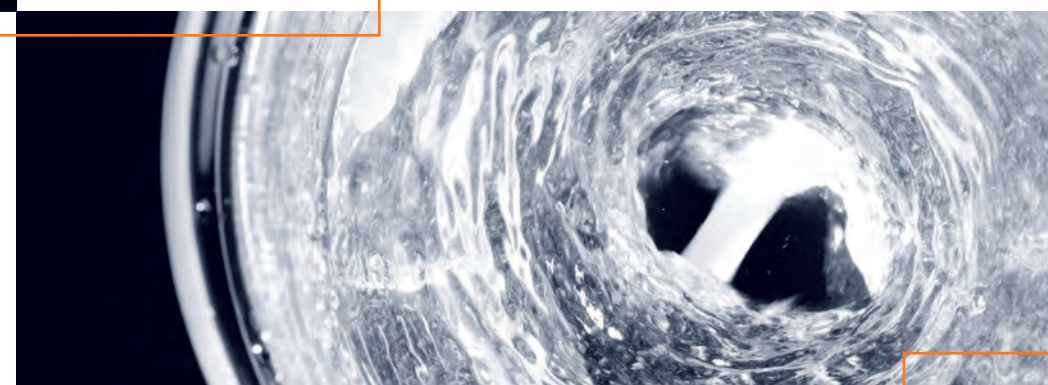



Dauerhafte **Kostenreduzierung**

- Verkürzen Sie Ihre Prozesszeiten! Die hohe Heizleistung von 800 Watt bedeutet für Sie **35 % schnellere Aufheizzeiten** im Vergleich zu herkömmlichen Magnetrührern mit 600 Watt
- Die verschleiß- und wartungsfreien Motoren **ersparen Ihnen Reparatur- und Ersatzteilkosten**
- Die Nutzungsdauer liegt im Schnitt bei über 10 Jahren und macht dadurch Ihre Anschaffung zu einer **lohnenswerten Investition**
- Die korrosionsgeschützte Elektronik **verlängert die Nutzungsdauer** Ihres Gerätes um Jahre und reduziert Ihre Ausgaben für Neuanschaffungen

Bester **Bedienkomfort**

- Lesen Sie bei Geräten mit Display alle Parameter an der großen, beleuchteten Anzeige ab
- Arbeiten Sie auch mit Trockeneis? Eine effiziente Kälteisolierung verhindert Kondensation im Gehäuse und damit den Kontakt zwischen Kondenswasser und elektronischen Bauteilen
- Mit der optionalen Softwareunterstützung für den MR Hei-End können Sie Ihre **Prozesse zuverlässig automatisieren und dokumentieren**
- Die einzigartige Kera-Disk® Beschichtung ist extrem **chemikalienbeständig und kratzfest**. Die Heizplatte ist dadurch pflegeleicht, und Verschmutzungen können leicht entfernt werden
- Ein **leistungsstarker Rührmagnet** erlaubt selbst bei höher viskosen Lösungen eine sichere Mitnahme des Rührstäbchens



➤ Kera-Disk® Heizplatte

Schnelle Aufheizzeiten und chemische Beständigkeit von Heizplatten ist durch Kera-Disk® kein Widerspruch mehr!




IHRE VORTEILE

- Heizplatten aus Aluminium garantieren Ihnen schnellste Aufheizzeiten, sind aber nicht chemisch beständig und nicht kratzfest
- Keramikheizplatten sind chemikalienbeständig und kratzfest, weisen jedoch lange Aufheizzeiten auf
- Die Kera-Disk® Heizplatte kombiniert die Vorteile beider Systeme: Die Heizplatte aus Aluminium sorgt für schnellste Aufheizzeiten und die hauchdünne Keramikbeschichtung macht die Platte chemikalienbeständig und kratzfest

➤ Versiegeltes Gehäuse

Das versiegelte Gehäuse der MR-Serie garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer bei geringer Reparaturanfälligkeit!

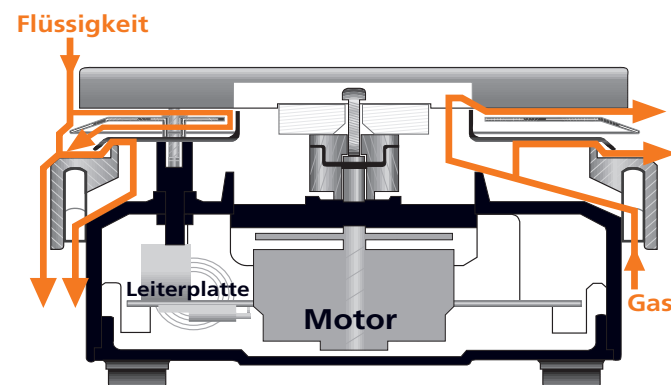

IHRE VORTEILE

- Ihr Magnetrührer wird zuverlässig vor Korrosion geschützt und die Nutzungsdauer im Schnitt auf über 10 Jahre bei gleichzeitiger Reduzierung Ihrer Wartungs- und Ersatzteilkosten erhöht
- Die elektronischen und mechanischen Komponenten werden vor aggressiven Medien und Dämpfen geschützt

Schwarz markiert ist das hermetisch abgedichtete Gehäuse, welches den Motor und die Leiterplatte schützt. Links ist der Weg einer Flüssigkeit gekennzeichnet, die von der Heizplatte nach unten läuft. Auch wenn die Flüssigkeit in die Nähe der Hitzeschilder kommt, kann sie

nicht in den Bereich von Leiterplatte und Motor gelangen, sondern wird nach außen abgeleitet. Rechts sehen Sie mögliche Gase, die ebenfalls nicht in den Bereich von Motor und Leiterplatte gelangen können. Der sichtbare Spalt dient der Temperaturisolierung. Durch den Spalt

bleibt die Temperatur im Inneren des Magnetrührers wesentlich niedriger, wodurch die Lebensdauer des Magnetrührers deutlich erhöht wird. Die Heizelemente sind komplett in Keramik eingebettet. Dadurch sind diese vor Flüssigkeiten und Dämpfen geschützt.

Sicher Heizen und Mischen



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Eine Heizleistung von **800 Watt** bedeutet **35 % schnellere Aufheizzeiten** im Vergleich zu Magnetrührern mit 600 Watt

Das **versiegelte Gehäuse** schützt die elektronischen und mechanischen Komponenten des Magnetrührers **vor aggressiven Medien und Dämpfen**

Die KeraDisk® Heizplatte garantiert **schnellste Aufheizzeiten**; eine hauchdünne Keramikbeschichtung macht die Platte **chemikalienbeständig**

Bei Ausfall der Heizplatte wird der Rührvorgang **NICHT** unterbrochen; das **verhindert ein Überhitzen der Probe**



Ein **unabhängiger zweiter Sicherheitskreis** schaltet bei ungewolltem Temperaturanstieg die Heizplatte automatisch ab

Bei Kurzschluss, Fühlerbruch des Temperatursensors und bei einer Störung des Prozessors **schaltet das Gerät vollständig ab**

Ein Schaden am Gerät ist selbst bei höchsten Temperaturen ausgeschlossen – die Modelle verfügen über ein **feuerfestes Druckgussgehäuse**

Eine separate On/Off Taste für die Heizfunktion **verhindert** wirkungsvoll ein **ungewolltes Aufheizen**. Die aktivierte Heizfunktion ist eindeutig erkennbar

➤ Magnetrührer mit Heizung

Die MR Serie ist hervorragend für schonendes bis intensives Mischen niedrig viskoser Flüssigkeiten geeignet und ist ideal zum Aufschließen von organischen und anorganischen Stoffen

- Die Geschwindigkeit lässt sich für schonendes Mischen von 30 bis 1.400 U/min bei einer Drehzahlgenauigkeit von $\pm 1\%$ individuell und stufenlos einstellen
- Zum Schutz vor Überhitzung schalten alle Modelle die Heizfunktion ab, sollte der eingestellte Wert überschritten werden
- Mit dem verstärkten Rührmagnet wird selbst ein Volumen von 20 Litern spielend leicht vermischt
- Die Heizplatte erreicht in kurzer Zeit die Maximaltemperatur von 300 °C mit einer Leistung von 800 Watt



Mit StarFish verwandeln Sie Ihren Magnetrührer in ein mehrstöckiges, multiples und zeitsparendes Reaktionssystem



Das Heat-On System ist mit Abstand die sicherste, schnellste und zeitsparendste Methode zum Heizen und Rühren in Rundkolben



➤ MR Hei-Standard

Für alle Standardanwendungen – ohne Display

Modell mit allen genannten Vorteilen für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

- Zum Schutz vor Überhitzung schaltet ein unabhängiger Sicherheitskreis die Heizung ab, falls die eingestellte Temperatur um 25 °C überschritten wird
- Die Drehknöpfe erleichtern Ihnen die Einstellung der Geschwindigkeit zwischen 100 und 1.400 U/min mit einer Drehzahlgenauigkeit von 2 % und der maximalen Temperatur von 300 °C
- Eine separate On/Off Taste für die Heizfunktion verhindert ein ungewolltes Aufheizen. Die aktivierte Heizfunktion ist durch die Beleuchtung der Taste eindeutig erkennbar
- Nutzen Sie den Anschluss für das optionale Kontaktthermometer EKT Hei-Con und erzielen Sie präzise Werte ohne Temperaturschwankungen



MR Hei-Standard
Best. Nr. 505-20000-00

➤ MR Hei-Tec

Für hohe Ansprüche und Reproduzierbarkeit

Modell mit allen genannten Vorteilen für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

- Selbst aus der Entfernung können Sie die Werte im beleuchteten Display leicht ablesen
- Eine separate On/Off Taste für die Heizfunktion verhindert ein ungewolltes Aufheizen. Die aktivierte Heizfunktion ist durch die Beleuchtung der Taste eindeutig erkennbar
- Die aktivierte Drehzahlregelung ist durch die Beleuchtung der Taste ebenfalls leicht erkennbar
- Stellen Sie die Geschwindigkeit von 100 bis 1.400 U/min mit einer Drehzahlgenauigkeit von 2 % und eine maximale Temperatur von 300 °C am Display ein
- Zum Schutz vor Überhitzung schaltet ein unabhängiger Sicherheitskreis die Heizung ab, falls die eingestellte Temperatur um 25 °C überschritten wird
- Stellen Sie die gewünschte Heizplattentemperatur mit dem neuen Dreh-Drück-Knopf einfach auf das Grad genau ein
- Nutzen Sie den Anschluss für den optionalen Temperaturfühler Pt 1000 und erzielen Sie präzise Werte ohne Temperaturschwankungen



MR Hei-Tec
Best. Nr. 505-30000-00

➤ MR Hei-End

Für höchste Sicherheitsanforderungen

Modell mit allen genannten Vorteilen für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

- Ein unabhängiger Sicherheitskreis schaltet die Heizung ab, falls die eingestellte Heizplattentemperatur einen von Ihnen definierten Sicherheitswert überschreitet
- Eine zusätzliche Sicherheitsabfrage schließt ein ungewolltes Verstellen der Temperatur aus
- Selbst aus der Entfernung können Sie die Werte im beleuchteten Display leicht ablesen
- Stellen Sie die Geschwindigkeit von 30 bis 1.400 U/min mit einer Drehzahlgenauigkeit von 1% und einer maximalen Temperatur von 300 °C am Display ein
- Vermeiden Sie Verbrennungen an der Heizplatte Ihres bereits abgeschalteten MR Hei-End. Solange die Oberflächentemperatur mehr als 50 °C beträgt, wird ein Warnhinweis im Display angezeigt
- Zum Schutz Ihrer Probe schaltet die externe Fühlerüberwachung die Heizung automatisch ab, falls der Fühler nicht im Medium eingetaucht ist
- Eine separate On/Off Taste für die Heizfunktion verhindert ein ungewolltes Aufheizen. Die aktivierte Heizfunktion ist durch die Beleuchtung der Taste eindeutig erkennbar
- Nutzen Sie den Anschluss für den optionalen Temperaturfühler Pt 1000 und erzielen Sie präzise Werte ohne Temperaturschwankungen



MR Hei-End
Best. Nr. 505-50000-00

Software Hei-PC-Control

- Nutzen Sie die Vorteile der optionalen Software zum Ansteuern und Dokumentieren Ihres gesamten Prozesses


Die Verbindung zum Magnetrührer erfolgt über eine RS 232 Schnittstelle



Hei-PC-Control Software für MR Hei-End
Best. Nr. 592-50500-00

Aufheizkurven

- Selbst bei schnellsten Aufheizzeiten garantiert der eingebaute PID Regler präzise Kontrolle ohne Überschwingen der Temperatur

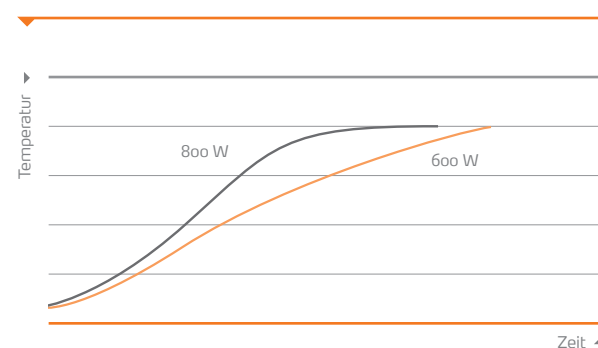

➤ MR Hei-End und MR Hei-Tec mit Temperaturfühler Pt 1000



MR Hei-Tec mit Pt 1000
Best. Nr. 505-30081-00



MR Hei-End mit Pt 1000
Best. Nr. 505-50081-00

➤ **Zubehör**



Badaufsatz 1 L
PTFE beschichtet
Best. Nr. 504-93100-00



Badaufsatz 2 L
PTFE beschichtet
Best. Nr. 504-92100-00



Badaufsatz 4 L
PTFE beschichtet
Best. Nr. 504-91100-00



Badaufsatz 1 L für Öl
Max. Temperatur: 250 °C
Best. Nr. 504-93000-00



Badaufsatz 2 L für Öl
Max. Temperatur: 250 °C
Best. Nr. 504-92000-00



Badaufsatz 4 L für Öl
Max. Temperatur: 250 °C
Best. Nr. 504-91000-00



Kalottenaufsatz
Für 1 L Rundkolben
Best. Nr. 504-94000-00



Halterung für Temperaturfühler
Für EKT Hei-Con und Pt 1000
Best. Nr. 509-67000-00



Heizbadflüssigkeit 5 L
Bis 240 °C, mischbar mit Wasser in jedem Verhältnis
Best. Nr. 515-31000-00



Temperaturfühler Pt 1000 - glasummantelt
Für MR Hei-End und MR Hei-Tec
Best. Nr. 509-67920-00



Halterung MR
Zur sicheren und platzsparenden Befestigung an Gitterwänden. Eine Klemme ist im Lieferumfang enthalten
Best. Nr. 509-96000-00

Temperaturfühler Pt 1000 - V4A
Für MR Hei-End und MR Hei-Tec
Best. Nr. 509-67910-00



Haltestab
Für Temperaturfühler
Länge: 425 mm, Ø 13 mm
Material: V2A
Best. Nr. 509-81000-00



Silikonabdeckung
Schützt Ihren Magnetrührer vor Spritz- und Tropfwasser – für MR Hei-Mix D, MR Hei-Mix L, MR Hei-Tec und MR Hei-End
Best. Nr. 23-07-06-05-59

Haltestab für 4 L Badaufsatz Heat-On
Best. Nr. 509-97000-00

Für MR Hei-Standard
Best. Nr. 23-07-06-05-63

Magnetrührstäbchen	Best. Nr.
Magnetrührstäbchen - zylindrisch je 1 Stück 25, 40, 50 mm	509-56000-00
Magnetrührstäbchen - kreuzförmig 10 mm 40 Stück (für Kolben von 5 bis 10 ml)	509-58400-00
Magnetrührstäbchen - kreuzförmig 16,5 mm 20 Stück (für Kolben von 25 bis 50 ml)	509-58500-00
Magnetrührstäbchen - elliptisch 25 mm 10 Stück (für Kolben von 100 bis 400 ml)	509-58600-00
Magnetrührstäbchen Evaluierungs-Set 10 Stück (kreuzförmig, oval, elliptisch)	509-58300-00
Magnetrührstäbchen - oval 15 x 6 mm 3 Stück (für 10 ml Kolben)	509-53000-00
Magnetrührstäbchen - oval 25 x 10 mm 3 Stück (für Kolben von 25 bis 50 ml)	509-54000-00
Magnetrührstäbchen - oval 30 x 10 mm 3 Stück (für Kolben von 100 bis 250 ml)	509-55000-00
Magnetrührstäbchen - oval 40 mm 5 Stück (für Kolben von 500 bis 1000 ml)	509-58100-00
Magnetrührstäbchen - oval 50 mm 5 Stück (für 2000 ml Kolben)	509-58200-00

➤ **Kontaktthermometer EKT Hei-Con**

Einfachste Bedienung zur Regelung der Mediumtemperatur

- Als Zubehör zu den MR Hei-Standard empfehlen wir Ihnen den elektronischen Temperaturregler EKT Hei-Con
 - Erzielen Sie präzise Werte ohne Temperaturschwankungen durch das eingebaute Fuzzy-Logic-System
 - Bei höchster Wärme- und Dampfentwicklung können Sie das EKT Hei-Con problemlos einsetzen
 - Selbst aus der Entfernung können Sie die Soll- und Ist-Temperatur im beleuchteten Display leicht ablesen
 - Der MAX-Knopf ermöglicht Ihnen den Blick auf die eingestellte Höchsttemperatur
 - Bei Überschreitung der Höchsttemperatur wird das Gerät durch einen Übertemperaturschutz abgeschaltet
 - Eine Tendenzanzeige für steigende Proben temperatur im EKT Hei-Con Display zeigt Ihnen die Aufheizphasen an
 - Die Fühlerkurzschluss- und Fühlerbruchsicherung garantieren Ihnen eine sofortige Fehlerinformation
 - Zum Schutz Ihrer Probe schaltet die externe Fühlerüberwachung die Heizung automatisch ab, falls der Fühler nicht im Medium eingetaucht ist bzw. bei unabsichtlicher Entnahme des Fühlers
- Zubehör**
- Der Messfühler ist aus nicht rostendem Stahl (V2A) oder alternativ mit einer Glasummantelung für noch höhere Chemikalienbeständigkeit lieferbar
 - Bitte bestellen Sie den Haltestab und die Halterung für den Temperaturfühler separat




EKT Hei-Con
Messfühler aus V2A
Best. Nr. 509-88000-00

EKT Hei-Con G
Messfühler glasummantelt
Best. Nr. 509-88100-00

Wählen Sie zwischen 2 Regelmodi:

- **Der zeitsparende Fast-Modus** – garantiert schnelle Aufheizzeiten
- **Der präzise Fine-Modus** – ideal für überschwingungsfreies Aufheizen

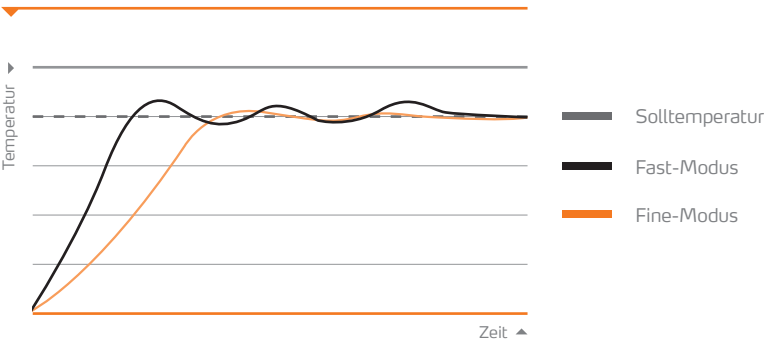

Kontaktthermometer EKT Hei-Con		
Temperaturmessbereich	(°C)	-50 bis +300
Auflösung	(°C)	1
Messgenauigkeit	(°C)	±1
Messintervall	(sec)	1,5
Regelgenauigkeit	(°C)	±0,5
Messfühler EKT Hei-Con		Pt 1000, V2A
Messfühler EKT Hei-Con G		Pt 1000, Glas
Messfühlerlänge	(mm)	210
Messfühlerkabel	(mm)	700
Mindesteintauchtiefe	(mm)	20
Zulässige Umgebungstemperatur	(°C)	-5 bis +60
Gehäusematerial		Polyamid
Gewicht	(kg)	0,3
Abmessungen B x H x T	(mm)	54 x 126 x 22
Schutzart	(DIN EN 60529)	IP 40
Spannungsversorgung	(V)	8 – 15

➤ Heat-On Aufsätze

Heat-On Aufsätze ersetzen Ölbäder und tragen somit erheblich zur Arbeitssicherheit und zum Brandschutz in Ihrem Labor bei. Zusätzlich minimieren Sie Ihren Reinigungsaufwand, der durch tropfendes Öl beim Herausnehmen von Kolben aus Ölbädern entsteht!



» Damit Sie die besten Ergebnisse erzielen können, empfehlen wir Ihnen, Kolben nach DIN EN ISO 4797 und DIN EN ISO 24450 für Ihre Heat-On Auf- und Einsätze zu verwenden

- Heat-On Aufsätze bieten Ihnen mit Abstand die sicherste, schnellste und effizienteste Methode zum Heizen und Rühren von Rundkolben von 10 ml bis 5 Liter
- Die Heat-On Aufsätze umschließen passgenau den Kolben, garantieren maximalen Oberflächenkontakt und schnellste Wärmeübertragung. Dadurch wird Öl als Wärmeleiter überflüssig und Ihr Labor sicherer

Kolbengröße	Füllmenge [Wasser]	Heizplatten-temperatur	Zeit bis Siedepunkt erreicht
10 ml	6 ml	300 °C	6,8 min.
25 ml	15 ml	300 °C	8,0 min.
50 ml	30 ml	300 °C	8,5 min.
100 ml	60 ml	300 °C	8,8 min.
150 ml	100 ml	300 °C	10,0 min.
250 ml	150 ml	300 °C	10,8 min.
500 ml	300 ml	300 °C	16,4 min.
1.000 ml	600 ml	300 °C	21,1 min.
2.000 ml	1.200 ml	300 °C	35,1 min.
5.000 ml	3.000 ml	300 °C	75,5 min.

Höchste Sicherheit

- Verhindern Sie Unfälle, Brände und Kontaminationen durch die komplette Eliminierung aller Ölbäder in Ihrem Labor
- Das einzigartige Design verhindert Glasbruch und schützt Sie nachhaltig vor Schnittverletzungen und austretenden Flüssigkeiten
- Die hohe Temperaturnauigkeit gibt Ihnen höchste Sicherheit bei Anwendungen bis 260 °C

Bester Bedienkomfort

- Die innovative PTFE-Beschichtung des Aluminiumaufsatzes garantiert Ihnen höchste Chemikalienbeständigkeit und jahrelange Nutzung
- Sie können die Temperatur präzise im Medium oder direkt am Reaktionsaufsatz messen

Dauerhafte Kostenreduzierung

- Erhöhen Sie Ihren Probendurchsatz durch erheblich geringere Prozesszeiten
- Sparen Sie Energiekosten, denn 1.000 ml Wasser lassen sich um 66 % schneller erhitzen als mit konventionellen Ölbädern
- 150 ml Wasser werden in weniger als 11 Minuten zum Sieden gebracht

➤ Heat-On Aufsätze

Heat-On Aufsätze

Jeder Heat-On Aufsatz kann direkt auf der Heizplatte platziert werden

- Heat-On 250 ml Aufsatz 505-80067-00
- Heat-On 250 ml Aufsatz mit seitlichen Aussparungen 505-80067-01
- Heat-On 500 ml Aufsatz 505-80069-00
- Heat-On 1 Liter Aufsatz 505-80071-00
- Heat-On 2 Liter Aufsatz 505-80073-00
- Heat-On 3 Liter Aufsatz 505-80075-00
- Heat-On 5 Liter Aufsatz 505-80076-00



Heat-On 250 ml Aufsatz mit seitlichen Aussparungen



Heat-On 2 Liter Aufsatz

Heat-On Zubehör

- Haltestab für Badaufsatz 4 L Heat-On 509-97000-00
- Kreuzklemme 505-81075-00
- Kreuzklemme Heat-On 570-31100-00
- Befestigungs-Set für Kolben (Haltestab für Badaufsatz 4 L Heat-On / Kreuzklemme, Kreuzmuffe) 505-81400-00
- Adapterplatte für Heizplatten ø 135 mm 505-81000-01

PTFE Sicherheitsabdeckungen

- Für Heat-On Multi-Well Aufsatz 505-80080-00
- Für Heat-On 200-300 ml Aufsatz 505-80081-00
- Für Heat-On 500 ml Aufsatz 505-80082-00
- Für Heat-On 1 Liter Aufsatz 505-80083-00



PTFE Sicherheitsabdeckungen




PTFE Sicherheitsabdeckung 500 ml

Multi-Well Halterung und Einsätze

Die einzigartige Multi-Well Halterung wurde entwickelt, um entweder ein oder zwei Einsätze für Rundkolben gleichzeitig zu nutzen. * Diese Einsätze sind für 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml oder 150 ml Kolbengrößen erhältlich. Optionales Zubehör: Heat-On Sicherheitsgriffe

* Aus Platzgründen kann nur ein 150 ml Einsatz verwendet werden

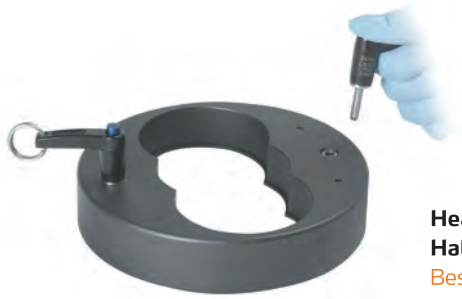

Heat-On Multi-Well Halterung
Best. Nr. 505-80060-00

Einsätze für Multi-Well Halterung

- Heat-On 10 ml Einsatz 505-80061-00
- Heat-On 25 ml Einsatz 505-80062-00
- Heat-On 50 ml Einsatz 505-80063-00
- Heat-On 100 ml Einsatz 505-80064-00
- Heat-On 150 ml Einsatz 505-80065-00



Heat-On 10 ml Einsatz



Heat-On 50 ml Einsatz

Heat-On Multi-Well Pakete

Paket Heat-On Multi-Well Basic
Beinhaltet 1x Multi-Well Halterung und 3x Einsätze (für 25, 50 und 100 ml Kolben) 505-81300-00

Paket Heat-On Multi-Well
Beinhaltet 1x Multi-Well Halterung und 6x Einsätze (für 2 x 25, 2 x 50 und 2 x 100 ml Kolben) 505-81200-00

➤ StarFish Reaktionssysteme

Wollen Sie eine Vielzahl von Reaktionen platz- und zeitsparend bearbeiten?

Mit unseren Aufsätzen verwandeln Sie Ihren Magnetrührer in ein multiples, effizienzsteigerndes Reaktionssystem für bis zu 45 Proben gleichzeitig!


- Machen Sie etwas aus Ihrem Magnetrührer: Ein **vielseitig einsetzbares Multitalent**
- Von einfachen Heiz- und Rühraufgaben über Synthesen bis hin zu Konzentrationen und Extraktionen mit Vakuum und Inertgas ist alles möglich
- Ein Zukauf neuer Glaskomponenten ist für dieses System nicht erforderlich. Arbeiten Sie mit Ihren bereits vorhandenen Rundkolben und kombinieren Sie diese mit den passenden StarFish Aufsätzen
- StarFish Reaktionssysteme eignen sich hervorragend für Soxhlet Applikationen

Basisplatte

Die Basisplatte passt exakt auf die Heizplatte des Magnetrührers und garantiert dadurch sehr guten Kontakt zur beheizten Oberfläche

StarFish Basisplatte (145 mm)
505-81000-00

StarFish Sicherheitsgriffe (2 Stück)
505-81001-00

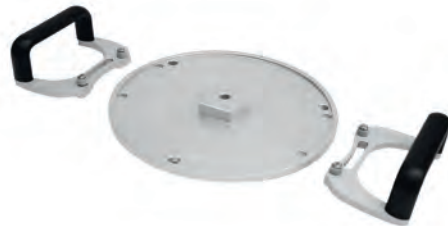

MonoBlocks

MonoBlocks bestehen aus einem Block mit mehreren gleich großen Einsätzen und sind daher ideal für Anwendungen mit identischen Gefäßen

MonoBlock für 5 x 250 ml Kolben 505-80001-00

Einsätze für MonoBlock 5 x 250 ml

Einsatz für 150 ml Kolben 505-80040-00
Einsatz für 100 ml Kolben 505-80041-00
Einsatz für 50 ml Kolben 505-80042-00
Einsatz für 25 ml Kolben 505-80043-00
Einsatz für 10 ml Kolben 505-80044-00
Einsatz für 5 ml Kolben 505-80045-00

MonoBlock für 16 x 25 mm Reagenzgefäße 505-80002-00
MonoBlock für 16 x 24 mm Reagenzgefäße 505-80003-00
MonoBlock für 40 x 16 mm Reagenzgefäße 505-80004-00
MonoBlock für 40 x 12 mm Reagenzgefäße 505-80005-00

MonoBlock für 16 x 28 mm zylindrische Reagenzgefäße 505-80006-00
MonoBlock für 20 x 21 mm zylindrische Reagenzgefäße 505-80007-00
MonoBlock für 40 x 17 mm zylindrische Reagenzgefäße 505-80008-00
MonoBlock für 40 x 15 mm zylindrische Reagenzgefäße 505-80009-00
MonoBlock für 40 x 12 mm zylindrische Reagenzgefäße 505-80010-00

Unzählige Variationen

Kombinationsmöglichkeiten von bis zu 5 einzelnen PolyBlocks in verschiedenen Größen oder einem MonoBlock mit einheitlichen Einsatzgrößen. Zusätzlich besteht eine große Auswahl an Einsätzen für MonoBlock 505-80001-00 von 5 ml bis 150 ml Kolben

PolyBlocks

PolyBlocks bestehen aus schmalen Segmenten (5 je Basisplatte), die je nach Gefäßgröße passend kombiniert werden können; daher ideal, wenn verschiedene Gefäßarten und -größen verwendet werden

PolyBlock für 1 x 250 ml Kolben 505-80020-00

PolyBlock für 3 x 25 mm Reagenzgefäße 505-80021-00
PolyBlock für 3 x 24 mm Reagenzgefäße 505-80022-00
PolyBlock für 9 x 16 mm Reagenzgefäße 505-80023-00
PolyBlock für 9 x 12 mm Reagenzgefäße 505-80024-00

PolyBlock für 3 x 28 mm zylindrische Reagenzgefäße 505-80025-00
PolyBlock für 3 x 21 mm zylindrische Reagenzgefäße 505-80026-00
PolyBlock für 7 x 17 mm zylindrische Reagenzgefäße 505-80027-00
PolyBlock für 9 x 15 mm zylindrische Reagenzgefäße 505-80028-00
PolyBlock für 9 x 12 mm zylindrische Reagenzgefäße 505-80029-00



5er Klemme
(Klettband)
Best. Nr. 505-81010-00

5er Klemme
(Silikonband und Griff)
Best. Nr. 505-81020-00

Universal 5er Klemme

Die StarFish Klemme ermöglicht das Befestigen von Glassätzen in verschiedenen Größen und ist wahlweise mit Silikon- oder Klettband erhältlich

Jede Klemme besteht aus 5 Teleskoparmen, die nach Bedarf erweitert und dadurch sicher um den Gefäßhals befestigt werden können. Anwendungsbeispiel für die Verwendung beider Klemmen: Das Silikonband hält die Gefäße sicher fest, im Bedarfsfall kann man die Proben mit einem Griff anheben, während das Klettband ein Durchgleiten des Kühlers ermöglicht

Wasser Multiverteiler

Verteilt Wasser von einer Ausgangsquelle gleichmäßig an bis zu 5 Kühler

Im Aufbau werden immer 2 Wasser Multiverteiler verwendet. Einer, um das Wasser zu verteilen und ein zweiter, um das Wasser wieder aufzufangen, entweder, um es weiter zu verwenden oder ganz abzuführen. Jeder der 5 Anschlüsse verfügt über ein lecksicheres Abschlussventil



Wasser Multiverteiler
(mit Anschlüssen)
Best. Nr. 505-81030-00



Gas/Vakuum Multiverteiler
(mit Anschlüssen)
Best. Nr. 505-81040-00

Gas/Vakuum Multiverteiler

Verteilt Inertgas bzw. Vakuum von einer Ausgangsquelle gleichmäßig an 5 verschiedene Stationen oder Gefäße. Eine Gas- bzw. Vakuumregulierung ist nicht möglich. Jeder der 5 Anschlüsse verfügt über ein lecksicheres Abschlussventil

Ersatz - Klettbelag selbstklebend 200 mm (10 Stück) 505-81070-00
Ersatz - Klebeband-Streifen 200 mm (5 Stück) 505-81080-00
Ersatz - Silikon-Streifen 200 mm (5 Stück) 505-81090-00
650 mm Haltestab 505-81050-00
650 mm Haltestab (teilbar) 505-81060-00

➤ MR-Modelle ohne Heizfunktion

Für Rühraufgaben in der Biologie und Biochemie

Hei-Mix D / Hei-Mix L

- Die Wärme des Motors wird nicht auf die Stellplatte übertragen. So werden thermolabile Substanzen geschont
- Um Ihre Probe schonend zu behandeln, wird die Drehzahl durch einen Sanftanlauf langsam an den gewünschten Wert herangeführt
- Ideal für Anwendungen bis 20 Liter, da der Durchmesser der Platte 145 mm beträgt und der Drehzahlbereich von 100 bis 1.400 U/min reicht
- Ein rundum abgedichtetes Gehäuse verhindert Korrosion und erhöht die Lebensdauer Ihres Gerätes
- Arbeiten Sie auch mit Trockeneis? Eine effiziente Kälteisolierung verhindert Kondensation im Gehäuse und ein Abtropfen von Kondenswasser auf elektronische Bauteile
- Diese Modelle verfügen über eine Stellplatte aus Edelstahl



MR Hei-Mix D


Best. Nr. 505-01000-00

MR Hei-Mix L (ohne Display)

Best. Nr. 505-00000-00

Hei-Mix S

- Nutzen Sie den großen Drehzahlbereich bis 2.200 U/min
- Sparen Sie Platz bei Anwendungen bis 5 Liter. Denn der Flächenbedarf des Hei-Mix S beträgt nur B126/H80/T140 mm, und die Stellplatte hat einen Durchmesser von 104 mm
- Durch die weiße Stellfläche eignet sich dieses Gerät für Titrationen
- Der Hei-Mix S verfügt über eine Stellplatte aus PVDF und über ein Gehäuse aus Polyamid

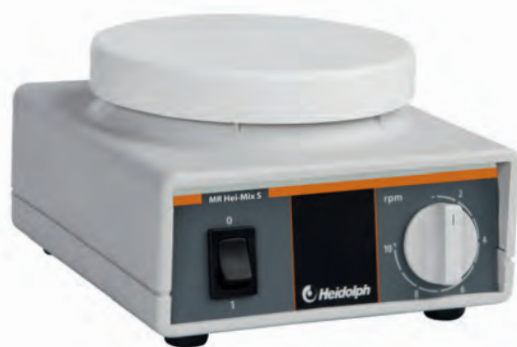

MR Hei-Mix S

Best. Nr. 503-02000-00

➤ MR Plug & Play Pakete



MR Plug & Play Hei-Standard

Das Paket beinhaltet:

- Magnetrührer MR Hei-Standard
- EKT Hei-Con mit Temperaturfühler aus V2A
- Haltestab für EKT Hei-Con
- Klemme für Temperaturfühler

Best. Nr. 505-20090-00



MR Plug & Play Multi-Well Hei-Tec

Das Paket beinhaltet:

- Magnetrührer MR Hei-Tec
- Temperaturfühler Pt 1000
- Haltestab für Pt 1000
- Klemme für Temperaturfühler
- Multi-Well Halterung mit den folgenden Einsätzen: 2 x 25 ml, 2 x 50 ml, 2 x 100 ml
- 2 Kreuzklemmen, 2 Kreuzmuffen

Best. Nr. 505-81600-00

MR Plug & Play Multi-Well Hei-Standard

Das Paket beinhaltet:

- Magnetrührer MR Hei-Standard
- EKT Hei-Con mit Temperaturfühler aus V2A
- Haltestab für EKT Hei-Con
- Klemme für Temperaturfühler
- Multi-Well Halterung mit den folgenden Einsätzen: 2 x 25 ml, 2 x 50 ml, 2 x 100 ml
- 2 Kreuzklemmen, 2 Kreuzmuffen

Best. Nr. 505-81500-00



MR Plug & Play Workstation

Das Paket beinhaltet:

- Magnetrührer MR Hei-End
- Temperaturfühler Pt 1000
- Basisplatte
- MonoBlock für 5 x 250 ml Kolben
- 2 Einsätze für 100 ml Kolben
- 2 Einsätze für 50 ml Kolben
- 1 Einsatz für 25 ml Kolben
- 5er Klemme (Klettband)
- 5er Klemme (Silikonband & Griff)
- 2 Wasser Multiverteiler
- 1 Gas/Vakuum Multiverteiler
- 650 mm Haltestab (teilbar)

Best. Nr. 505-81100-00

Technische Daten – Magnetrührer

Modell	MR Hei-Mix S	MR Hei-Mix L	MR Hei-Mix D	MR Hei-Standard	MR Hei-Tec	MR Hei-End
Bestellnummer (230 V)	503-02000-00	505-00000-00	505-01000-00	505-20000-00	505-30000-00	505-50000-00
Maximale Drehzahl (U/min)	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Drehzahlgenauigkeit (%)	±5	±2	±2	±2	±2	±1
Display	–	–	digital	–	digital	digital
Analoge/digitale Schnittstelle	–	–	–	–	–	ja
Heizleistung (W)	–	–	–	800 *	800 *	800 *
Temperaturbereich Heizplatte (°C)	–	–	–	20 – 300	20 – 300	20 – 300
Temperaturbereich Medium, max. (°C)	–	–	–	250	250	250
Einstellgenauigkeit Temperatur (°C)	–	–	–	±5	±1	±1
Messfühleranschluss	–	–	–	EKT Hei-Con	Pt 1000	Pt 1000
Regelgenauigkeit mit Messfühler im Medium (°C)	–	–	–	±1	±1	±0,2
Fühlerbruchsicherung für Messfühler	–	–	–	mit EKT Hei-Con	mit Pt 1000	mit Pt 1000
Heizungsregelung	–	–	–	Mikro-Controller	Mikro-Controller	Mikro-Controller
Regelgenauigkeit Heizplatte (°C)	–	–	–	±5	±5	±5
Sicherheitskreis Heizplatte (°C)	–	–	–	25 °C über Heizplatten-temperatur	25 °C über Heizplatten-temperatur	10 – 25 °C über Solltemp. einstellbar
Rührmenge, maximal (H ₂ O) (l)	5	20	20	20	20	20
Belastung, maximal (kg)	6	25	25	25	25	25
Leistungsaufnahme (W)	7	20	20	820	820	825
Zulässige Umgebungstemperatur (°C)	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 40
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit (%)	80	80	80	80	80	80
Abmessung Stellfläche (mm)	ø 104	ø 145	ø 145	ø 145	ø 145	ø 145
Stellflächenmaterial	PVDF	V2A	V2A	Kera-Disk® Silumin keramisiert	Kera-Disk® Silumin keramisiert	Kera-Disk® Silumin keramisiert
Gewicht (kg)	1,2	2,6	2,6	2,9	2,6	2,6
Abmessungen (B x H x T) (mm)	126 x 80 x 140	173 x 94 x 277	173 x 94 x 277	173 x 94 x 277	173 x 94 x 277	173 x 94 x 277
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 21	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32

Standard Anschlussspannung: 230 V - andere Anschlussspannungen auf Anfrage



Zertifikat

Bescheinigung für den
zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb
von Magnetrührern mit Heizung der MR Serie

Die Magnetrührer mit Heizung der MR Serie sind Sicherheitsmagnetrührer mit Übertemperatur-Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 61010-1:2001 und DIN EN 61010-2-010:2003 und somit für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet.

Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung und die Arbeitsweise nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin, der Laborrichtlinie, der Unfallverhütungsvorschriften und der Gefahrstoffverordnung.

Schwabach, im Januar 2013

Jan Welzien

i. V. Jan Welzien
Leiter Technik

S. Richter

i. A. Stefan Richter
Leiter Qualitätssicherung

Kraftvoll Rühren



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung





Brauchen Sie einen Alleskönner, der selbst bei hochviskosen Applikationen hervorragende Mischergebnisse erzielt?

Kraftvoll Rühren

Die kraftvollen Laborrührer der RZR Serie bewältigen selbst schwierigste Anwendungen bei höchster Sicherheit!

Höchste Sicherheit

- Der **Sanftanlauf** aller elektronischen Laborrührer **schützt Sie zuverlässig vor Spritzern**, da die Geschwindigkeit langsam auf die eingestellte Drehzahl hochgefahren wird
- Ihr optionaler **Rührwellenschutz verhindert Unfälle** mit dem schnell rotierenden Rührflügel
- Höchste Sicherheit, auch in leicht entzündlicher Atmosphäre, garantieren Ihnen die **funkenfreien Motoren**
- Um eine Überhitzung von vornherein auszuschließen, wird der Motor bei dauerhafter Überlastung abgeschaltet – wichtig für den **unbeaufsichtigten Dauerbetrieb**
- Starten und Beenden Sie Ihre Anwendung selbst bei geschlossener Abzugshaube mit der **optionalen Fernbedienung** für elektronische Laborrührer






Bester **Bedienkomfort**

- Führen Sie die Rührwelle im Handumdrehen durch das Gehäuse und positionieren Sie den Rührflügel **in jeder beliebigen Höhe**
- Erzielen Sie durch das einzigartig hohe Drehmoment selbst mit hochviskosen Medien ein **schnelles und hervorragendes Mischergebnis**
- Eine optionale Softwareunterstützung für die elektronischen Laborrührer **automatisiert und dokumentiert** Ihre Prozesse zuverlässig
- Das **geringe Eigengewicht** der Laborrührer erleichtert Ihnen die Versuchsvorbereitung
- Nur ein Handgriff am optionalen Teleskopstativ ermöglicht Ihnen die Neupositionierung des Laborrührers
- Das **übersichtliche Bedienpanel** ist selbsterklärend und erleichtert Ihnen die Anwendung im Alltag
- Nutzen Sie den Platz in Ihrem Labor effizient: Durch die schlanke Bauweise passen die Laborrührer in jeden Aufbau

Dauerhafte **Kostenreduzierung**

- Das abgedichtete Gehäuse schützt Ihren Laborrührer zuverlässig vor Korrosion und erhöht die Nutzungsdauer im Schnitt auf über 10 Jahre bei gleichzeitiger **Reduzierung Ihrer Wartungs- und Reparaturkosten**
- Das hohe Drehmoment garantiert Ihnen beste Durchmischungsergebnisse und verkürzt dadurch Ihre Prozesszeiten erheblich
- **Die wartungsfreien Motoren** vermeiden Ausfallzeiten und Reparaturkosten
- Durch spezielle Werkzeuge, die selbst Gele in großen Mengen vermischen, **sparen Sie wertvolle Arbeitskosten** und verbessern Ihre Ergebnisse

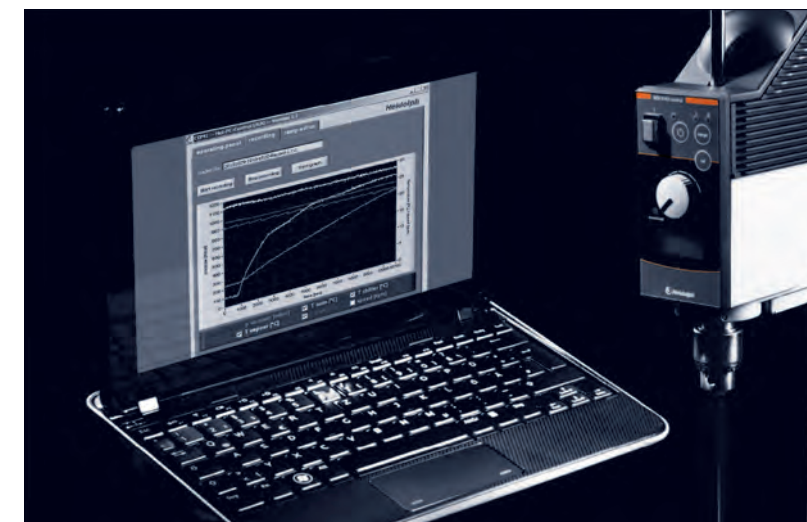

➤ Kraftvoll Rühren

Brauchen Sie einen Alleskönner, der selbst bei anspruchsvollsten Applikationen hervorragende Mischergebnisse erzielt?

Die kraftvollen Laborrührer der RZR Serie bewältigen selbst schwierigste Anwendungen bei höchster Sicherheit und Langlebigkeit!



➤ Rührflügel

Brauchen Sie Rührflügel, die Ihnen von Standardanwendungen bis hin zu hoch komplexen Applikationen perfekte Durchmischungsergebnisse liefern?

Profitieren Sie von einem einzigartigen Sortiment, das problemlos größere Mengen hochviskoser Medien und Gele komplett durchmischt!

IHRE VORTEILE

- Der Übertemperaturschutz verhindert zuverlässig eine Überhitzung – gerade im unbeaufsichtigten Dauerbetrieb wichtig
- Die 2-stufigen Getriebe garantieren Ihnen höchste Kraft in jedem Drehzahlbereich
- Alle Geräte sind für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet – sogar bei höchster Viskosität
- Erzielen Sie selbst in der Polymerforschung erstklassige Ergebnisse: Diese Laborrührer verfügen über das höchste Drehmoment in ihrer Klasse
- Benutzen Sie die RZR Laborrührer in aggressiver Umgebung: Das abgedichtete Gehäuse garantiert Ihnen einen jahrelangen wartungsfreien Betrieb

IHRE VORTEILE

- Rührerkupplungen, biegsame Wellen und Verschlüsse zum Rühren unter Vakuum und Druck vergrößern Ihren Anwendungsbereich
- Ihre Alleskönner für dick und dünn: Eine große Auswahl an Rührflügeln für alle Strömungsarten und Viskositäten
- Wählen Sie zwischen Rührflügeln aus Edelstahl, Kunststoff oder mit Teflonbeschichtung: Für Ihre spezielle Anwendung ist sicher das Richtige dabei
- Verkürzen Sie Ihre Prozesszeiten durch Spezialwerkzeuge, die eigendynamische Strömungen erzeugen und selbst Gele in größeren Mengen spielend vermischen

Kraftvoll Rühren



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Durch das versiegelte Gehäuse für den **jahrelangen wartungsfreien Dauereinsatz** in aggressiver Umgebung ausgelegt

Selbst **hochviskose Medien bis zu 350.000 mPa s** vermischt der RZR 2102 control Z problemlos



Der Übertemperaturschutz **verhindert zuverlässig Unfälle durch Überhitzung** – gerade im zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb

VISCO JET® Rührflügel vermischen Medien, die mit konventioneller Technik nicht mischbar sind – **auch bei Gelen** stellt sich eine **vollständige Umwälzung** ein

➤ Mechanische Laborrührer

Die mechanischen Laborrührer sind ideal für Standardanwendungen aller Art. Sie sind insbesondere geeignet für schnelle und zuverlässige Rühraufgaben, die nicht reproduzierbar sein müssen



Die Rührwelle kann durch das Gehäuse durchgeführt und der Rührflügel daher in jeder beliebigen Höhe positioniert werden


Aufgrund der 2 Getriebestufen erzielen Sie überproportional hohe Drehmomente

Die Drehzahl lässt sich über einen großen Bereich von 40 – 2.000 U/min stufenlos einstellen

Ihr optionaler Rührwellenschutz verhindert Unfälle mit dem schnell rotierenden Rührflügel

Ein Spannfutter mit einem Spannbereich von 10 mm ist für Sie bereits im Lieferumfang enthalten

Mechanische Laborrührer
Hohes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich

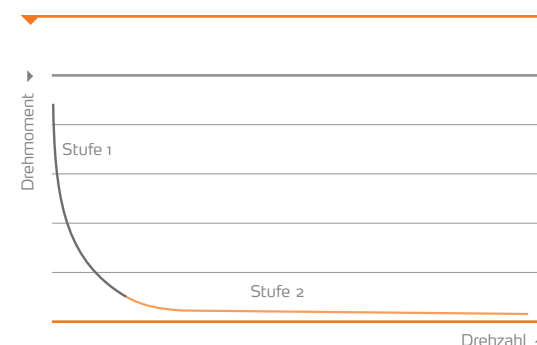

➤ RZR 2020 und RZR 2021

Für Standardanwendungen

Die Modelle RZR 2020 und RZR 2021 sind hervorragend für alle mittel- bis hochviskosen Anwendungen bis 60.000 mPa s geeignet und verfügen über alle genannten Vorteile für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

- Der RZR 2021 verfügt über eine digitale Anzeige zum präzisen Einstellen der Parameter. Der RZR 2020 ist für Standardanwendungen ausgelegt und hat kein Display
- Ein 2-stufiges Getriebe und Drehzahlen von 40 – 2.000 U/min garantieren für diesen Viskositätsbereich hervorragende Mischergebnisse
- Ein wartungsfreier Motor mit 27 W Abgabeleistung garantiert hohe Kraft und ein Drehmoment bis 400 Ncm

RZR 2021
Best. Nr. 501-20210-00

RZR 2020 (ohne Abbildung)
Best. Nr. 501-20200-00



➤ RZR 2041

Für hohe Viskositäten

Der RZR 2041 ist ideal für alle hochviskosen Anwendungen bis 100.000 mPa s und verfügt über alle genannten Vorteile für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

- Digitale Anzeige zum exakten Einstellen und Ablesen der Prozessparameter
- Ein 2-stufiges Getriebe und Drehzahlen von 40 – 2.000 U/min garantieren für jeden Viskositätsbereich hervorragende Mischergebnisse
- Ein wartungsfreier Motor mit 37 W Abgabeleistung garantiert höchste Kraft und ein Drehmoment bis 520 Ncm

RZR 2041
Best. Nr. 501-20410-00

➤ Elektronische Laborrührer

Elektronische Laborrührer eignen sich besonders gut für Anwendungen, die sehr starke Viskositätsschwankungen aufweisen. **Die eingestellte Drehzahl bleibt selbst unter diesen Bedingungen konstant.** Alle Ergebnisse sind reproduzierbar und eine Drehmomentanzeige macht jede Viskositätsänderung sichtbar



Die elektronischen Laborrührer können für kurze Zeit bis zu 200 % überlastet werden. So wird der Rührvorgang selbst bei einer kurzzeitigen Überstrapazierung nicht unterbrochen

Das Drehmoment kann individuell kalibriert und Viskositätsänderungen gemessen werden – ein reproduzierbares Arbeiten wird Ihnen somit leicht gemacht


Sie haben die Möglichkeit, die gewünschte Drehzahl von 30 – 2.000 U/min entweder direkt am Panel oder über die Schnittstelle einzustellen

Digitales Display zum Einstellen der Prozessparameter und zum Ablesen von Drehzahl und Drehmoment während der Anwendung

Ihr Laborrührer hält ein konstantes Drehmoment über den kompletten Drehzahlbereich einer Getriebestufe

Ein Spannfutter mit einem Spannbereich von 10 mm ist für Sie bereits im Lieferumfang enthalten

Elektronische Laborrührer
Konstant hohes Drehmoment im ganzen Drehzahlbereich innerhalb einer Getriebestufe

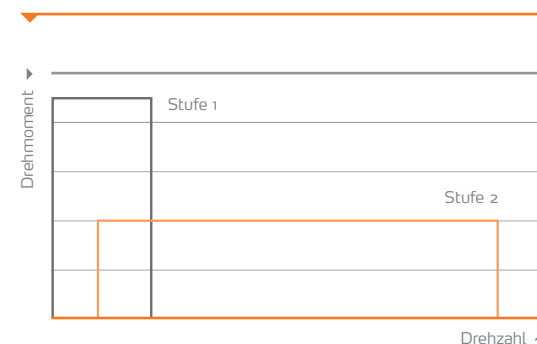

➤ RZR 2051 control und RZR 2052 control

Für Standardanwendungen

Die Modelle RZR 2051 control und RZR 2052 control sind 1-stufige Laborrührer, die selbst unter starken Viskositätsveränderungen ihre Drehzahl konstant halten. Dabei verfügen sie über alle genannten Vorteile für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

RZR 2051 control:

- Drehmoment von 40 Ncm im Kurzzeitbetrieb, 20 Ncm im Dauerbetrieb und eine Drehzahl von 50 – 2.000 U/min
- Ideal für Viskositäten bis 10.000 mPa s

RZR 2052 control:

- Drehmoment von 180 Ncm im Kurzzeitbetrieb, 90 Ncm im Dauerbetrieb und eine Drehzahl von 30 – 1.000 U/min
- Ideal für Viskositäten bis 40.000 mPa s
- Kalibrieren Sie ein gewünschtes Drehmoment vor oder während der Anwendung
- Ein digitales Display zeigt Ihnen Drehzahl und Drehmoment auf einen Blick

RZR 2051 control

Best. Nr. 501-20511-00

RZR 2052 control

(ohne Abbildung)

Best. Nr. 501-20521-00



➤ RZR 2102 control und RZR 2102 control Z

Für hohe Viskositäten

Die Modelle RZR 2102 control und RZR 2102 control Z sind 2-stufige Laborrührer, die selbst unter sehr starken Viskositätsveränderungen ihre Drehzahl konstant halten. Dabei verfügen sie über alle genannten Vorteile für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

- Wählen Sie zwischen 2 Getriebestufen und erzielen Sie mit der Kraft des 100 W Motors ein Drehmoment von 400 Ncm im Kurzzeitbetrieb, 200 Ncm im Dauerbetrieb bei einer Drehzahl von 12 – 2.000 U/min
- Ideal für Viskositäten bis 100.000 mPa s
- Kalibrieren Sie ein gewünschtes Drehmoment vor oder während der Anwendung
- Nutzen Sie die digitale Schnittstelle zur Vorgabe und Dokumentation Ihrer Prozessparameter

RZR 2102 control

Best. Nr. 501-21021-00

RZR 2102 control Z

Best. Nr. 501-21024-00



Planetengetriebe des RZR 2102 control Z

RZR 2102 control Z unterscheidet sich von RZR 2102 control durch:

- Ein zusätzliches Planetengetriebe für extrem hochviskose Medien bis zu 350.000 mPa s
- Ein Drehmoment von 700 Ncm im Dauerbetrieb, 800 Ncm im Kurzzeitbetrieb bei einer Drehzahl von 4 – 540 U/min
- Eine nicht durchführbare Rührwelle

➤ **Rührwerkzeuge**

Auswahlkriterien

Beim Einsatz eines Rührwerkes kommt es entscheidend auf die richtige Wahl des Rührwerkzeuges an. Diese unterscheiden sich in der Art der Strömung, die sie im Medium verursachen, im drehzahlabhängigen Einsatzbereich sowie hinsichtlich ihrer Ausführung für unterschiedliche Viskositäten

Anwendungsbeispiele:

- 1. Begasung von Flüssigkeiten < 500 mPa s: Turbinenrührer
- 2. Homogenisieren und Suspenderung in Flüssigkeiten < 500 mPa s: Propeller- bzw. Blattrührer
- 3. Stoffe mit einer Viskosität > 500 mPa s: Ankerrührer, Blattrührer BR 13, VISCO JET®
- 4. Rühren von Gelen: VISCO JET®

Für Turbinen-, Blatt-, Ankerrührflügel und das VISCO JET® System gilt: Wenn die Gefäßgröße und die Positionierung des Rührwerkzeuges perfekt aufeinander abgestimmt sind, erzielen Sie optimale Mischergebnisse



Einbaurichtlinien und Dimensionierung

Anordnung des Rührwerkzeuges

- Mittig
- Abstand zum Boden (h_3/d_2): 0,3
- Ø-Behälter (h_1/d_1): 1
- VISCO JET®: Ø-Verhältnis (d_2/d_1): 0,4 – 0,6

Umfangsgeschwindigkeit

- 3 – 15 m/sek: Turbinenrührer
- 2 – 5 m/sek: Blatt-, Ankerrührer und VISCO JET®

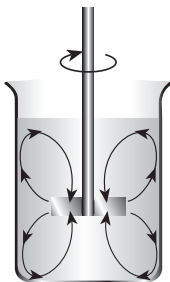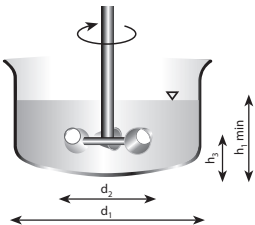


Blatt-/Halbmondrührer

- Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für Anwendungen im mittleren Drehzahlbereich
- Die Modelle BR 12, BR 14 und HR 18 verfügen über klappbare Rührflügel für enghalsige Gefäße
- Zum Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität

	Typ	Blattabmessung (mm)	Material	Länge [mm]	Ø Welle [mm]	Best. Nr.
	BR 10 Blattrührer	50 x 12	Edelstahl (V2A)	400	8	509-10000-00
	BR 11 Blattrührer	50 x 12	Edelstahl (V2A)	400	8	509-11000-00
	BR 12 Blattrührer	60 x 15	Edelstahl (V2A)	400	8	509-12000-00
	BR 13 Blattrührer	70 x 70	Edelstahl (V2A)	450	8	509-13000-00
	BR 14 Blattrührer	90 x 10	Edelstahl (V2A)	400	8	509-14000-00
	HR 18 Halbmondrührer	65 x 18 x 3	PTFE	350	8	509-18000-00

Propellerrührer


- Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für Anwendungen im mittleren bis hohen Drehzahlbereich
- Ideal zum Homogenisieren und Suspensieren
- Diese Modelle bilden vornehmlich eine axiale Strömung
- Zum Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität

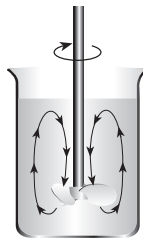

	Typ	Ø Propeller (mm)	Material	Länge [mm]	Ø Welle [mm]	Best. Nr.
	PR 39 Propellerrührer	75	PTFE	350	8	509-39000-00
	PR 30 Propellerrührer	58	Edelstahl (V2A)	400	8	509-30000-00
	PR 31 Propellerrührer mit Leitring PR 32 Propellerrührer mit Leitring PR 33 Propellerrührer mit Leitring	33 45 66	Edelstahl (V4A) Edelstahl (V4A) Edelstahl (V4A)	400 400 400	8 8 8	509-31000-00 509-32000-00 509-33000-00

Turbinenrührer


- Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für Anwendungen im mittleren bis hohen Drehzahlbereich
- Ideal zum Begasen von Flüssigkeiten
- Diese Modelle bilden vornehmlich eine radiale Strömung
- Zum Mischen von Medien mit niedriger bis mittlerer Viskosität < 500 mPa s

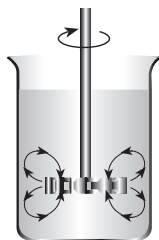

	Typ	Ø Turbine (mm)	Material	Länge [mm]	Ø Welle [mm]	Best. Nr.
	TR 20 Turbinenrührer	29	Edelstahl (V4A)	400	8	509-20000-00
	TR 21 Turbinenrührer	50	Edelstahl (V4A)	400	8	509-21000-00

Ankerrührer

- Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für Anwendungen im niedrigen Drehzahlbereich
- Zum Mischen von viskosen bis hochviskosen Medien

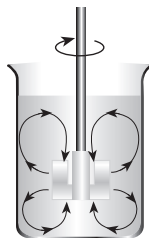

	Typ	Ø Blattabmessung (mm)	Material	Länge [mm]	Ø Welle [mm]	Best. Nr.
	AR 19 Ankerrührer	60 x 40 x 5	PTFE	350	8	509-19000-00

➤ **VISCO JET® Rührsystem**

Alleskönner für dick und dünn

- **Verkürzen** Sie Ihre **Prozesszeiten** und erzielen Sie dabei deutlich bessere Mischergebnisse
- Das Rührprinzip erzielt eine vollständige **Entgasung** des Mediums – Schaumbildung und Lufteinzug werden wirkungsvoll verhindert
- Selbst bei Medien, die mit konventionellen Rührflügeln nicht mischbar sind, stellt sich eine **vollständige Umwälzung** ein

- Die besondere Form löst auch bei geringen Drehzahlen eine eigendynamische Strömung aus, die **einzigartig** ist
- **Ein System für nahezu alle Rühraufgaben** von niedrig- bis hochviskosen Medien



Typ	Ø [mm]	Material	Länge [mm]	Ø Welle [mm]	Drehzahlbereich [U/min]	Für Behälterdurchmesser [mm]	Best. Nr.
VISCO JET® - 60*	60	Edelstahl (V4A)	500	10	200 – 800	80 – 150	509-16060-00
VISCO JET® - 80*	80	Edelstahl (V4A)	500	10	200 – 700	115 – 200	509-16080-00
VISCO JET® - 80*	80	Rührorgan: Kunststoff (POM) Nabe: Messing Welle: polyamidbeschichtet	500	10	200 – 700	115 – 200	509-16081-00
VISCO JET® - 120*	120	Edelstahl (V4A)	500	10	120 – 500	170 – 300	509-16120-00
VISCO JET® - 120*	120	Rührorgan: Kunststoff (POM) Nabe: Messing Welle: polyamidbeschichtet	500	10	120 – 500	170 – 300	509-16121-00

* Eine Rührwelle ist im Lieferumfang enthalten

VISCO JET® - 60 mm
Edelstahl (V4A)



VISCO JET® - 80 mm
Kunststoff (POM)



VISCO JET® - 120 mm
Edelstahl (V4A)



Applikationsbeispiele

Der **weltweit einzige Rührflügel**, der problemlos größere Mengen hochviskoser Medien und Gele komplett durchmischen kann.

Anwendungsbereiche:

Getränkeherstellung, Milchprodukte, Nahrungsmittel, Zuckerherstellung, Süßwarenherstellung, Chemie, Petrochemie, Keramik, Wasseraufbereitung, Pharma, Kosmetikherstellung, Farben- & Lackherstellung u.v.m.

Funktionsprinzip

Das VISCO JET® Rührsystem der VISCO JET Rührsysteme GmbH beruht auf dem sogenannten Konusprinzip. Durch den Staudruck am Verdrängereintritt und durch eine beschleunigte Strömung innerhalb des Verdrängers werden Turbulenzen erzeugt (sog. Düseneffekt). Diese Turbulenzen treffen bei der Kreisbewegung des Rührorgans aufeinander und führen zu der revolutionären Mischbewegung.

➤ **Zubehör**



Stativ S2

- Ø Stativrohr: 25 mm
 - Höhe: 700 mm
 - Gewicht: 5,8 kg
- Best. Nr. 570-12000-00



Stativ S2 XXL

- Ø Stativrohr: 25 mm
 - Höhe: 1.000 mm
 - Gewicht: 6,0 kg (Empfohlen für RZR 2102 control Z)
- Best. Nr. 570-12200-00



Teleskopstativ

- Ø Stativrohr: 32 mm
 - Höhe: 725 bis 1.025 mm
 - Gewicht: 7,7 kg
- Best. Nr. 570-12100-00



Klemme für Stativ S2, Stativ S2 XXL und Teleskopstativ

- Ø 13 – 32 mm
- Best. Nr. 570-22000-00



Spannfutter 8 mm

Für RZR 1
Best. Nr. 509-01000-00



Spannfutter 10 mm

Für RZR 2020 – 2102
Best. Nr. 509-02000-00



Rührverschluss (NS 29/32)

- Mit PTFE Spezialdichtung
 - Für Rührwellen mit Ø 8 mm
- Best. Nr. 509-09000-00



Flexible Rührerkupplung

- Mit Spannzapfen
 - Für Rührwellen mit Ø 10 mm
- Best. Nr. 509-03000-00



Rührwellenschutz

- Aus PMMA
 - Höhenverstellbar von ca. 187 mm bis 312 mm
 - Nicht für RZR 2102 control Z geeignet
- Best. Nr. 509-08000-00



Biegsame Welle

- Inkl. Spannfutter
 - Nicht für RZR 2102 control Z geeignet
- Best. Nr. 509-07000-00



Fernbedienung

- Mit Start/Stop Funktion
- Best. Nr. 591-40000-00



Software Watch & Control

- Für elektronische Laborrührer
- Best. Nr. 592-20000-00

➤ RZR Plug & Play Pakete



RZR Plug & Play 2052 control

Dieses Paket beinhaltet:
 1 x Laborrührer RZR 2052 control
 1 x PR 30 Propellerrührer inkl. Rührwelle
 1 x Stativ S2 und Klemme

Best. Nr. 501-20529-00



Klemme



Propellerrührer PR 30



Stativ S2

RZR Plug & Play 2020

Dieses Paket beinhaltet:
 1 x Laborrührer RZR 2020
 1 x PR 30 Propellerrührer inkl. Rührwelle
 1 x Stativ S2 und Klemme

Best. Nr. 501-20209-00



Klemme



Propellerrührer PR 30



Stativ S2



RZR Plug & Play 2102 control

Dieses Paket beinhaltet:
 1 x Laborrührer RZR 2102 control
 1 x VISCO JET® Rührer 80 mm (V4A) inkl. Rührwelle
 1 x Stativ S2 und Klemme

Best. Nr. 501-21029-00



Klemme



VISCO JET® Rührer 80 mm (V4A)



Stativ S2



➤ RZR 1

Für einfache Rühraufgaben

RZR 1 für Medien bis zu 40.000 mPa s und für ein Volumen bis 20 Liter

Der RZR 1 erzeugt ein Drehmoment bis 100 Ncm bei einer Abgabeleistung von 18 W

Nutzen Sie den Platz in Ihrem Labor effizient: Durch die schlanke Bauweise passt der Laborrührer in jeden Aufbau

Skala von 35 – 2.200 U/min zur Drehzahleinstellung

Ein 2-stufiges Getriebe und Geschwindigkeiten von 35 – 2.200 U/min garantieren hervorragende Mischergebnisse



RZR 1
 Best. Nr. 501-11000-00

Technische Daten – Laborrührer

Modell	RZR 1	RZR 2020	RZR 2021	RZR 2041	RZR 2051 control	RZR 2052 control	RZR 2102 control	RZR 2102 control Z
Bestellnummer (230 V)	501-11000-00	501-20200-00	501-20210-00	501-20410-00	501-20511-00	501-20521-00	501-21021-00	501-21024-00
Motorleistung Aufnahme/Abgabe (W)	77/18	50/27	50/27	70/37	80/50	140/100	140/100	140/100
Anzahl Getriebestufen	2	2	2	2	1	1	2	2
Drehzahlbereiche (U/min)	35 – 250 280 – 2.200	40 – 400 200 – 2.000	40 – 400 200 – 2.000	40 – 400 200 – 2.000	50 – 2.000	30 – 1.000	12 – 400 60 – 2.000	4 – 108 17 – 540
Drehzahlanzeige	Skala	Skala	digital	digital	digital	digital	digital	digital
Drehzahlregelung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Drehmoment Dauerbetrieb - bei Überlast (Ncm)	100	400	400	520	20 40	90 180	200 400	700 800
Überlastspitzen im Kurzzeitbetrieb (%)	–	–	–	–	200	200	200	200
Drehmomentanzeige (Ncm)	–	–	–	–	digital	digital	digital	digital
Verhalten bei Überlast	Abschalt- automatik	Abschalt- automatik	Abschalt- automatik	Abschalt- automatik	Abschalt- automatik mit LED Anzeige	Abschalt- automatik mit LED Anzeige	Abschalt- automatik mit LED Anzeige	Abschalt- automatik mit LED Anzeige
Motorschutz *	ÜHS Reset über Netzschalter	ÜHS Reset über Netzschalter	ÜHS Reset über Netzschalter	ÜHS Reset über Netzschalter	ÜHS Reset über Netzschalter	ÜHS Reset über Netzschalter	ÜHS Reset über Netzschalter	ÜHS Reset über Netzschalter
Viskosität bis (mPa s)	40.000	60.000	60.000	100.000	10.000	40.000	100.000	350.000
Volumen H2O max. (l)	20	25	25	40	40	100	100	100
Analoge/digitale Schnittstelle	–	–	–	–	ja	ja	ja	ja
Ø Rührwelle max. (mm)	8	10	10	10	10	10	10	10
Umgebungstemperatur (°C)	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 40	0 – 40
Zulässige, relative Luftfeuchtigkeit (%)	95, ohne Betauung	95, ohne Betauung	95, ohne Betauung	95, ohne Betauung	95, ohne Betauung	95, ohne Betauung	95, ohne Betauung	95, ohne Betauung
Abmessungen Gerät (B x H x T) (mm)	71 x 250 x 172	82 x 206 x 176	82 x 206 x 176	82 x 211 x 176	72 x 206 x 176	82 x 211 x 176	82 x 211 x 176	82 x 292 x 176
Abmessungen Haltestab (Ø x L) (mm)	13 x 300	13 x 160	13 x 160	13 x 160	13 x 160	13 x 160	13 x 160	13 x 160
Gewicht (kg)	2,7	3,0	3,0	3,3	2,8	3,7	3,7	4,7
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 20	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40

* ÜHS = Überhitzungsschutz
Standard Anschlussspannung: 230 V - andere Anschlussspannungen auf Anfrage



Zertifikat

Bescheinigung für den
zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb
von Laborrührern der RZR Serie

Die Laborrührer der RZR Serie sind mit Übertemperatur-Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 61010-1:2001 und DIN EN 61010-2-010:2003 und somit für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet.

Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung und die Arbeitsweise nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin, der Laborrichtlinie, der Unfallverhütungsvorschriften und der Gefahrstoffverordnung.

Schwabach, im Januar 2013

Jan Welzien

i. V. Jan Welzien
Leiter Technik

S. Richter

i. A. Stefan Richter
Leiter Qualitätssicherung

Temperiert Schütteln



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung





Wollen Sie Ihre Plattformschüttler grenzenlos und ohne Einschränkungen kombinieren?

Temperiert Schütteln

Wählen Sie zwischen 6 unterschiedlichen Schüttelbewegungen – von eindimensional bis dreidimensional, 3 verschiedenen Belastungsgewichten und 3 unterschiedlichen Inkubatorsystemen!

Höchste Sicherheit

- Um Ihnen Sicherheit beim unbeaufsichtigten Dauerbetrieb zu garantieren, verfügen alle Modelle über einen **Überhitzungsschutz**, der das Gerät im Notfall abschaltet
- Um **Unfälle kategorisch auszuschließen**, verfügen alle Modelle über einen tiefliegenden Schwerpunkt und kommen selbst auf einer feuchten Arbeitsfläche nicht ins Rutschen
- Bei allen Plattformschüttlern geben Gummimatten auf der Stellfläche Ihren Gefäßen einen **sicheren Halt**

Bester Bedienkomfort

- Arbeiten Sie mit vielen unterschiedlichen Bewegungsarten und Gefäßgrößen? Ein breites Sortiment – vom Reagenzglasschüttler bis zum großen Plattformschüttler – bietet Ihnen eine **Lösung nach Maß**
- Zusätzlich steht Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Zubehör und zahlreichen Aufsätzen für alle gängigen Gefäße zur Auswahl
- Wählen Sie aus 6 **unterschiedlichen Bewegungsarten** – von ein- bis dreidimensional – für jede Applikation ist das Richtige dabei
- Für Ihre spezielle Anwendung können Sie bei vielen Bewegungsarten zwischen mehreren Optionen Ihre Wunscharmplitude und den Neigungswinkel auswählen
- Sie haben die Wahl zwischen 3 **verschiedenen Belastungsgewichten**. Kompakte 2 kg Modelle, für den Inkubator compatible 5 kg Modelle oder 10 kg Modelle für höchsten Probendurchsatz



Das übersichtliche Bedienpanel ist selbsterklärend und erleichtert Ihnen die Anwendung im Alltag

Dauerhafte Kostenreduzierung

- Steigern Sie Ihren Probendurchsatz und **verringern Sie Prozesszeiten** durch das modulare Konzept zum gleichzeitigen Mischen, Schütteln und Temperieren
- Alle Produkte verfügen über **wartungs- und funkenfreie Motoren** und sind hervorragend für den jahrelangen Dauereinsatz geeignet. Das macht Ihr Gerät zu einer lohnenswerten Investition!
- Das abgedichtete Gehäuse schützt Ihre Schüttel- und Mischgeräte zuverlässig vor Korrosion und erhöht die Nutzungsdauer im Schnitt auf über 10 Jahre bei gleichzeitiger **Reduzierung Ihrer Wartungs- und Reparaturkosten**
- Arbeiten Sie mit thermolabilen Substanzen? Ein temperaturisolierter Antrieb verhindert eine Erwärmung der Plattform und damit thermische Schäden an Ihrer Probe. Das **spart Ihnen Zeit und Geld**

Temperiert Schütteln

Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Alle Modelle verfügen über einen **Überhitzungsschutz**, der das Gerät im Notfall abschaltet – wichtig für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz

Durch einen tiefliegenden Schwerpunkt kommen die Schüttler selbst auf einer feuchten Arbeitsfläche **nicht ins Rutschen**

Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Schüttelbewegungen, Neigungswinkeln, Bewegungsamplituden und 3 verschiedenen Belastungsgewichten **das richtige Produkt für Ihre spezielle Applikation**




Volle visuelle Reaktionskontrolle durch transparente Inkubationshaube aus PETG, die keine Kondensatbildung zulässt

Sekundenschneller Zugriff: Die aufklappbare Haube bleibt ohne Arretierung in jeder beliebigen Position stehen

Bei Anwendungen in der Mikrobiologie: Temperaturisolierter Antrieb **verhindert eine Erwärmung** der Plattform **und damit Schäden an thermolabilen Proben**

➤ Grenzenlos kombinieren

Keine Insellösungen! Forschen Sie erfolgreicher mit einem Gesamtkonzept, das durch seine Kombinationsmöglichkeiten unzählige individuelle Lösungen bietet

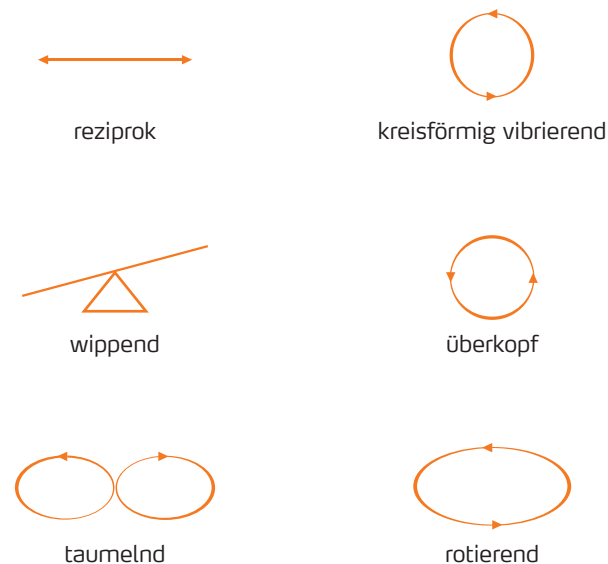

IHRE VORTEILE

- Kein Umfüllen: Für alle gängigen Gefäße finden Sie einen Aufsatz nach Maß
- Keine Kompromisse: Mischen Sie, was Sie wollen – mit diesem Sortiment erzielen Sie die besten Ergebnisse
- Keine Beschränkungen: Wählen Sie zwischen 6 unterschiedlichen Schüttelbewegungen – von eindimensional bis dreidimensional. Einzelne Bewegungen variieren zusätzlich in ihren Bewegungsamplituden und Neigungswinkeln

➤ Optionales Inkubationssystem

Ihre individuelle Applikation kann gleichzeitig temperiert werden



IHRE VORTEILE

- Nutzen Sie Ihren teuren Laborplatz effektiv: Das modulare Konzept beansprucht deutlich weniger Platz als jedes andere vergleichbare System
- Integrieren Sie Ihren Plattformschüttler im Handumdrehen in ein preisgünstiges Inkubationssystem
- Seien Sie flexibel! Egal, wie groß Ihre Gefäße sind – drei verschiedene Inkubationshauben lassen alle Möglichkeiten offen

➤ Reagenzglasschüttler – kreisförmig vibrierend

Ideal zum blitzschnellen Durchmischen in Reagenzgläsern, Eppendorf-Kappen und vergleichbaren Gefäßen selbst mit unterschiedlichen Durchmessern und Längen. Die starke Schüttelbewegung garantiert ausnahmslos gute Mischergebnisse

Reax top

Das Standardmodell

- Verwenden Sie das Gerät für den Kurzzeitbetrieb: In diesem Modus wird die Schüttelbewegung durch Druck auf den Aufnahmeteller ausgelöst
- Mit dem starken **Schüttelorbit von 5 mm**, der selbst bei **Feststoffen und hochviskosen Medien** eine gleichmäßige Verteilung zuverlässig und schnell erzielt
- Sie können auf Dauerbetrieb umstellen – dieser Modus garantiert eine permanente Schüttelbewegung
- Schnellste Durchmischung durch die hohe Geschwindigkeit von 2.500 U/min
- Geschwindigkeitsanzeige ohne Angabe der exakten Drehzahl
- Ein Aufnahmeteller für Röhrchen bis 20 mm Durchmesser ist für Sie bereits im Lieferumfang enthalten. Optionale Aufnahmeteller für Gefäße bis 50 mm Durchmesser erweitern Ihren Anwendungsbereich



Best. Nr. 541-10000-00
Zubehör: Kategorie A



Best. Nr. 541-11000-00
Zubehör: Kategorie A

Reax control

Das Präzisionsmodell

- Mit allen Merkmalen des Reax top, plus:
- Verbessern Sie Ihr Ergebnis durch eine elektronische Drehzahlregelung – auch im niedrigen Bereich und selbst bei Lastwechsel bleibt die Geschwindigkeit konstant
- Exakte Geschwindigkeitsanzeige mit Angabe der Drehzahl

Multi Reax

Der Alleskönner

- Für Ihre Gefäße sind 2 Halterungen im Lieferumfang enthalten: Aufnahme für 26 Reagenzgläser mit 10 – 16 mm Ø Aufnahme für 12 Reagenzgläser mit 16 – 32 mm Ø
- Mit dem **Schüttelorbit von 3 mm** erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse, selbst bei **großen Proben mit Feststoffanteilen**
- Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit von 150 bis 2.000 U/min stufenlos am digitalen Display ein
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 999 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal



Best. Nr. 545-10000-00
Zubehör: Kategorie H

➤ Plattformschüttler – kreisförmig vibrierend

Sie haben Anwendungen, die ein kräftiges oder schonendes Mischen von kleinen Proben auf Mikrotiterplatten oder in Reagenzgläsern erfordern?

Fünf Optionen mit unterschiedlichen Belastungsgewichten und Amplituden stehen Ihnen zur Auswahl!

Vibramax 100

Der Kompakte

- Der Vibramax 100 ist ein platzsparendes Modell mit einem Belastungsgewicht von 2 kg und ideal für Gefäße aller Art
- Mit dem **Schüttelorbit von 3 mm** erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse, selbst bei **Proben mit Feststoffanteilen**
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 150 bis 1.350 U/min individuell und stufenlos einstellen – für schonendes bis kräftiges Mischen
- Fixieren Sie mit den optionalen Spannwalzen Gefäße unterschiedlicher Größe
- Ein vielfältiges Sortiment an Aufsätzen und Spannwalzen ermöglicht Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal



Best. Nr. 544-21200-00
Zubehör: Kategorie B

Vibramax 110

Der Effiziente

- Mit allen Merkmalen des Vibramax 100, plus:
- Ideal geeignet für optionale Reagenzglasaußsätze bis 49 Proben gleichzeitig
- Mit dem **Schüttelorbit von 1,5 mm** erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse auf **schonende Art**
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 150 bis 2.500 U/min individuell und stufenlos einstellen – für schonendes bis kräftiges Mischen



Best. Nr. 544-31200-00
Zubehör: Kategorie C

Titramax

Titramax 100 – Der Kompakte / Titramax 101 – Der Kraftvolle

- Der Titramax 100 ist ein platzsparendes Modell mit einem Belastungsgewicht von 2 kg und ideal für 4 Mikrotiterplatten
- Ein temperaturisolierter Antrieb verhindert eine Erwärmung der Plattform. Ein thermischer Schaden an Ihrer Probe ist selbst bei stundenlangem Dauerbetrieb ausgeschlossen
- Mit dem **Schüttelorbit von 1,5 mm** erzielen Sie mit dem Titramax 100 ausgezeichnete Mischergebnisse auf **schonende Art**. Der Titramax 101 dagegen mit seinem **Schüttelorbit von 3,0 mm** liefert erstklassige Ergebnisse selbst bei **Proben mit Feststoffanteilen**
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 150 bis 1.350 U/min individuell und stufenlos einstellen
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal



Titramax 100 (ohne Abb.)
Best. Nr. 544-11200-00

Titramax 101
Best. Nr. 544-11300-00



Titramax 1000
Best. Nr. 544-12200-00

Titramax 1000

Der Temperierbare

- Mit allen Merkmalen des Titramax 100, plus:
- Der Titramax 1000 lässt sich in das modulare Inkubationssystem integrieren und ist daher für Anwendungen geeignet, die temperiert werden müssen
- Durch 6 Mikrotiterplatten erhöht sich Ihr Probendurchsatz um 50 %
- Mit dem **Schüttelorbit von 1,5 mm** erzielen Sie ausgezeichnete Mischergebnisse auf **schonende Art**
- Der Titramax 1000 ist ein kompaktes Modell mittlerer Größe mit einem Belastungsgewicht von 5 kg

Plattformschüttler Plug & Play Titramax

Dieses Paket beinhaltet:

- 1 x Plattformschüttler Titramax 1000
- 1 x Heizmodul Inkubator 1000
- 1 x flache Inkubationshaube

Best. Nr. 544-12209-00



➤ Plattformschüttler – rotierend

Die Züchtung von Mikroorganismen und Zellkulturen braucht Ruhe und Zeit. Was tun, wenn Sie sich auf andere Versuche konzentrieren wollen?

Durch die langsame und gleichmäßige Rotationsbewegung der Rotamax und Unimax Modelle werden Ihre Proben ununterbrochen in Bewegung gehalten!



Rotamax 120

Der Kompakte

- Der Rotamax 120 ist ein platzsparendes Modell mit einem Belastungsgewicht von 2 kg
- Wählen Sie aus einem breiten Sortiment von Aufsätzen – für bis zu 16 Erlenmeyerkolben – Ihre persönliche Idealkombination
- Mit dem 20 mm Orbit werden Ihre Proben insbesondere in Petrischalen optimal in Bewegung gehalten
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 20 bis 300 U/min individuell und stufenlos einstellen – für schonendes Mischen
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal

Best. Nr. 544-41200-00
Zubehör: Kategorie B

Unimax 1010

Der Temperierbare

- Der Unimax 1010 ist ein kompaktes Modell mittlerer Größe mit einem Belastungsgewicht von 5 kg
- Der Unimax 1010 lässt sich in den modularen Inkubator integrieren und ist daher ideal für Anwendungen, die temperiert werden müssen
- Mit dem 10 mm Orbit werden Ihre Proben insbesondere in Erlenmeyerkolben optimal in Bewegung gehalten
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 30 bis 500 U/min individuell und stufenlos einstellen – für schonendes Mischen
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 999 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal



Best. Nr. 543-12310-00
Zubehör: Kategorie D



Best. Nr. 542-10020-00
Zubehör: Kategorie E

Unimax 2010

Der Belastbare

- Mit allen Merkmalen des Unimax 1010, plus:
- Der Unimax 2010 ist ein großes Modell mit einem Belastungsgewicht von 10 kg für erhöhten Probendurchsatz
- Mit dem 20 mm Orbit werden Ihre Proben insbesondere in Erlenmeyerkolben optimal in Bewegung gehalten
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 20 bis 400 U/min individuell und stufenlos einstellen – für schonendes Mischen
- Erzielen Sie mit dem mehrstöckigen Aufbau einen einzigartig hohen Probendurchsatz bei geringstem Platzbedarf
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal



Plattformschüttler Plug & Play Unimax

Dieses Paket beinhaltet:

- 1 x Plattformschüttler Unimax 1010
- 1 x Heizmodul Inkubator 1000
- 1 x hohe Inkubationshaube

Best. Nr. 543-12319-00

➤ Plattformschüttler – wippend

Sie züchten Zellkulturen, bewegen Farbtröge und wollen sich alle Gefäßoptionen offen halten?

Der Duomax erzeugt eine zweidimensionale Kippbewegung und eignet sich hervorragend für Petrischalen, Kulturflaschen, Erlenmeyerkolben und alle Standardgefäße!



Duomax 1030

Der Temperierbare

- Der Duomax 1030 ist ein kompaktes Modell mittlerer Größe mit einem Belastungsgewicht von 5 kg
- Der Duomax 1030 lässt sich in den modularen Inkubator integrieren und ist daher ideal für Anwendungen, die temperiert werden müssen
- Wählen Sie zwischen zwei Modellen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln: 5° für eine schonende oder 10° für eine stärkere Bewegungsamplitude
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 2 bis 50 U/min individuell und stufenlos einstellen – ideal für alle gängigen Standardgefäße
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal

Neigungswinkel 5° Best. Nr. 543-32205-00
Neigungswinkel 10° Best. Nr. 543-32210-00
Zubehör: Kategorie D

➤ Plattformschüttler – reziprok

Fehlt Ihnen die richtige Schüttelintensität zur Phasentrennung?

Die Promax-Modelle eignen sich speziell zur Separation in Scheidetrichtern!

Promax 1020

Der Temperierbare

- Der Promax 1020 ist ein kompaktes Modell mittlerer Größe mit einem Belastungsgewicht von 5 kg
- Der Promax 1020 lässt sich in den modularen Inkubator integrieren und ist daher ideal für Anwendungen, die temperiert werden müssen
- Ein vielfältiges Angebot an Zubehör und Aufsätzen für Scheidetrichter oder Erlenmeyerkolben bietet Ihnen unzählige Variationsmöglichkeiten
- Der Promax 1020 erzielt mit einem Hubweg von 32 mm die ideale Bewegung für Scheidetrichter
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 30 bis 250 U/min individuell und stufenlos einstellen – ideal zur Separation
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 999 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal



Best. Nr. 543-22332-00
Zubehör: Kategorie D



Best. Nr. 542-20020-00
Zubehör: Kategorie E

Promax 2020

Der Belastbare

- Mit allen Merkmalen des Promax 1020, plus:
- Der Promax 2020 ist ein großes Modell mit einem Belastungsgewicht von 10 kg für erhöhten Probendurchsatz
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 20 bis 400 U/min individuell und stufenlos einstellen – ideal zur Separation
- Der Promax 2020 erzielt mit einem Hubweg von 20 mm die ideale Bewegung für größere Mengen
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal

➤ Plattformschüttler – taumelnd

Erzielen Sie mit einer dreidimensionalen Bewegung das beste Ergebnis – zum Beispiel mit Gelen für die Elektrophorese! Wählen Sie sogar den Neigungswinkel aus, der am zuverlässigsten Ihr Medium vermischt



Neigungswinkel 5° Best. Nr. 543-42205-00
Neigungswinkel 10° Best. Nr. 543-42210-00
 Zubehör: Kategorie D

Polymax 1040

Der Temperierbare

- Der Polymax 1040 ist ein kompaktes Modell mittlerer Größe mit einem Belastungsgewicht von 5 kg
- Wählen Sie zwischen zwei Modellen mit unterschiedlichen Neigungswinkeln: 5° für eine schonende oder 10° für eine stärkere Bewegungsamplitude
- Arbeiten Sie mit den Gefäßen Ihrer Wahl: Petrischalen und Erlenmeyerkolben – es gibt keine Einschränkungen
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 2 bis 50 U/min individuell und stufenlos einstellen – ideal für alle gängigen Standardgefäße
- Der Polymax 1040 lässt sich in den modularen Inkubator integrieren und ist daher ideal für Anwendungen, die temperiert werden müssen
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal

Polymax 2040

Der Belastbare

- Mit allen Merkmalen des Polymax 1040, plus:
- Der Polymax 2040 ist ein großes Modell mit einem Belastungsgewicht von 10 kg für erhöhten Probendurchsatz
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 2,5 bis 50 U/min individuell und stufenlos einstellen – ideal für alle gängigen Standardgefäße
- Nutzen Sie die Timerfunktion bis 120 Minuten für eine automatische Beendigung der Schüttelfunktion. Nach Ablauf Ihrer eingestellten Zeit ertönt ein akustisches Signal



Neigungswinkel 5° Best. Nr. 542-40005-00
Neigungswinkel 10° Best. Nr. 542-40010-00
 Zubehör: Kategorie E

➤ Inkubator 1000

Findet Ihr Plattformschüttler keinen Platz in einem Wärmeschrank? Eine Temperierung und eine visuelle Reaktionskontrolle sind aber unentbehrlich?

Mit dem einzigartigen modularen System können Sie alles in Einem: Mischen, Schütteln und Temperieren – und Sie behalten alles im Auge.

Die geeigneten Plattformschüttler sind:

Duomax 1030, Polymax 1040, Titramax 1000, Unimax 1010 und Promax 1020



IHRE VORTEILE

- Das Heizmodul **erwärmt** die Umluft **schonend** bis auf 65 °C
- Ein Umluftgebläse gewährleistet eine **gleichmäßige Wärmeverteilung** innerhalb der Inkubationshaube
- Sie haben zu jeder Zeit **volle visuelle Reaktionskontrolle**, da die transparente Inkubationshaube aus PETG keine Kondensatbildung zulässt
- **Wählen Sie unter 3 Optionen:** Eine flache Haube für Mikrotiterplatten, eine hohe Haube für Standardgefäße und eine XL-Haube für Erlenmeyerkolben bis 2.000 ml
- **Sekundenschneller Zugriff:** Die aufklappbare Haube bleibt ohne Arretierung in jeder gewünschten Position stehen
- Sie können **EIN** Inkubatorsystem für **MEHRERE** Plattformschüttler verwenden. Der Umbau dauert keine 2 Minuten

Heizmodul

- Die Heizleistung von 300 W garantiert Ihnen **schnellste Aufheizzeiten**
- Stellen Sie die gewünschte **Soll-Temperatur bis 65 °C** auf einem digitalen Display ein und lesen Sie auf einem separaten Display die Ist-Temperatur ab
- Um Ihre Probe vor thermischen Schäden zu schützen, verfügt das Heizmodul über einen **Überhitzungsschutz**
- Die elektrische Umluftheizung mit ihrem **extrem leisen Gebläse** garantiert Ihnen schnellste Aufheizzeiten bei geringster Lärmstufe mit einer Genauigkeit von ± 2 °C bis 50 °C und ± 4 °C über 50 °C



Best. Nr. 549-90010-00

➤ Inkubator 1000

Inkubationshauben

Kombinieren Sie das Heizmodul mit einer Inkubationshaube Ihrer Wahl:

Flache Inkubationshaube

Für kleine Gefäße und Mikrotiterplatten

- Die flache Haube hat eine geringe Höhe von 163 mm und ist daher perfekt geeignet für Mikrotiterplatten, Petrischalen, Kulturflaschen und Erlenmeyerkolben von 25 ml bis 100 ml
- Sparen Sie Zeit! Die Haube aus transparentem PETG ist ganz einfach und schnell zu reinigen



Hohe Inkubationshaube
Best. Nr. 549-90030-00

Inkubationshaube XL

Für große Gefäße

- Die Inkubationshaube XL hat eine Höhe von 428 mm und ist daher perfekt für 2.000 ml Erlenmeyerkolben geeignet
- Sparen Sie Zeit! Die Haube aus transparentem PETG ist ganz einfach und schnell zu reinigen



Flache Inkubationshaube
Best. Nr. 549-90040-00

Hohe Inkubationshaube

Für mittelgroße Gefäße

- Die hohe Haube hat eine Höhe von 267 mm und ist daher perfekt geeignet für 500 ml Erlenmeyerkolben oder hohe Gefäße
- Sparen Sie Zeit! Die Haube aus transparentem PETG ist ganz einfach und schnell zu reinigen



Inkubationshaube XL
Best. Nr. 549-90060-00

➤ Überkopfschüttler

Mit diesen Überkopfschüttlern können Sie Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchungen nach DIN 38414, Teil 4 durchführen



Reax 20/4 (ohne Abbildung)
Best. Nr. 541-20004-00
Zubehör: Kategorie G

Reax 20/8
Best. Nr. 541-20008-00
Zubehör: Kategorie G

Reax 20/12 (ohne Abbildung)
Best. Nr. 541-20012-00
Zubehör: Kategorie G

Reax 20

Überkopfschüttler für 4, 8 oder 12 Flaschen

- Die Geschwindigkeit lässt sich von 1 bis 16 U/min individuell und stufenlos einstellen – und entspricht den DIN 38414 Teil 4 Vorgaben
- Andere Geschwindigkeiten, z. B. 0,5 bis 8 U/min oder 2 bis 32 U/min sind auf Anfrage erhältlich
- Flaschen lassen sich durch Schnellspanntechnik leicht einsetzen und herausnehmen
- Sie arbeiten auch mit Mischzylindern oder Weithalsflaschen? Die Reax 20 Modelle sind auch für diese mit 160 – 290 mm Höhe und einem Durchmesser von max. 136 mm bestens geeignet

Reax 2

- Überkopfschüttler mit Schnellspanntechnik für 2 Gefäße für unterschiedliche Anwendungen und ein Belastungsgewicht von 1 kg
- Die Geschwindigkeit lässt sich von 20 bis 100 U/min individuell und stufenlos einstellen
- Ein Universaladapter für die Verwendung verschlossener Gefäße mit 50 – 160 mm Höhe ist für Sie im Lieferumfang enthalten
- Wählen Sie den optionalen Adapter zum Mischen von bis zu 20 Reagenzgläsern gleichzeitig als Zubehör



Best. Nr. 541-21001-00
Zubehör: Kategorie F

➤ **Zubehör**



A
Aufnahmeteller, groß
Für Kolben bis 50 ml
Best. Nr. 549-19000-00



A
Haltestab mit Gefäßhalterung
Zur sicheren Halterung von
Reagenzgläsern im
Dauerbetrieb
Best. Nr. 549-20000-00



A
Haltegestell 10
Für max. 10 Reaktionsgefäße
mit Ø 10 mm, Länge bis 60 mm
Best. Nr. 549-01000-00



A
Halter für Reagenzgefäße
Für max. 6 Eppendorfgefäße
(1,5 ml)
Best. Nr. 549-04000-00



D
Aufsatz mit Spannwalzen
Spannwalzenaufsatz mit zwei
Spannwalzen
Best. Nr. 549-70000-00



D
Spannwalze
Zusätzliche Spannwalze passend
zu Spannwalzenaufsatz
Best. Nr. 549-70000-00
Best. Nr. 549-71000-00



E
**Halterung für Scheidetrichter
(250 ml, 500 ml, 1000 ml)**
Für Tablar 2000, max. 4 (250 ml),
max. 3 (500 ml), max. 3 (1000 ml)
Halterungen pro Tablar
Best. Nr. 549-57000-00



E
**Halterung für Scheidetrichter
(2000 ml)**
Für Tablar 2000,
max. 2 Halterungen pro Tablar
Best. Nr. 549-61000-00



B
Aufsatz mit Spannwalzen
Spannwalzenaufsatz mit zwei
Spannwalzen
Best. Nr. 549-81000-00



B
Spannwalze
Zusätzliche Spannwalze passend
zu Spannwalzenaufsatz
Best. Nr. 549-81000-00
Best. Nr. 11-008-007-08



B
Tablar 100
Mit Universallochung
zur Verwendung mit Halterungen
für Erlenmeyerkolben
Best. Nr. 549-59100-00



C
Aufsatz für Reagenzgläser
Für max. 49 Reagenzgläser mit
Ø 12 mm, Länge bis 80 mm
Best. Nr. 549-82000-00
Für max. 36 Reagenzgläser mit
Ø 16 mm, Länge bis 80 mm
Best. Nr. 549-83000-00



E
**Tablar 2000
mit Universallochung**
Zur Verwendung mit
Halterungen
für Erlenmeyerkolben
und Scheidetrichtern
Best. Nr. 549-59000-00




E
Grundgestell
Zusammen mit Spannwalzen
Best. Nr. 549-58000-00 zur
Befestigung beliebiger Gefäße
Best. Nr. 549-50000-00



E
Spannwalze
Zusammen mit Grundgestell
Best. Nr. 549-50000-00 zur
Befestigung beliebiger Gefäße;
bitte mind. 2 Stück bestellen
Best. Nr. 549-58000-00



E
Montageteile
Für mehrstöckigen Aufbau
inkl. Tablar 2000
Best. Nr. 549-62000-00

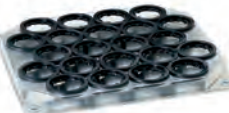

D
Aufsatz für Erlenmeyerkolben
Für 22 Erlenmeyerkolben (25 ml)
Best. Nr. 549-72000-00




D
Aufsatz für Erlenmeyerkolben
Für 14 Erlenmeyerkolben (50 ml)
Best. Nr. 549-73000-00



D
Aufsatz für Erlenmeyerkolben
Für 9 Erlenmeyerkolben (100 ml)
Best. Nr. 549-74000-00



D
Aufsatz für Erlenmeyerkolben
Für 5 Erlenmeyerkolben (250 ml)
Best. Nr. 549-75000-00

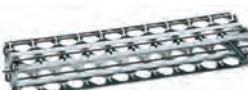

F
Adapter 1
Für max. 20 Reagenzgläser
mit Ø 10 – 18 mm
Best. Nr. 549-21000-00



G
**Spannteller für
Verschlusskappen**
Für Standardgefäße mit
Ø 94 mm
Best. Nr. 11-001-001-81



G
Befestigungssatz
Für 4 x 1,0 l Flaschen
Best. Nr. 549-26000-00



G
Befestigungssatz
Für 4 x 0,5 l Flaschen
Best. Nr. 549-27000-00



D
Aufsatz für Erlenmeyerkolben
Für 4 Erlenmeyerkolben (500 ml)
Best. Nr. 549-76000-00



D
Aufsatz für Erlenmeyerkolben
Für 2 Erlenmeyerkolben (1000 ml)
Best. Nr. 549-77000-00



D
Tablar 1000
Mit Universallochung zur
Verwendung mit Halterungen
für Erlenmeyerkolben und
Scheidetrichtern
Best. Nr. 549-59200-00



D
Halterung für Scheidetrichter
Passend für 4 Scheidetrichter
(50 ml, konisch) oder
4 Scheidetrichter
(100 ml, konisch)
Best. Nr. 549-78000-00



F
Universaladapter
Für geschlossene Gefäße oder Reagenzglasracks;
max. Gefäßhöhe: 160 mm
Best. Nr. 549-30000-00



H
Aufnahme für 12 Reagenzgläser
(Ø 16 – 32 mm, Länge 120 mm)
Best. Nr. 549-03000-00



H
Aufnahme für 26 Reagenzgläser
(Ø 10 – 16 mm, Länge 160 mm)
Best. Nr. 549-01600-00

Zubehör für:

- A** Reax top/control
- B** Vibramax 100, Rotamax 120
- C** Vibramax 110
- D** Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040, Promax 1020

- E** Unimax 2010, Promax 2020, Polymax 2040
- F** Reax 2
- G** Reax 20/4 · 20/8 · 20/12
- H** Multi Reax

Halteklammern für Tablar 100, 1000 und 2000



	Größe 1 Für 25 ml Erlen- meyerkolben	Größe 2 Für 50 ml Erlen- meyerkolben	Größe 3 Für 100 ml Erlen- meyerkolben	Größe 4 Für 250 ml Erlen- meyerkolben	Größe 5 Für 500 ml Erlen- meyerkolben	Größe 6 Für 1000 ml Erlen- meyerkolben	Größe 7 Für 2000 ml Erlen- meyerkolben
Best. Nr.	549-51000-00	549-52000-00	549-53000-00	549-54000-00	549-55000-00	549-56000-00	549-63000-00
Für Tablar 100	max. 16	max. 16	max. 8	max. 5	max. 3	max. 2	–
Für Tablar 1000	max. 20	max. 20	max. 14	max. 8	max. 4	max. 4	max. 2
Für Tablar 2000	max. 36	max. 36	max. 23	max. 12	max. 9	max. 5	max. 3

➤ Technische Daten – Schüttel- & Mischgeräte



Modell	Reax top	Reax control	Multi Reax	Titramax 100	Titramax 101	Titramax 1000	Vibramax 100	Vibramax 110	Rotamax 120
Bewegungsart	kreisförmig vibrierend	kreisförmig vibrierend	kreisförmig vibrierend	kreisförmig vibrierend	kreisförmig vibrierend	kreisförmig vibrierend	kreisförmig vibrierend	kreisförmig vibrierend	rotierend
Drehzahl (U/min)	0 – 2.500	0 – 2.500	150 – 2.000	150 – 1.350	150 – 1.350	150 – 1.350	150 – 1.350	150 – 2.500	20 – 300
Drehzahlanzeige	Merkskala	Drehzahlskala	Digital	Drehzahlskala	Drehzahlskala	Drehzahlskala	Drehzahlskala	Drehzahlskala	Drehzahlskala
Orbit (mm)	5	5	3	1,5	3	1,5	3	1,5	20
Winkel (°)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Betriebsart	Kurzzeit- und Dauerbetrieb	Kurzzeit- und Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb
Aufnahmeleistung (W)	51	51	50	31	31	31	31	46	33
Gewicht (kg)	2,8	2,8	9,8	5,5	5,5	6,5	5,5	5,0	5,5
Abmessungen (B x H x T) (mm)	134 x 105 x 172	34 x 105 x 172	270 x 172 x 410	245 x 125 x 310	245 x 125 x 310	320 x 125 x 375	245 x 125 x 310	245 x 146 x 310	245 x 125 x 310
Nutzfläche (B x T) (mm)	–	–	–	220 x 220	220 x 220	290 x 258	220 x 220	140 x 140	220 x 220
Standardausstattung	–	–	Aufnahme f. 12 oder 26 Gefäße	Aufnahme f. 4 Mikrotiterplat.	Aufnahme f. 4 Mikrotiterplat.	Aufnahme f. 6 Mikrotiterplat.	Gummiauflage mit Randwulst	Gummiauflage mit Randwulst	Gummiauflage mit Randwulst
Max. Belastung (kg)	–	–	1,5	2	2	5	2	2	2
Überhitzungsschutz	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend
Zulässige Umgebungstemperatur (°C)	5–40 / 85 % rel. Luftfeuchtigkeit	5–40 / 85 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 22	IP 22	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30

Modell	Unimax 1010	Unimax 2010	Promax 1020	Promax 2020	Duomax 1030	Polymax 1040	Polymax 2040	Reax 2	Reax 20/4 Reax 20/8 Reax 20/12
Bewegungsart	rotierend	rotierend	reziprok	reziprok	wippend	taumelnd	taumelnd	überkopf	überkopf
Drehzahl (U/min)	30 – 500	20 – 400	30 – 250	20 – 400	2 – 50	2 – 50	2,5 – 50	20 – 100	1 – 16
Drehzahlanzeige	Digital	Digital	Digital	Digital	Drehzahlskala	Drehzahlskala	Digital	Merkskala	Drehzahlskala
Orbit / Hubweg (mm)	10	20	32	20	–	–	–	–	–
Winkel (°)	–	–	–	–	5/10	5/10	5/10	–	–
Betriebsart	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	Timerfunktion/ Dauerbetrieb	–	–
Aufnahmeleistung (W)	50	115	50	115	115	115	115	27	280
Gewicht (kg)	8,0	16	8,0	16	8,0	8,0	16	5,2	23, 28, 33
Abmessungen (B x H x T) (mm)	320 x 125 x 375	426 x 135 x 435	320 x 125 x 375	426 x 135 x 435	320 x 185 x 375	320 x 195 x 375	426 x 208 x 435	510 x 180 x 235	490 x 465 x 520
Nutzfläche (B x T) (mm)	290 x 258	390 x 340	290 x 258	390 x 340	290 x 258	290 x 258	390 x 340	–	770 x 465 x 520
Standardausstattung	Gummiauflage mit Randwulst	Gummiauflage mit Randwulst	Gummiauflage mit Randwulst	Gummiauflage mit Randwulst	Gummiauflage mit Randwulst	Gummiauflage mit Randwulst	Gummiauflage mit Randwulst	Universal-adapter	1050 x 465 x 520
Max. Belastung (kg)	5	10	5	10	5	5	10	1	2
Überhitzungsschutz	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend	selbst-rücksetzend
Zulässige Umgebungstemperatur (°C)	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–50 / 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–40/80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0–40/80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 40	IP 20	IP 40	IP 20	IP 40	IP 40	IP 20	IP 21	IP 21

Standard Anschlussspannung: 230 V - andere Anschlussspannungen auf Anfrage

Zertifikat

Bescheinigung für den
zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb
von Reagenzglas- und Plattformschüttlern

Die Reagenzglas- und Plattformschüttler sind mit Übertemperatur-Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 61010-1:2001 und DIN EN 61010-2-010:2003 und somit für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet.

Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung und die Arbeitsweise nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin, der Laborrichtlinie, der Unfallverhütungsvorschriften und der Gefahrstoffverordnung.

Schwabach, im Januar 2013

Jan Welzien

i. V. Jan Welzien
Leiter Technik

S. Richter

i. A. Stefan Richter
Leiter Qualitätssicherung

Präzise

Fördern und Dosieren



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung





Brauchen Sie ein zuverlässiges Gesamtkonzept zum Fördern und Dosieren von aggressiven, korrosiven oder auch sterilen Medien ohne Einschränkungen bei der Präzision?

Präzise Fördern und Dosieren

Die antriebsstarke PD Serie bietet Ihnen alle Optionen für Fördervolumina von 0,005 bis 3.900 ml pro Minute!

Höchste Sicherheit

- Motoren mit **Sanftanlauf** schützen Sie zuverlässig vor spritzendem Medium: Die Geschwindigkeit wird langsam auf die eingestellte Drehzahl hochgefahren
- Bei leicht entzündlicher Atmosphäre bieten Ihnen **funkenfreie Motoren** zusätzliche Sicherheit
- Ihre Sicherheit beim unbeaufsichtigten Dauerbetrieb: Um eine **Überhitzung kategorisch auszuschließen**, wird der Motor bei dauerhafter Überlastung abgeschaltet
- Hohe Beständigkeit gegen korrosive Dämpfe und Flüssigkeiten durch **Schutzklasse IP 55** verhindert Kurzschlüsse, Ausfälle und Unfälle
- Mit einem optionalen Fußschalter können Sie ausgewählte Modelle auch in einer geschlossenen Abzugshaube ansteuern
- Das geförderte Medium verbleibt im Schlauch, ein Kontakt mit dem Pumpenkopf oder mit Ihnen ist ausgeschlossen und erhöht dadurch Ihre Sicherheit

Bester Bedienkomfort

- Pumpen der PD Serie arbeiten **selbstansaugend** und kommen **ohne Dichtungen und Ventile** aus
- Analoge und digitale Schnittstellen erleichtern Ihnen die Bedienung zum Beispiel für den Anschluss der **Fernbedienung** oder der **PC Software**
- Erzielen Sie durch die hohe Präzision minimale Fördervolumina von nur 0,005 ml/min
- Benutzen Sie nur einen Antrieb für einen Standardpumpenkopf und wechseln Sie in Sekundenschnelle auf ein **Mehrkanalsystem**
- Selbst der Standardantrieb kann 2 **Pumpenköpfe gleichzeitig** aufnehmen – das erhöht Ihren Durchsatz
- Das **übersichtliche Bedienpanel** ist selbsterklärend und erleichtert Ihnen die Anwendung im Alltag
- Nutzen Sie den **Platz in Ihrem Labor** effizient: Die Pumpen sind zweifach stapelbar und können aufeinander gesetzt werden

Dauerhafte Kostenreduzierung

- Das abgedichtete Gehäuse schützt Ihre Pumpe zuverlässig vor Korrosion und erhöht die Nutzungsdauer im Schnitt auf über 10 Jahre bei gleichzeitiger **Reduzierung Ihrer Wartungs- und Reparaturkosten**
- **Wartungsfreie Motoren** vermeiden Ausfallzeiten und Reparaturkosten
- Durch das Doppelkanalsystem bei Standardpumpen **verringern Sie Ihre Investition**, verdoppeln Ihren Durchsatz und sparen dadurch wertvolle Arbeitszeit
- Komplettpakete mit Pumpenkopf und Schlauch verringern Ihre Suche nach kompatiblen Komponenten und sind zum **Vorzugspreis** erhältlich

Präzise Fördern und Dosieren



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Sicherheit beim unbeaufsichtigten

Dauerbetrieb: Der Motor wird bei dauerhafter Überlastung abgeschaltet, um eine Überhitzung von vornherein auszuschließen

Höchste Präzision selbst bei minimalen Fördermengen von 0,005 ml/min

Die Verwendung mit einer optionalen Fernbedienung erlaubt den **Betrieb hinter geschlossenen Abzugshauben** und erleichtert Abfüllvorgänge

Für Anwendungen in der Biologie: Pumpenkopf mit konvex geformten Rollen ermöglicht **zellschonendes Fördern**

Motoren mit Sanftanlauf **schützen zuverlässig vor spritzenden Medien:** Die Geschwindigkeit wird langsam auf die eingestellte Drehzahl hochgefahren



Präzise Fördern und Dosieren

Brauchen Sie ein zuverlässiges Gesamtkonzept zum Fördern und Dosieren von aggressiven, korrosiven oder auch sterilen Medien ohne Einschränkungen bei der Präzision?

Die antriebsstarke PD Serie bietet Ihnen alle Optionen für Fördervolumina von 0,005 bis 3.900 ml pro Minute!




IHRE VORTEILE

- Ob einfaches Fördern oder präzises Dosieren im Intervallbetrieb mit Pausen zum Befüllen von Wells – die PD Serie erfüllt all Ihre Anforderungen
- Das geförderte Medium verbleibt im Schlauch, ein Kontakt mit dem Pumpenkopf oder mit Ihnen ist ausgeschlossen und erhöht dadurch Ihre Sicherheit
- Die Pumpenköpfe müssen grundsätzlich nicht gereinigt werden, da sie kontaminationsfrei fördern – Sie ersparen sich dadurch eine Reinigung zwischen zwei Anwendungen
- Pumpen der PD Serie arbeiten selbstansaugend und kommen ohne Dichtungen und Ventile aus
- Wählen Sie aus zwischen 6 Antrieben, 3 Pumpenköpfen für den Einkanalbetrieb und weiteren 4 Mehrkanalpumpenköpfen für bis zu 12 Kassetten

Pumpenköpfe

Sie arbeiten in einem Spezialgebiet wie der Zellforschung und brauchen Förderpumpen, die organische Zellkulturen nicht beschädigen?

Die PD Serie bietet individuelle Lösungen außerhalb der Standardanwendungen!

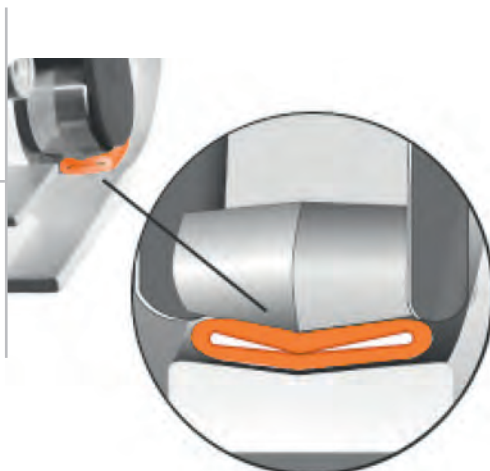

IHRE VORTEILE

- Nehmen Sie für die Zellforschung einen Pumpenkopf mit konvex geformten Rollen, der den Schlauch nicht in herkömmlicher Weise quetscht
- Organische Zellkulturen werden durch die Rolle nicht beschädigt und spielend leicht gefördert
- Wählen Sie das passende Schlauchmaterial für Ihre Anwendung - von FDA-zertifiziertem Material für Lebensmittel bis hin zu Material für organische Medien finden Sie alles für Ihren Gebrauch

➤ Pumpenantrieb PD 5001 / PD 5006

Für Standardanwendungen und zum Fördern

Mit allen genannten Vorteilen für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

- Die **Fördergeschwindigkeit** stellen Sie analog von 10 – 600 U/min ein – die Drehzahl wird selbst bei Lastwechseln **konstant gehalten**
- Dieses Modell fördert mit einer **Regelgenauigkeit von $\pm 2\%$**
- Wählen Sie die **Förderrichtung** aus: Im Uhrzeigersinn oder umgekehrte Drehrichtung



PD 5001

Für Fördermengen mit Einkanalpumpenköpfen von 0,8 – 790 ml/min

- Für einen niedrigen Drehzahlbereich von 10 – 120 U/min
- Dieser Pumpenantrieb kann mit allen Mehrkanalpumpenköpfen betrieben werden
- Die Fördermengen mit Mehrkanalpumpenköpfen liegen zwischen 0,005 und 320 ml/min
- Rüsten Sie Ihren vorhandenen Pumpenantrieb PD 5001 auf Mehrkanalbetrieb um: Ein Adapter mit der Bestellnummer 526-16000-00 macht das spielend einfach

PD 5001
Best. Nr. 523-50010-00

PD 5006

Für Fördermengen mit Einkanalpumpenköpfen von 3,6 – 3.900 ml/min

- Für einen hohen Drehzahlbereich von 50 – 600 U/min
- Dieser Pumpenantrieb ist nicht geeignet für den Betrieb mit Mehrkanalpumpenköpfen

PD 5006
Best. Nr. 523-50060-00

➤ Pumpenantrieb PD 5101 / PD 5106

Für Reproduzierbarkeit und zum Fördern

Mit allen genannten Vorteilen für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

- Steuern Sie die Drehzahl, die Drehrichtung und die Ein/Aus Funktion mittels analoger **Schnittstelle** für 0 – 10 V oder 4 – 20 mA
- Stellen Sie die Fördergeschwindigkeit analog von 5 bis 600 U/min ein. Eine elektronische Drehzahlregelung garantiert **konstante Drehzahlen** auch unter **Lastwechseln**
- Dieses Modell fördert mit einer **Regelgenauigkeit von $\pm 3,5\%$**
- Mit einem **optionalen Fußschalter** können Sie ausgewählte Modelle auch in einer **geschlossenen Abzugshaube** ansteuern
- Wählen Sie die **Förderrichtung** aus: Im Uhrzeigersinn oder umgekehrte Drehrichtung
- Mit Tastendruck auf die Maximaldrehzahl: **Beschleunigt** das **Befüllen** und **Entleeren** der Schläuche



PD 5101

Für Fördermengen mit Einkanalpumpenköpfen von 0,3 – 790 ml/min

- Für einen niedrigen Drehzahlbereich von 5 – 120 U/min
- Dieser Pumpenantrieb kann mit allen Mehrkanalpumpenköpfen betrieben werden
- Die Fördermengen mit Mehrkanalpumpenköpfen liegen zwischen 0,005 – 320 ml/min
- Rüsten Sie Ihren vorhandenen Pumpenantrieb PD 5101 auf Mehrkanalbetrieb um: Ein Adapter mit der Bestellnummer 526-16000-00 macht das spielend einfach

PD 5101
Best. Nr. 523-51010-00

PD 5106

Für Fördermengen mit Einkanalpumpenköpfen von 1,3 – 3.900 ml/min

- Für einen hohen Drehzahlbereich von 24 – 600 U/min
- Dieser Pumpenantrieb ist nicht geeignet für den Betrieb mit Mehrkanalpumpenköpfen

PD 5106
Best. Nr. 523-51060-00

➤ Pumpenantrieb PD 5201 / PD 5206

Für Reproduzierbarkeit und zum Fördern und Dosieren

Mit allen genannten Vorteilen für höchste Sicherheit, besten Bedienkomfort und dauerhafte Kostenreduzierung

- Steuern Sie die Drehzahl, die Drehrichtung und die Ein/Aus Funktion mittels analoger Schnittstelle für 0 – 10 V, 4 – 20 mA oder digital durch die eingebaute **RS 232 Schnittstelle**
- Mit einem **optionalen Fußschalter** können Sie ausgewählte Modelle auch in einer **geschlossenen Abzugshaube** ansteuern
- Dieses Modell fördert mit einer **Regelgenauigkeit von $\pm 0,5\%$** und garantiert **konstante Drehzahlen** auch unter **Lastwechseln**
- Mit Tastendruck auf die Maximaldrehzahl: **Beschleunigt** das **Befüllen** und **Entleeren** der Schläuche
- Wählen Sie die **Förderrichtung** aus: Im Uhrzeigersinn oder umgekehrte Drehrichtung
- **Einfache Kalibrierung** des Fördervolumens und der Fördermenge
- **Fördercharakteristik** der Pumpenköpfe ist **im Programm hinterlegt**. Digitale Anzeige erfolgt im Display
- **Folgende Prozessparameter sind frei auswählbar:**
 - Drehzahl
 - Schlauchdurchmesser
 - Fördermengenanzeige
 - Dosiervolumen
 - Intervalldosierung
 - Pausenzeiten
- Tasten zum **Einstellen** aller **Prozessparameter**



PD 5201

Für Fördermengen mit Einkanalpumpenköpfen von 0,3 – 790 ml/min

- Für einen niedrigen Drehzahlbereich von 5 – 120 U/min
- Dieser Pumpenantrieb kann mit allen Mehrkanalpumpenköpfen betrieben werden
- Die Fördermengen mit Mehrkanalpumpenköpfen liegen zwischen 0,005 – 320 ml/min
- Rüsten Sie Ihren vorhandenen Pumpenantrieb PD 5201 auf Mehrkanalbetrieb um: Ein Adapter mit der Bestellnummer 526-16000-00 macht das spielend einfach

PD 5201
Best. Nr. 523-52010-00

PD 5206

Für Fördermengen mit Einkanalpumpenköpfen von 1,3 – 3.900 ml/min

- Für einen hohen Drehzahlbereich von 24 – 600 U/min
- Dieser Pumpenantrieb ist nicht geeignet für den Betrieb mit Mehrkanalpumpenköpfen

PD 5206
Best. Nr. 523-52060-00

➤ Einkanalpumpenköpfe

SP quick

- Einfacher und schneller Schlauchwechsel
- Pulsationsarm durch 5 Rollen
- Abgedichtete Kugellager
- Rollen und Rollenträger aus Edelstahl
- Für Schlauchwandstärke (SWS) 1,6 mm oder 2,5 mm
- Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Fördermengen von 0,4 – 3.300 ml/min




SP quick
Best. Nr. 527-11100-00 (SWS 1,6 mm)
Best. Nr. 527-11300-00 (SWS 2,5 mm)

SP quick d (ohne Abbildung)
Best. Nr. 527-11120-00 (SWS 1,6 mm)
Best. Nr. 527-11320-00 (SWS 2,5 mm)

SP standard

- Für einfache Förderaufgaben
- Konvexe Rollen vermeiden eine Beschädigung organischer Zellkulturen
- Abgedichtete Kugellager
- Rollen aus Edelstahl, Rollenträger aus Polyamid
- Für Schlauchwandstärke (SWS) 1,6 mm oder 2,5 mm
- Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Fördermengen von 0,3 – 3.900 ml/min

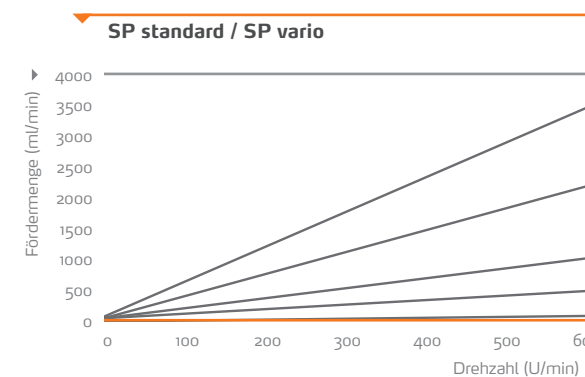

+



+




=

Einkanalpumpe

SP quick d

- Für den Anschluss von 2 Pumpenköpfen benötigen Sie die Kombination von SP quick und SP quick d
- Nur für die Pumpenantriebe PD 5001/5101/5201 geeignet

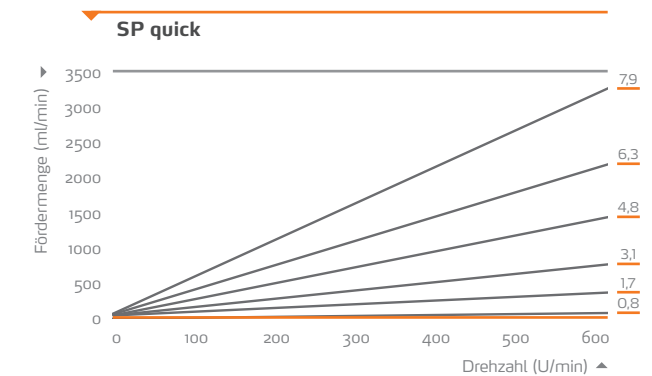

SP standard
Best. Nr. 523-43010-00 (SWS 1,6 mm)
Best. Nr. 523-43030-00 (SWS 2,5 mm)



SP vario
Best. Nr. 523-45110-00

SP vario

- Rotor mit verstellbarem Rollenabstand, zur Anpassung an die Schlauchwandstärke (SWS)
- Konvexe Rollen vermeiden eine Beschädigung organischer Zellkulturen
- Abgedichtete Kugellager
- Rollen aus Edelstahl, Rollenträger aus beschichtetem Aluminium
- Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Fördermengen von 0,3 – 3.900 ml/min

➤ Schlauchauswahltabelle für Einkanalpumpen

Schlauchgrößen

Durchmesser innen	(mm)	0,8	1,7	3,1	4,8	6,3
Durchmesser außen	(mm)	4	4,9	6,3	8	9,5
Schlauchwandstärke (SWS)	(mm)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	(bar)	0,7 / 1,7	0,7 / 1,7	0,7 / 1,7	0,5 / 1,5	0,5 / 1,5
Ansaughöhe	(mH ₂ O)	8,8	8,8	8,8	8,8	6,7

Mittelwert der Fördermenge in Kombination mit Pumpenkopf und Pumpenantrieb:

SP quick		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
PD 5106 / 5206	(ml/min)	2	33	8	186	26	653	59	1.529	89	2.072
PD 5006	(ml/min)	4	35	17	197	57	695	123	1.494	186	1.765
PD 5101 / 5201	(ml/min)	0,38	9	2	40	5	126	12	233	17	409
PD 5001	(ml/min)	0,83	9	3	41	11	134	25	292	36	413
SP standard / SP vario		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
PD 5106 / 5206	(ml/min)	1	26	11	257	43	1.017	105	2.549	167	4.056
PD 5006	(ml/min)	3	33	22	249	93	1.037	228	2.613	364	4.151
PD 5101 / 5201	(ml/min)	0,36	9	2	55	9	221	21	530	33	813
PD 5001	(ml/min)	0,65	8	5	61	19	223	44	519	75	861

Bestellnummern Schläuche (Meterware):

Silikon	525-33000-00	525-34000-00	525-36000-00	525-30027-00	525-30028-00
Viton®	525-53000-00	525-54000-00	525-56000-00	525-50027-00	525-50028-00
PharMed®	525-23000-00	525-24000-00	525-26000-00	525-20027-00	525-20028-00
Tygon® (Standard)	525-63000-00	525-64000-00	525-66000-00	525-60027-00	525-60028-00
Tygon® (Kohlenwasserstoff)	525-73000-00	525-74000-00	525-76000-00	525-70027-00	525-70028-00
Tygon® 2001 (Nahrungsmittel) nicht geeignet für PD 5006	525-83000-00	525-84000-00	525-86000-00	525-80027-00	525-80028-00

Schlauchgrößen

Durchmesser innen	(mm)	4,8	6,3	7,9
Durchmesser außen	(mm)	9,8	11,3	12,9
Schlauchwandstärke (SWS)	(mm)	2,5	2,5	2,5
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	(bar)	0,8 / 1,8	0,8 / 1,8	0,8 / 1,8
Ansaughöhe	(mH ₂ O)	8,8	8,8	8,8

Mittelwert der Fördermenge in Kombination mit Pumpenkopf und Pumpenantrieb:

SP quick		min.	max.	min.	max.	min.	max.
PD 5106 / 5206	(ml/min)	58	1.527	85	2.248	113	3.171
PD 5006	(ml/min)	123	1.580	180	2.411	257	3.436
PD 5101 / 5201	(ml/min)	12	299	18	435	25	630
PD 5001	(ml/min)	26	299	38	454	50	636
SP standard / SP vario		min.	max.	min.	max.		
PD 5106 / 5206	(ml/min)	92	2.390	139	3.821		
PD 5006	(ml/min)	203	2.426	313	3.782		
PD 5101 / 5201	(ml/min)	15	491	28	769		
PD 5001	(ml/min)	42	493	68	773		

Bestellnummern Schläuche (Meterware):

Silikon	525-35000-00	525-39000-00	525-32000-00
Viton®	525-55000-00	525-59000-00	525-52000-00
PharMed®	525-25000-00	525-29000-00	525-22000-00
Tygon® (Standard)	525-65000-00	525-69000-00	525-62000-00
Tygon® (Kohlenwasserstoff)	525-75000-00	525-79000-00	525-72000-00
Tygon® 2001 (Nahrungsmittel) nicht geeignet für PD 5006	525-85000-00	525-89000-00	-

➤ Mehrkanalpumpen

Folgende Antriebe sind für den Mehrkanalbetrieb geeignet:

PD 5001, PD 5101 und PD 5201

- Erhöhen Sie Ihren Durchsatz durch den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 12 Kanälen
- Dosieren oder Fördern Sie in jeder Kassette ein individuelles Fördervolumen in einem Arbeitsgang durch die Wahl von Schläuchen mit verschiedenen Durchmessern
- Sparen Sie Zeit: Der Schlauchwechsel erfolgt einfach und in Sekundenschnelle

- Neben Standardpumpenköpfen mit 4-Rollen-System haben Sie die Option auf ein 8-Rollen-System zur deutlichen Verringerung der Pulsation
- Auch im laufenden Betrieb können Sie beliebig viele Kassetten auswechseln, ohne den Vorgang zu unterbrechen
- Durch eine Schnappvorrichtung lassen sich alle Kassetten spielend leicht einsetzen
- Keine unnötigen Kosten: Rüsten Sie Ihren vorhandenen Pumpenantrieb mit einem Adapter für den Mehrkanalbetrieb auf



PD 5101 + Pumpenkopf C 4 + Cassette small

Mehrkanalpumpenköpfe



Masterflex Pumpenkopf

- Der Pumpenkopf besteht aus einem stabilen Rahmen aus eloxiertem Aluminium, einer Rotoreinheit aus Edelstahl und einem präzisionsgefertigten Schlauchbett für 4 Kanäle
- Dieses ist so konzipiert, dass Schläuche optimal komprimiert werden – ein Ein- oder Nachstellen ist nicht erforderlich
- Es können mehrere Pumpenköpfe parallel arbeiten

Best. Nr. 524-60430-00



Mehrkanalpumpenkopf C 12

- Kann mit 12 x Cassette small bestückt werden
- Durch integrierte Getriebeuntersetzung ideal zum Fördern kleinster Volumina
- 8 Rollen für pulsationsarme Förderung

Best. Nr. 524-81220-00



Mehrkanalpumpenkopf C 8

- Kann mit 8 x Cassette medium oder 4 x Cassette large bestückt werden
- Cassette medium und Cassette large sind kombinierbar
- 4-Rollen-System





Best. Nr. 524-40810-00



Mehrkanalpumpenkopf C 4

- Kann mit 4 x Cassette small bestückt werden
- 8 Rollen für pulsationsarme Förderung

Best. Nr. 524-80420-00

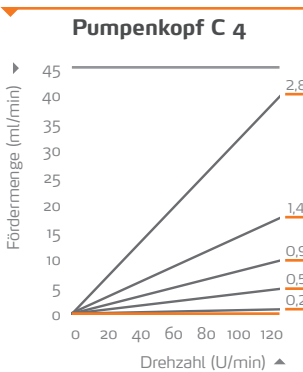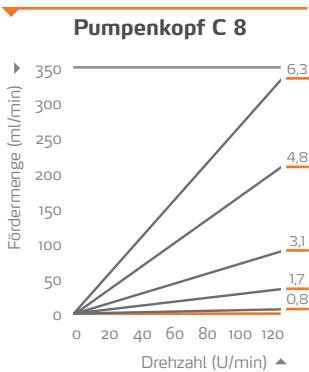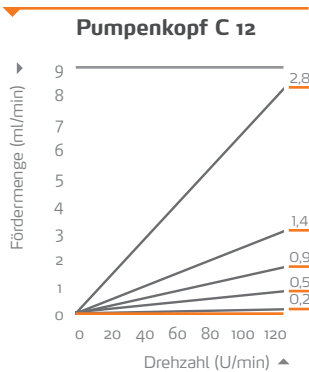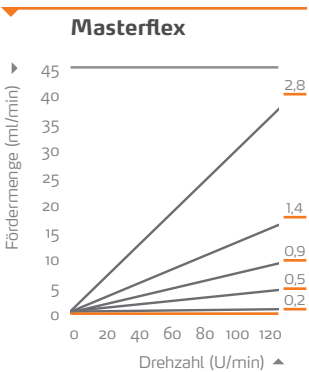

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf Wasser



+



+



+



+



= Mehrkanalpumpe

➤ Mehrkanalkassetten

- Justierung des Rollenanpressdruckes erfolgt mit Hilfe einer Einstellschraube
- Leicht wechselbare Kassetten auch während des Pumpvorganges
- In jede Kasette können unterschiedliche Schlauchmaterialien und -größen eingesetzt werden (siehe Seite 133)

Cassette small

- Fördermengen von 0,005 – 37 ml/min
- Geeignet für Schläuche mit 0,9 mm Schlauchwandstärke
- Erhältliche Schlauchdurchmesser: 0,2 / 0,5 / 0,9 / 1,4 und 2,8 mm
- Spezielles Schlauchstück mit 2 Stoppern (Länge: 40 cm) zum Einlegen in die Kasette notwendig
- Schlauchstopper übernehmen die Schlauchfixierung
- Mit Schlauchverbindern und Verlängerungsschläuchen besteht die Möglichkeit, die Schlauchlänge meterweise zu verlängern
- Bestückung:
Mehrkanalpumpenkopf C 4: Max. 4 x Cassette small
Mehrkanalpumpenkopf C 12: Max. 12 x Cassette small



Cassette medium

- Fördermengen von 0,3 – 25 ml/min
- Geeignet für Schläuche mit 1,6 mm Schlauchwandstärke
- Erhältliche Schlauchdurchmesser: 0,8 und 1,7 mm
Schläuche als Meterware erhältlich
- Bestückung:
Mehrkanalpumpenkopf C 8: Max. 8 x Cassette medium



Cassette large

- Fördermengen von 1 – 320 ml/min
- Geeignet für Schläuche mit 1,6 mm Schlauchwandstärke
- Erhältliche Schlauchdurchmesser: 1,7 / 3,1 / 4,8 und 6,4 mmm
Schläuche als Meterware erhältlich
- Bestückung:
Mehrkanalpumpenkopf C 8: Max. 4 x Cassette large



➤ Schlauchauswahltabelle für Mehrkanalpumpen

Schlauchgrößen		0,2	0,5	0,9	1,4	2,8
Durchmesser innen	(mm)	0,25	0,51	0,89	1,42	2,79
Durchmesser außen	(mm)	2,05	2,31	2,69	3,22	4,59
Schlauchwandstärke (SWS)	(mm)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	(bar)	0,5 / 1,5	0,5 / 1,5	0,5 / 1,5	0,5 / 1,5	0,5 / 1,5
Ansaughöhe	(mH ₂ O)	7	7	7	7	7

Mittelwert der Fördermenge in Kombination mit Kasette, Pumpenkopf und Pumpenantrieb:

PD 5101 / PD 5201		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Max. Anz. Kassetten
Cassette small / Pumpenkopf C 12	(ml/min)	0,005	0,11	0,01	0,54	0,03	1	0,10	3	0,29	9	12
Cassette small / Pumpenkopf C 4	(ml/min)	0,02	0,49	0,08	2	0,24	6	0,60	14	2	36	4
PD 5001		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
Cassette small / Pumpenkopf C 12	(ml/min)	0,005	0,11	0,02	0,42	0,10	1	0,23	3	0,69	8	12
Cassette small / Pumpenkopf C 4	(ml/min)	0,04	0,53	0,17	2	0,57	6	1	15	4	37	4

Bestellnummern Schläuche:

Silikon	2-Stopper-Schlauch für Cassette small			525-30014-00	525-30015-00	525-30016-00
	Verlängerungsschlauch (Meterware)			525-30024-00	525-30025-00	525-30026-00
Viton®	2-Stopper-Schlauch für Cassette small			525-50014-00	525-50015-00	525-50016-00
	Verlängerungsschlauch (Meterware)			525-50024-00	525-50025-00	525-50026-00
PharMed®	2-Stopper-Schlauch für Cassette small	525-20012-00	525-20013-00	525-20014-00	525-20015-00	525-20016-00
	Verlängerungsschlauch (Meterware)	525-20022-00	525-20023-00	525-20024-00	525-20025-00	525-20026-00
Tygon® (Standard)	2-Stopper-Schlauch für Cassette small	525-60012-00	525-60013-00	525-60014-00	525-60015-00	525-60016-00
	Verlängerungsschlauch (Meterware)	525-60022-00	525-60023-00	525-60024-00	525-60025-00	525-60026-00
Schlauchverbinder (PTFE)				526-22000-00		

Schlauchgrößen		0,8	1,7	3,1	4,8	6,3
Durchmesser innen	(mm)	0,8	1,7	3,1	4,8	6,3
Durchmesser außen	(mm)	4	4,9	6,3	8	9,5
Schlauchwandstärke (SWS)	(mm)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Max. Betriebsdruck (Dauer / Kurzzeit)	(bar)	0,7 / 1,7	0,7 / 1,7	0,7 / 1,7	0,7 / 1,7	0,5 / 1,5
Ansaughöhe	(mH ₂ O)	8,8	8,8	8,8	8,8	6,7

Mittelwert der Fördermenge in Kombination mit Kasette, Pumpenkopf und Pumpenantrieb:

PD 5101 / PD 5201		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	Max. Anz. Kassetten
Cassette medium / Pumpenkopf C 8	(ml/min)	0,24	7	1	26							8
Cassette large / Pumpenkopf C 8	(ml/min)			1	27	4	90	8	192	11	329	4
PD 5001		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
Cassette medium / Pumpenkopf C 8	(ml/min)	0,55	6,97	2,17	27							8
Cassette large / Pumpenkopf C 8	(ml/min)			2	27	7	85	18	246	26	364	4

Bestellnummern Schläuche:

Silikon		525-33000-00	525-34000-00	525-36000-00	525-30027-00	525-30028-00
Viton®		525-53000-00	525-54000-00	525-56000-00	525-50027-00	525-50028-00
PharMed®		525-23000-00	525-24000-00	525-26000-00	525-20027-00	525-20028-00
Tygon® (Standard)		525-63000-00	525-64000-00	525-66000-00	525-60027-00	525-60028-00
Tygon® (Kohlenwasserstoff)		525-73000-00	525-74000-00	525-76000-00	525-70027-00	525-70028-00
Tygon® 2001 (Nahrungsmittel)		525-83000-00	525-84000-00	525-86000-00	525-80027-00	525-80028-00

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf Tygon (Standard) Schläuche und das Medium Wasser

Schlaucheigenschaften

Tygon® Standard

- **Anwendung:** Allgemeine Anwendungen im Labor
- **Eigenschaften:**
 - Nicht toxisch, nicht oxidierend
 - Gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und anorganischen Medien
 - Sehr geringe Gasdurchlässigkeit, hohe Lebensdauer
- **Material:** Thermoplastisches Weich-PVC, transparent
- **Entspricht den Normen:** FDA (21 CFR 177.2601) und GLP
- **Temperaturbereich:** -50 bis +75 °C
- **Sterilisation:** Autoklavierbar bei 120 °C, 1 bar bei 30 min (nimmt eine milchige Färbung an) oder mit Ethylenoxid
- **Einschränkung:** Löstsen der Weichmacher möglich



- **Anwendung bei:**

Säuren:	gut
Laugen:	gut
Lösungsmitteln:	nicht geeignet
Druck:	gut
Vakuum:	gut
viskosen Medien:	ausgezeichnet
sterilen Medien:	bedingt



Tygon® 2001 für Nahrungsmittel

- **Anwendung:** Nahrungsmittelindustrie, ideal geeignet für stark fetthaltige Produkte
- **Eigenschaften:**
 - Extrem chemikalienbeständig, z. B. für den Einsatz polarer Lösungsmittel geeignet
 - Enthält keine Weichmacher und Öle
 - Besonders lange Lebensdauer
 - Transparenter Schlauch für eine verbesserte Sichtprüfung
 - Extrem biegsam
- **Material:** Thermoplastik
- **Entspricht den Normen:** USP Klasse VI, FDA (21 CFR 177.2600) und GLP
- **Temperaturbereich:** -78 °C bis +71 °C
- **Sterilisation:** Autoklavierbar 30 min bei 1 bar, durch Strahlung oder Ethylenoxid sterilisierbar
- **Einschränkung:** Nicht geeignet für Pumpenantrieb PD 5006

- **Anwendung bei:**

Säuren:	sehr gut
Laugen:	sehr gut
Lösungsmitteln:	gut
Druck:	gut
Vakuum:	gut
viskosen Medien:	gut
sterilen Medien:	gut



Tygon® für Kohlenwasserstoffe

- **Anwendung:** Speziell für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate
- **Eigenschaften:**
 - Ideal für Benzin, Kerosin, Kraft- und Schmierstoffe, Heizöl, Schneidflüssigkeiten und Kühlmittel auf Glykollbasis
 - Ozon- und UV-beständig
- **Material:** Thermoplastisches Weich-PVC, gelb durchscheinend
- **Entspricht den Normen:** GLP
- **Temperaturbereich:** -40 bis +75 °C
- **Sterilisation:** Nicht zu empfehlen
- **Einschränkung:** Nicht geeignet für starke Basen und Säuren, sowie Nahrungsmittel und Pharmazeutik

- **Anwendung bei:**

Säuren:	gut
Laugen:	gut
Lösungsmitteln:	bedingt
Druck:	gut
Vakuum:	gut
viskosen Medien:	ausgezeichnet
sterilen Medien:	bedingt

PharMed®

- **Anwendung:** Ideal für Medizin, Labor und Forschung
- **Eigenschaften:**
 - Hohe Dauerbiegewechselfestigkeit
 - Nicht toxisch, biologisch verträglich
 - Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
 - Für Säuren und Laugen gut geeignet
- **Material:** Thermoplastisches Elastomer auf Polypropylen-Basis mit Weichmachern, undurchsichtig beige
- **Entspricht den Normen:** FDA (21 CFR 177.2600), USP Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea
- **Temperaturbereich:** -60 bis +135 °C
- **Sterilisation:** Autoklavierbar oder mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar
- **Einschränkung:** Löstsen von Zusätzen möglich



- **Anwendung bei:**

Säuren:	gut
Laugen:	gut
Lösungsmitteln:	nicht geeignet
Druck:	gut
Vakuum:	ausgezeichnet
viskosen Medien:	gut
sterilen Medien:	ausgezeichnet



Silikon

- **Anwendung bei:**

Säuren:	bedingt
Laugen:	bedingt
Lösungsmitteln:	nicht geeignet
Druck:	befriedigend
Vakuum:	gut
viskosen Medien:	befriedigend
sterilen Medien:	ausgezeichnet

- **Anwendung:** Platinveredelter Silikon Schlauch für den Einsatz in der Pharmazie & Biologie
- **Eigenschaften:**
 - Extrem glatte Innenoberfläche verhindert ein mögliches Bakterienwachstum
 - Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption
 - Beste Durchflusseigenschaften, hohe Temperaturstabilität
 - Absolut inert, weichmacherfrei
- **Material:** Polydimethylsiloxan mit Kieselerde- und Silikonzusätzen; ausgezeichnete Anpressdruckbeständigkeit; durchscheinend weiß
- **Entspricht den Normen:** USP Klasse VI, FDA, GLP und NSF
- **Temperaturbereich:** -80 bis +200 °C
- **Sterilisation:** Autoklavierbar 30 min bei 1 bar oder mit Strahlung sterilisierbar
- **Einschränkung:** Ungeeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünnte Natronlauge; relativ hohe Gasdurchlässigkeit



Viton®

- **Anwendung:** Ausgezeichnete Säurebeständigkeit bei hohen Temperaturen
- **Eigenschaften:**
 - Geringe Gasdurchlässigkeit
 - Beständig gegen Lösungsmittel und korrosive Medien
- **Material:** Fluorkarbonkautschuk, thermogeformt Viton B (67 % fluoriert); undurchsichtig schwarz
- **Entspricht den Normen:** GLP
- **Temperaturbereich:** -30 bis +205 °C
- **Sterilisation:** 16 Std. bei +250 °C mit Warmluftzirkulation empfohlen
- **Einschränkung:** Begrenzte Lebensdauer

- **Anwendung bei:**

Säuren:	ausgezeichnet
Laugen:	ausgezeichnet
Lösungsmitteln:	unterschiedlich; Versuch zu empfehlen
Druck:	gut
Vakuum:	gut
viskosen Medien:	gut
sterilen Medien:	befriedigend

➤ Schlauchbeständigkeit

	Chemikalie	P	S	T	TU	TK	V
A	Acetaldehyd	D	C	D	D	D	D
	Aceton	D	C	D	D	C	D
	Acetonitril	D	D	D	D	B	D
	Acetylbromid	C	D	D	D	C	–
	Acetylchlorid	C	D	D	D	C	A
	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	D	D	D	B	D	–
	Aluminiumchlorid, 53 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Aluminiumsalze	A	A	A	A	A	–
	Aluminiumsulfat, 50 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Ameisensäure, 25 % i.W.	A	A	A	C	A	D
	Ammoniak, wasserfrei	A	D	B	B	B	D
	Ammoniumacetat, 45 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Ammoniumcarbonat, 20 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Ammoniumchlorid	A	C	A	A	A	A
	Ammoniumhydroxid, 30 % i.W.	A	D	A	C	A	A
	Ammoniumnitrat	A	C	A	A	A	–
	Ammoniumphosphat	A	A	A	A	A	–
	Ammoniumsulfat	A	A	A	A	A	A
	Amylacetat	B	D	D	D	D	D
	Amylalkohol	D	D	D	A	A	A
B	Amylchlorid	C	D	D	D	D	–
	Anilin	C	D	D	D	D	–
	Anilinhydrochlorid	C	D	D	D	D	D
	aromatische Kohlenwasserstoffe	D	D	D	D	D	–
	Arsensalze	A	A	A	A	A	–
	Bariumsalze	A	A	A	A	A	–
	Benzaldehyd	D	C	D	D	C	D
	Benzol	D	D	D	D	–	–
	Benzolsulfonsäure	D	D	D	D	D	A
	Blausäure	A	A	A	A	A	A
	Bleiacetat, 35 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Borsäure, 4 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Brom, (wasserfreie Flüssigkeit)	D	D	D	D	D	A
	Bromwasserstoffsäure, 20 – 50 %	D	D	A	A	A	A
	Butan	A	A	A	A	B	A
	Butanol (Butylalkohol)	D	D	D	D	A	A
	Buttersäure	B	D	D	D	D	–
	Butylacetat	B	D	D	D	D	D

	Chemikalie	P	S	T	TU	TK	V
C	Calciumoxid	A	A	A	A	A	–
	Chlorbenzol, (Mono, Di, Tri)	D	D	D	D	C	A
	Chloressigsäure 20 % i.W.	B	A	A	D	A	D
	Chlorgas, naß	D	D	B	B	C	B
	Chlorobromomethan	B	D	D	D	–	A
	Chloroform	D	D	D	D	C	A
	Chlorosulfonsäure	D	D	D	D	D	D
	Chromsäure, 20 % i.W.	A	D	B	C	B	A
	Chromsäure, 50 % i.W.	C	D	C	D	–	–
	Cyclohexan	D	D	D	C	C	A
D	Cyclohexanon	D	D	D	D	C	D
	Diesel	D	D	D	B	–	–
	Dimethylformamid	B	A	D	D	A	D
	Eisen II Chlorid 40 % i.W.	A	A	A	A	A	B
	Eisen II Sulfate 5 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Eisen III Chlorid 43 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Eisen III Sulfate 5 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Essigsäure, 10 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Essigsäure, (100 % Eisessig)	B	D	D	D	–	–
	Essigsäureanhydrid	A	A	D	D	A	D
E	Ethanol	A	B	D	B	A	A
	Ether	C	D	D	C	D	–
	Ethlenedichlorid	C	D	D	D	D	B
	Ethylacetat	B	D	D	D	D	D
	Ethylamin	D	C	D	D	B	–
	Ethylbromid	D	D	D	D	C	–
	Ethylchlorid	C	D	D	D	D	A
	Ethylenchlorhydrin	A	B	D	B	A	A
	Ethylenglycol	A	A	A	A	A	A
	Ethylenoxid	A	A	A	A	A	D
F	Fettsäuren	C	B	D	B	A	–
	Fluoroboratesalze	A	–	A	A	A	–
	Fluorwasserstoffsäure 50 %	D	D	B	D	A	A
	Fluorwasserstoffsäure, 10 % i.W.	D	D	A	A	A	B
	Formaldehyd, 37 % i.W.	D	C	D	D	C	D
	Freon 11	A	A	A	A	–	–
	Fruchtsaft	A	A	A	A	A	A
	Gerbsäure, 75 % i.W.	B	A	B	D	A	–
	Glyzerin	A	A	A	A	A	A

	Chemikalie	P	S	T	TU	TK	V
H/J	Harnsäure	A	A	A	C	A	–
	Harnstoff, 20 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Hypochlorigesäure, 25 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Iodwasserstoff, 7 % i.W.	B	B	A	A	A	–
	Jodlösungen	A	C	A	A	A	–
K/L	Kaliumcyanid, 33 % i.W.	A	A	A	A	–	–
	Kaliumhydroxid, < 10 % i.W.	A	A	A	D	–	B
	Kaliumiodid, 56 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Kaliumkarbonat, 55 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Kerosin	D	D	D	B	D	A
	Ketone	D	D	D	D	C	–
	Kohlenstoffdisulfid	D	D	D	D	D	–
	Königswasser (80 % HCl, 20 % HNO ₃)	D	D	D	D	A	–
	Kupfer II Chlorid 40 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Leichtbenzin	D	D	D	B	D	A
M	Magnesiumchlorid, 35 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Magnesiumsulfat, 25 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Mangansalze	A	A	A	A	A	–
	Methan	A	–	A	A	A	A
	Methanol	A	B	D	B	A	D
	Methyl Ethyl Ketone	D	D	D	D	C	D
	Milchsäure, 10 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Milchsäure, 85 % i.W.	B	D	D	D	–	–
	Mineralöl	D	D	C	A	D	A
	Monoethanolamine	C	D	D	D	D	D
N	Naphthalin	D	D	D	D	D	A
	Natriumbikarbonat, 7 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Natriumbisulfat	A	–	A	A	A	–
	Natriumborat	A	A	A	A	A	A
	Natriumdithionit	A	–	A	A	–	–
	Natriumferrocyanid	A	A	A	D	–	–
	Natriumhydroxid, 10 – 15 % i.W.	A	A	A	D	A	B
	Natriumhydroxid, 30 – 40 % i.W.	A	C	C	D	A	B
	Natriumkarbonat, 7 % i.W.	A	A	A	A	A	B
	Natriumnitrat, 3,5 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Natriumsulfat, 3,6 % i.W.	A	A	A	A	–	A
	Natriumsulfid, 13 % i.W.	A	A	A	A	A	–
	Nickelsalze	A	A	A	A	A	–
	Nitrobenzol	D	D	D	D	C	–

Schläuche:
P = PharMed®
S = Silikon
T = Tygon® Standard
TU = Tygon® Kohlenwasserstoffe
TK = Tygon® 2001 Nahrungsmittel
V = Viton®

Beständigkeit:
A = sehr gut
B = gut
C = befriedigend
D = nicht geeignet
– = nicht getestet

Bitte beachten:
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Der Anwender muss sicherstellen, dass sich die Schläuche für den gewünschten Einsatz eignen; evtl. müssen entsprechende Tests durchgeführt werden.

	Chemikalie	P	S	T	TU	TK	V
O	Öle, tierische	C	A	D	A	B	–
	Ölsäure	C	B	D	B	D	B
	Perchlorethylen	C	D	D	D	D	A
	Perchlorsäure, 67 % i.W.	A	D	C	D	A	A
	Phenol, 91 % i.W.	A	B	D	C	A	–
P	Phosphorsäure, 25 % i.W.	A	D	A	A	A	A
	Phthalsäure, 9 % i.Alk.	A	B	D	C	B	–
	Propanol (Propylalkohol)	C	A	D	D	A	B
	Pyridin	C	D	D	D	C	D
	Quecksilbersalze	A	A	A	A	A	–
Q/S	Salpetersäure, 10 % i.W.	A	C	A	D	A	A
	Salpetersäure, 35 % i.W.	A	D	A	D	A	A
	Salpetersäure, 68 – 71 % i.W.	D	D	D	D	A	–
	salpetrige Säure, 10 % i.W.	A	B	A	C	A	–
	Salzsäure, 10 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Salzsäure, 37 % i.W.	B	D	A	D	A	B
	schwefelige Säure	A	A	A	A	A	A
	Schwefelsäure, 10 % i.W.	A	A	A	B	A	A
	Schwefelsäure, 30 % i.W.	A	B	A	B	A	A
	Schwefelsäure, 95 – 98 % i.W.	D	D	D	D	C	A
T	Seifenlauge	B	A	A	A	A	A
	Silbernitrat, 55 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Silikonöl	C	D	B	A	B	A
	Stearinsäure, 5 % i.Alk.	C	D	D	B	B	–
	Terpentine	D	D	D	B	A	A
	Tetrachlorkohlenstoff	D	D	D	D	D	A
	Toluol	D	D	D	D	C	A
	Trichloressigsäure, 90 % i.W.	B	A	A	D	A	C
	Trichlorethylen	C	D	D	D	C	A
	Trinatriumphosphat	A	A	A	A	A	A
W/Z	Wasserstoffperoxid, 10 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Wasserstoffperoxid, 90 % i.W.	B	C	D	D	B	–
	Weinsäure, 56 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Xylol	D	D	D	D	C	B
	Zinkchlorid, 80 % i.W.	A	A	A	A	A	A
	Zinnsalze	A	A	A	A	A	–

➤ **Zubehör**



Fußschalter

Zum Start des Förder- & Dosiervorganges für PD 5101 / PD 5106 und PD 5201 / PD 5206
Best. Nr. 526-14100-00



Adapter für Mehrkanalpumpenköpfe

Verbindung zwischen Pumpenantrieb und Mehrkanalpumpenkopf
Best. Nr. 526-16000-00



Schlauchverbinder

Für Schlauchgröße 0,2 - 2,8 mm
Best. Nr. 526-22000-00

➤ **PD Plug & Play Pakete**

Für Standardanforderungen

PD Plug & Play 5001 SP quick

Fördermenge von 11 bis 130 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5001
 - Komplett mit Pumpenkopf SP quick 1,6
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 3,1 mm)
- Best. Nr. 523-50019-00**

PD Plug & Play 5006 SP quick

Fördermenge von 57 bis 695 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5006
 - Komplett mit Pumpenkopf SP quick 1,6
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 3,1 mm)
- Best. Nr. 523-50069-00**

PD Plug & Play 5006 SP standard

Fördermenge von 313 bis 3.800 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5006
 - Komplett mit Pumpenkopf SP standard 2,5
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 3,1 mm)
- Best. Nr. 523-50068-00**

Für hohe Anforderungen

PD Plug & Play 5101 SP quick

Fördermenge von 0,3 bis 9,0 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5101
 - Komplett mit Pumpenkopf SP quick 1,6
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 0,8 mm)
- Best. Nr. 523-51019-00**

PD Plug & Play 5106 SP quick

Fördermenge von 26 bis 650 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5106
 - Komplett mit Pumpenkopf SP quick 1,6
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 3,1 mm)
- Best. Nr. 523-51069-00**

PD Plug & Play 5106 SP standard

Fördermenge von 140 bis 3.800 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5106
 - Komplett mit Pumpenkopf SP standard 2,5
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 6,3 mm)
- Best. Nr. 523-51068-00**

Für höchste Anforderungen

PD Plug & Play 5201 SP quick

Fördermenge von 0,3 bis 9,0 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5201
 - Komplett mit Pumpenkopf SP quick 1,6
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 0,8 mm)
 - Min. Dosiervolumen: 0,1 ml
- Best. Nr. 523-52019-00**

PD Plug & Play 5206 SP quick

Fördermenge von 26 bis 650 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5206
 - Komplett mit Pumpenkopf SP quick 1,6
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 3,1 mm)
 - Min. Dosiervolumen: 5,9 ml
- Best. Nr. 523-52069-00**

PD Plug & Play 5201 SP quick 2

Fördermenge von 5 bis 127 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5201
 - Komplett mit Pumpenkopf SP quick 1,6
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 3,1 mm)
 - Min. Dosiervolumen: 1,2 ml
- Best. Nr. 523-52019-10**

PD Plug & Play 5206 SP standard

Fördermenge von 140 bis 3.800 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5206
 - Komplett mit Pumpenkopf SP standard 2,5
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 6,3 mm)
 - Min. Dosiervolumen: 33,4 ml
- Best. Nr. 523-52068-00**

PD Plug & Play 5206 SP quick 2

Fördermenge von 90 bis 2.100 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5206
 - Komplett mit Pumpenkopf SP quick 1,6
 - Schlauchmaterial je 1 m Tygon- (Standard) und Silikonschlauch (Ø innen 6,3 mm)
 - Min. Dosiervolumen: 20,5 ml
- Best. Nr. 523-52069-20**

Im Mehrkanalbetrieb

PD Plug & Play 5201 MC C 4

Fördermenge von 0,1 bis 2,0 ml/min

- Pumpenantrieb PD 5201 inklusive Adapter
 - Mehrkanalpumpenkopf C 4
 - 4 x Cassette small
 - Schlauchmaterial:
 - 4 Stück 2-Stopper-Schläuche Tygon (Standard) (Ø innen 0,5 mm)
 - 2 Meter Verlängerungsschlauch Tygon (Standard) (Ø innen 0,5 mm)
 - 8 Stück Schlauchverbinder
 - Min. Dosiervolumen: 23 ml
- Best. Nr. 523-52017-00**

Alle Fördermengenangaben beziehen sich auf Wasser

Technische Daten – Peristaltikpumpen

Modell	PD 5001	PD 5006	PD 5101	PD 5106	PD 5201	PD 5206
Bestellnummer (230 V)	523-50010-00	523-50060-00	523-51010-00	523-51060-00	523-52010-00	523-52060-00
Bestellnummer inkl. Mehrkanaladapter (230 V)	523-50013-00	–	523-51013-00	–	523-52013-00	–
Fördermengen Einkanalpumpen (ml)	0,8 – 790	3,6 – 3.900	0,3 – 790	1,3 – 3.900	0,3 – 790	1,3 – 3.900
Fördermengen Mehrkanalpumpen (ml)	0,005 – 320	–	0,005 – 320	–	0,005 – 320	–
Fördermengengenauigkeit* (%)	± 5	± 5	± 3,5	± 3,5	± 1	± 2
Drehzahlbereich (U/min)	10 – 120	50 – 600	5 – 120	24 – 600	5 – 120	24 – 600
Drehzahleinstellung	Skala	Skala	Skala	Skala	Digital	Digital
Elektronische Drehzahlregelung	Analog	Analog	Digital	Digital	Digital	Digital
Regelgenauigkeit Motor (%)	± 2	± 2	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5
Drehrichtung umschaltbar	rechts / links	rechts / links	rechts / links	rechts / links	rechts / links	rechts / links
Motorleistung (W)	71	71	100	100	100	100
Anschlussleistung (W)	150	150	140	140	140	140
Schnittstelle analog	–	–	für Drehzahl 0 – 10 V / 4 – 20 mA Drehrichtung Start/Stop	für Drehzahl 0 – 10 V / 4 – 20 mA Drehrichtung Start/Stop	für Drehzahl 0 – 10 V / 4 – 20 mA Drehrichtung Start/Stop	für Drehzahl 0 – 10 V / 4 – 20 mA Drehrichtung Start/Stop
Schnittstelle digital	–	–	–	–	RS 232	RS 232
Fördermengenanzeige	–	–	–	–	Digital	Digital
Volumendosierung** (ml)	–	–	–	–	0,1 – 9.999	0,1 – 9.999
Intervalldosierung** (ml)	–	–	–	–	0,1 – 9.999 bei Pausen 0,1 sec – 750 h	0,1 – 9.999 bei Pausen 0,1 sec – 750 h
Sanftanlauf	–	–	–	–	ja	ja
Elektronische Bremse	–	–	–	–	ja	ja
Anschluss für Fußschalter	–	–	ja	ja	ja	ja
Dauerbetrieb (Stunden/Tage)	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Motorschutz***	ÜHS	ÜHS	elektr. Strombegrenzung und ÜHS	elektr. Strombegrenzung und ÜHS	elektr. Strombegrenzung und ÜHS	elektr. Strombegrenzung und ÜHS
Gewicht (kg)	6,8	6,2	8,2	7,6	8,3	7,7
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 30	IP 30	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Zulässige Umgebungsbedingungen (°C)	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit	0 – 40 bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (B x H x T) (mm)	166 x 225 x 256	166 x 225 x 256	166 x 225 x 256	166 x 225 x 256	166 x 225 x 256	166 x 225 x 256

* Fördermengengenauigkeit bezogen auf Wasser ohne Gegendruck
** Bei Schlauchgröße 0,2; 0,5; 0,9 Angaben in µl
*** ÜHS: Überhitzungsschutz

Standard Anschlussspannung: 230 V - Andere Anschlussspannungen auf Anfrage



Zertifikat

Bescheinigung für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb von Peristaltikpumpen der PD Serie

Die Peristaltikpumpen der PD Serie sind mit Übertemperatur-Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 61010-1:2001 und DIN EN 61010-2-010:2003 und somit für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet.

Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung und die Arbeitsweise nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin, der Laborrichtlinie, der Unfallverhütungsvorschriften und der Gefahrstoffverordnung.


Schwabach, im Januar 2013

Jan Welzien

i. V. Jan Welzien
Leiter Technik

S. Richter

i. A. Stefan Richter
Leiter Qualitätssicherung

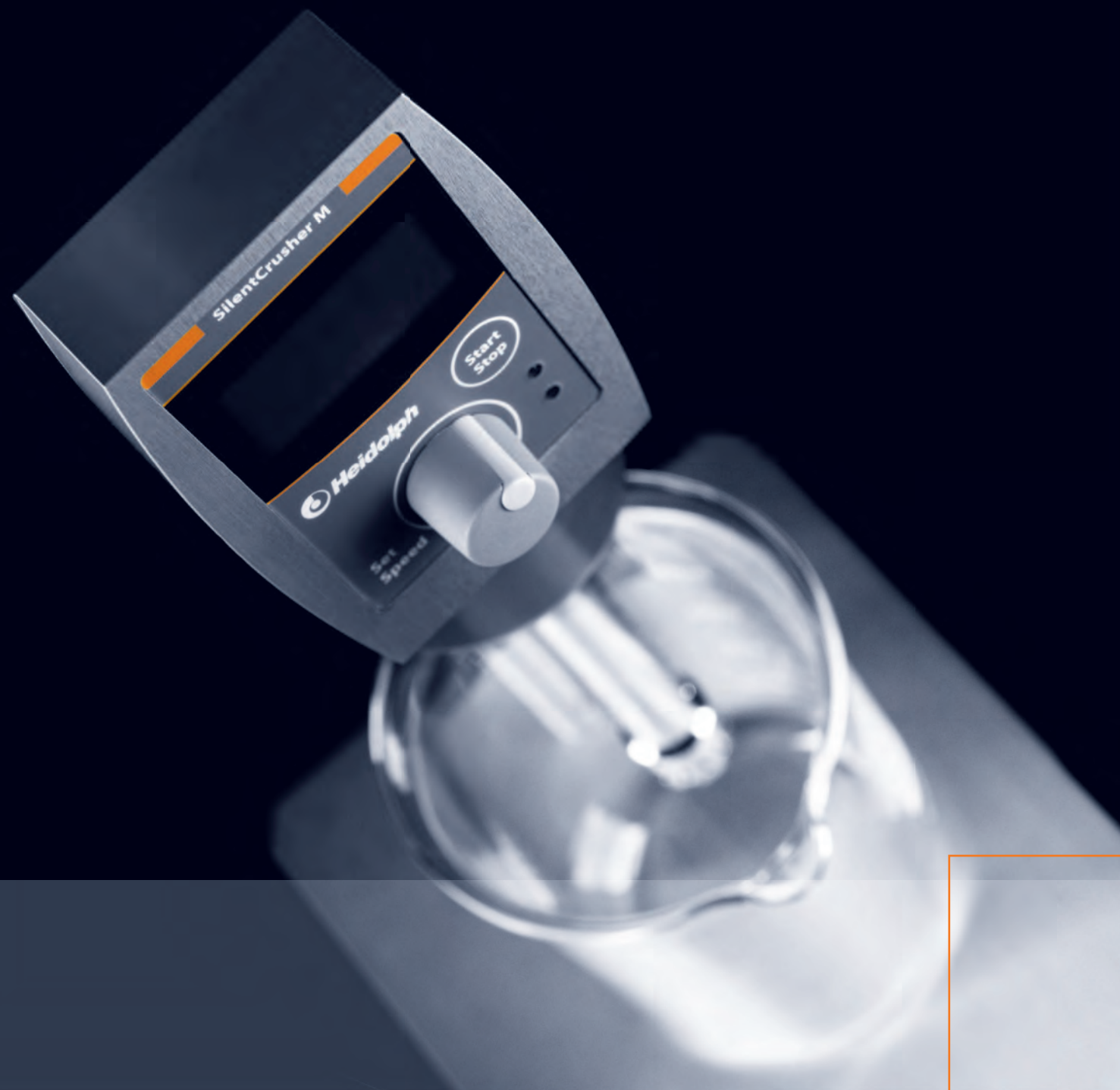

Leise Dispergieren



Höchste Sicherheit

Bester Bedienkomfort

Dauerhafte Kostenreduzierung



Sind Sie beim Dispergieren einem gesundheitlich bedenklichen Lärmpegel ausgesetzt oder müssen Sie sogar einen Gehörschutz tragen?

Leise Dispergieren

Die SilentCrusher Dispergierer sorgen für ein ruhiges Arbeitsumfeld, und das bei einer einmalig hohen Drehzahl!

Leise Dispergieren

Höchste Sicherheit | Bester Bedienkomfort | Dauerhafte Kostenreduzierung

3 Jahre Garantie und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 10 Jahren machen Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition.

Dieser einzigartige Magnetantrieb arbeitet ohne Gebläse und ist daher geeignet für partikelarme Räume

Der verschleißfreie Magnetantrieb garantiert jahrelanges wartungsfreies Arbeiten ohne Ausfallzeiten und Ersatzteilkosten

Der kupplungsfreie Antrieb gewährleistet einen geräuscharmen Betrieb



SilentCrusher sind mit Drehzahlen bis zu 75.000 U/min die mit Abstand schnellsten und zugleich leisesten Dispergierer der Welt

Deutlich reduzierte Prozesszeiten durch eine einmalig hohe Drehzahl

Arbeiten ohne Gehörschutz und trotzdem ohne Risiken für Ihre Gesundheit

➤ **Leise Dispergieren**

Ihre erste Wahl für das Dispergieren von Gewebeproben in der Biotechnologie, Probenvorbereitung in der Medizin, enzymatische Behandlung in der Lebensmittelindustrie und zahlreiche andere Anwendungen im Pharma-, Kosmetik-, Farben- und Lackbereich sowie in der petrochemischen Industrie



- Die SilentCrusher Modelle sorgen für ein ruhiges Arbeitsumfeld, und das bei einer einmalig hohen Drehzahl
- Diese einzigartige Kombination wird durch ein elektromagnetisches Feld möglich, wodurch ein konventioneller und anfälliger Elektromotor überflüssig wird

IHRE VORTEILE

- Der verschleißfreie Antrieb garantiert Ihnen ein **jahrelanges, wartungsfreies Arbeiten**. Dadurch **entfallen Ausfallzeiten** sowie **Wartungs- und Ersatzteilkosten komplett**
- Arbeiten Sie ohne Gehörschutz und trotzdem **ohne Risiken für Ihre Gesundheit**
- Der kupplungsfreie Antrieb gewährleistet Ihnen einen **geräuscharmen Betrieb**
- Durch den einzigartigen elektromagnetischen Antrieb ohne Lüfter und Gebläse eignen sich die SilentCrusher Modelle zum **Einsatz in partikelarmen Räumen**

SilentCrusher S

Kleines Modell für die Mikrobiologie

- Der SilentCrusher S ist mit einer Drehzahl bis 75.000 U/min mit Abstand der schnellste und zugleich leiseste Dispergierer der Welt
- Um Ihre Probe vor thermischen Schäden zu schützen, wird der Dispergiervorgang nach 90 Sekunden automatisch beendet
- Die intuitive Bedienung wird Sie begeistern: Sobald das Reagenzgefäß in den Antriebskopf eingeführt wird, beginnt der Dispergiervorgang automatisch
- Im Bedarfsfall können Sie Ihre Probe auch mit Eis kühlen. Im Lieferumfang sind bereits 3 Niveauscheiben zur Positionierung des Kühlgefäßes enthalten
- Homogenisieren und suspensieren Sie kleinste Proben von 0,8 bis 10 ml und viskose Lösungen bis 5.000 mPa s
- Wählen Sie aus 3 verschiedenen sterilisierbaren Werkzeugen: Von 3 bis 7 mm Durchmesser ist für Ihre spezielle Applikation sicher das richtige Werkzeug dabei

Best. Nr. 595-05000-00
(ohne Werkzeug)



Technische Daten – SilentCrusher S

Aufnahmeleistung	(W)	24
Abmessungen Antrieb	(D x H mm)	125 x 197
Abmessungen Netzteil	(B x H x T mm)	106 x 30 x 65
Anschlussspannung	(V/Hz)	100 – 240 / 47 – 63
Schutzart	(IP)	30
Gewicht	(kg)	0,8

SilentCrusher M

Modell für alle Standardanwendungen

- Der SilentCrusher M hat eine Drehzahl bis 26.000 U/min und ist mit Abstand der leiseste Dispergierer der Welt
- Die stufenlose Drehzahlregelung von 5.000 bis 26.000 U/min ermöglicht Ihnen eine individuelle Einstellung der Dispergiergeschwindigkeit
- Dank der großen digitalen Anzeige können Sie die Drehzahl selbst aus der Entfernung problemlos ablesen
- Dispergieren Sie problemlos viskose Lösungen bis 5.000 mPa s
- Ihre erste Wahl, wenn Sie Mengen von 0,8 bis 2.000 ml homogenisieren
- Wählen Sie aus 13 verschiedenen sterilisierbaren Werkzeugen: Von 6 bis 22 mm Durchmesser ist für Ihre spezielle Applikation sicher das richtige Werkzeug dabei
- **Das SilentCrusher Plug & Play M Paket beinhaltet: SilentCrusher M, Plattenstativ, 2 Kreuzklemmen und Gefäßhalterung (ohne Werkzeug)**
Best. Nr. 595-06009-00



Best. Nr. 595-06000-00
(ohne Werkzeug)

Technische Daten – SilentCrusher M

Aufnahmeleistung	(W)	130
Abmessungen Antrieb	(B x H x T mm)	90 x 174 x 90
Abmessungen Netzteil	(B x H x T mm)	196 x 51 x 88
Anschlussspannung	(V/Hz)	100 – 240 / 47 – 63
Schutzart	(IP)	30
Gewicht	(kg)	1,0

Werkzeuge und Zubehör

SilentCrusher M – Werkzeuge

- Arbeiten Sie mit hochqualitativen Werkzeugen aus weitgehend korrosionsbeständigem Edelstahl V4A
- Die SilentCrusher Werkzeuge sind leicht zu zerlegen und somit schnell und problemlos zu reinigen – ideal bei häufigem Probenwechsel
- Die Werkzeuge sind ausgelegt für Dampfsterilisation bis 130 °C oder Heißluftsterilisation bis 180 °C
- Durch auswechselbare Kugellager und chemikalienbeständiges PTFE sind die Lager für einen jahrelangen Dauereinsatz geeignet
- Bei speziellen Anwendungen ist eine Vorzerkleinerung Ihrer Probe notwendig. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen Werkzeuge mit Sägezähnen. Das sind alle Modelle außer 18 G, 18 DG, 22 G
- Verwenden Sie unsere gedichteten Werkzeuge für Anwendungen unter Druck bis 6 bar oder Vakuum bis 20 mbar*

Typ	Stator ø außen [mm]	Rotor ø [mm]	Schlitz- breite [mm]	Schaft- länge [mm]	Volumen [ml]	Ausgangs- partikel- größe [mm]	Umfangs- geschwindigkeit [m/s] in Wasser	Max. Umdre- hung [U/min]	Max. Geräusch- entwicklung [dB (A)] in 1 m Abstand	Best. Nr.	
6 F	5,3	3,2	0,6	60	0,8 – 30	< 0,4	4,4	26.000	73	596-06010-00	
8 F	8,2	6,6	0,6	80	3 – 50	< 0,4	9	26.000	44	596-08010-00	
8 DF*	8,2	6,6	0,6	75	3 – 50	< 0,4	9	26.000	44	596-08110-00	
12 F	12	9	0,6	120	25 – 250	< 2,0	12,2	26.000	62	596-12010-00	
12 G	12	9	2,0	120	25 – 250	< 2,0	12,2	26.000	62	596-12020-00	
12 DF*	12	9	0,6	115	25 – 250	< 2,0	12,2	26.000	62	596-12110-00	
12 DG*	12	9	2,0	115	25 – 250	< 2,0	12,2	26.000	62	596-12120-00	
18 F	18	12,5	1,5	180	100 – 1.500	< 4,0	17	26.000	74	596-18010-00	
18 G	18	12,5	3,0	180	100 – 1.500	< 4,0	17	26.000	74	596-18020-00	
18 DF*	18	12,5	1,5	175	100 – 1.500	< 4,0	17	26.000	68	596-18110-00	
18 DG*	18	12,5	3,0	175	100 – 1.500	< 4,0	17	26.000	68	596-18120-00	
22 F	22	16,5	1,5	180	100 – 2.000	< 4,0	17,3	20.000	73	596-22010-00	
22 G	22	16,5	3,0	180	100 – 2.000	< 4,0	17,3	20.000	73	596-22020-00	

SilentCrusher M – Zubehör

Plattenstativ

Abmessungen Platte: 180 x 245 mm
Stativ: ø 13 mm, Länge: 600 mm
Best. Nr. 570-17000-00

Kreuzklemme SilentCrusher M / Heat-On

Bitte beachten Sie, dass 1 Klemme für die Befestigung des SilentCrusher und 1 Klemme für die Gefäßhalterung benötigt wird
Best. Nr. 570-31100-00

Gefäßhalterung inkl. 2 Ringe

Für Gefäße mit einem Durchmesser von 20 – 105 mm
Best. Nr. 570-30100-00

SilentCrusher S – Werkzeuge

- Arbeiten Sie mit hochqualitativen Werkzeugen aus weitgehend korrosionsbeständigem Edelstahl V4A
- Die SilentCrusher Werkzeuge sind leicht zu zerlegen und somit schnell und problemlos zu reinigen – ideal bei häufigem Probenwechsel
- Die Werkzeuge sind ausgelegt für Dampfsterilisation bis 130 °C oder Heißluftsterilisation bis 180 °C
- Für einen jahrelangen Dauereinsatz sind Werkzeuglager und Werkzeugaufnahmen aus chemikalienbeständigem PTFE
- 10 Dispergiergefäße aus Polypropylen sind im Lieferumfang enthalten

Typ	Stator ø außen [mm]	Rotor ø [mm]	Schlitz- breite [mm]	Schaft- länge [mm]	Volumen [ml]	Ausgangs- partikelgröße [mm]	Umfangs- geschwindig- keit [m/s] in Wasser	Max. Geräusch- entwicklung [dB (A)] in 1 m Abstand	Anwendung im	Best. Nr. Werkzeuge	Bestellnummer Ersatzgefäße je 100 Stück
3 F	3,3	2	0,6	26	0,8 – 1,0	< 0,4	7,85	47	Eppendorf- Reaktionsgefäß	596-03010-00	596-00003-00
5 F	5	3,2	0,6	38	2,0 – 4,0	< 0,4	11,8	50	Reagenzröhrchen	596-05010-00	596-00005-00
7 F	7	3,9	0,6	55	6,0 – 10,0	< 0,4	17,7	54	Reagenzröhrchen	596-07010-00	596-00007-00

Premium Service

Service vor Ort

- Ihr Ansprechpartner bei Heidolph berät und unterstützt Sie direkt vor Ort
- Wir installieren Ihr neues Heidolph Gerät kostenfrei und geben Ihnen eine umfassende Einweisung in das System
- Wir kümmern uns für Sie um die Entsorgung Ihrer Altgeräte
- Bei Bedarf erhalten Sie ein kostenloses Leihgerät innerhalb von 48 Stunden

Beratung und Support

- Sie können alle Geräte während einer kostenlosen, 14-tägigen Probestellung auf Herz und Nieren testen
- Promovierte Chemiker prüfen auf Wunsch Ihre spezielle Applikation, um das richtige Gerät für Ihre Anwendung zu finden
- Kurze Lieferzeiten von 7 Tagen ermöglichen Ihnen einen Kauf in „letzter Minute“
- Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Antwort auf alle Anfragen

Reparaturen

- Wir organisieren die Abholung zu reparierender Geräte für Sie
- Reparaturen an Ihrem Gerät werden innerhalb von nur 4 Tagen ausgeführt
- Wir führen kostenlose Sicherheitstests an Ihren Geräten durch

PREMIUM QUALITÄT

- Sie erhalten 3 Jahre Garantie auf alle Geräte – ohne Kompromisse
- Alle Geräte sind für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet und für eine durchschnittliche Nutzungsdauer von mindestens 10 Jahren ausgelegt
- Das macht Ihre Anschaffung zu einer lohnenswerten Investition!



MADE IN GERMANY

FreeCall -D- 0800-Heidolph

FreeCall -A/CH- 00800-Heidolph

Serviceverträge

Senden Sie uns jährlich Ihr Heidolph-Gerät zu. Unsere Servicetechniker prüfen es umgehend auf Funktion und Verschleiß. Somit vermeiden Sie unnötige Ausfallzeiten!

Wartungsverträge

Einmal im Jahr inspiziert und wartet ein Heidolph-Servicetechniker Ihre Großrotationsverdampfer direkt bei Ihnen vor Ort. So beugen Sie Ausfallzeiten präventiv vor!



IHRE VORTEILE

- **Kostenlose Leihgeräte**
Bei Bedarf erhalten Sie ein kostenloses Leihgerät innerhalb von 48 Stunden
- **Sparen Sie Kosten**
für Verschleißteile sowie Arbeitszeit für den Heidolph-Servicetechniker
- **Professionelle Inspektion**
Ihrer Geräte durch erfahrene Heidolph-Servicetechniker
- **Sicherheitsprüfung nach BGV A3**
und eine funktionsbezogene Gerätereinigung sind für Sie in den Serviceleistungen enthalten
- **Schneller Reparaturservice**
Reparaturen an Ihrem Gerät werden innerhalb von 4 Werktagen ausgeführt

Verträge	Best. Nr.
Servicevertrag Rotationsverdampfer	01-006-006-06
Servicevertrag Magnetrührer	01-006-006-05
Servicevertrag Laborrührer	01-006-006-04
Servicevertrag Schüttel- & Mischgeräte	01-006-006-07
Servicevertrag Peristaltikpumpen	01-006-006-03
Folgende Serviceleistungen können Sie auch separat für Ihr Gerät bestellen	
Funktionsbezogene Gerätereinigung	01-006-006-26
Sicherheitsprüfung BGV A3 nach DIN EN 61010	01-006-006-27
Funktionsprüfung	01-006-006-28

IHRE VORTEILE

- **Sparen Sie Kosten**
für Verschleißteile sowie die Anreise und Arbeitszeit des Heidolph-Servicetechnikers
- **Keine Transportkosten**
Das Heidolph-Team kommt zu Ihnen – und zwar kostenfrei
- **Schneller geht es nicht**
Die Geräte werden bei Ihnen vor Ort inspiziert
- **Weniger Reparaturbedarf**
Durch regelmäßigen Kundenservice haben Sie geringere Reparaturkosten; die Lebensdauer Ihrer Laborgeräte verlängert sich, und Sie haben den Kopf frei zum Forschen
- **Ein individueller Service**
und ein persönlicher Ansprechpartner für Sie und Ihr Team

Verträge für Großrotationsverdampfer	Best. Nr.
Wartungsvertrag Laborota 20 safety	01-006-006-08
Wartungsvertrag Laborota 20 compact	01-006-006-09

Technischer Service



Stefan Pill
Leiter Technischer Service

Herr Pill leitet den Technischen Service sowie die Reparaturabteilung. Er und sein Team unterstützen Sie weltweit und bieten Ihnen:

- Professionelle Reparaturen vor Ort oder im Heidolph Service Center
- Reparaturen innerhalb von 4 Werktagen
- Kostenlose Kostenvoranschläge
- Bei Bedarf – Versand von Leerverpackungen
- Kostenlose Leihgeräte innerhalb von 48 Stunden
- Abholung des Reparaturgerätes bei Ihnen vor Ort

Durchwahl: (+49) 09122/9920-74
E-Mail: Stefan.Pill@Heidolph.de

➤ Serviceseminare

Haben Sie eine eigene Reparaturwerkstatt in Ihrem Unternehmen?
Lassen Sie Ihre Servicetechniker von Herrn Pill schulen, um Reparaturen selbst durchführen zu können.

Wir bieten Ihnen individuelle Seminare auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

➤ Miet-Service

IHRE VORTEILE

- Falls gewünscht, geht das Objekt nach 10 Monaten in **Ihr Eigentum** über - ohne weitere Zuzahlungen
- Sie haben keine hohen Investitionskosten und sind somit **flexibler in Ihrer Finanzplanung**
- Sie zahlen nur die tatsächliche **Dauer der Benutzung**
- Kündigen Sie den Vertrag jederzeit: Sie sind an **keine Vertragslaufzeit** gebunden und bleiben somit flexibel im Gebrauch und in der Finanzierung Ihres Laborgerätes



Unsere Mitarbeiter

Sie sind das Kapital unseres Unternehmens. Denn es ist ihre Begeisterung, die unsere Kunden schätzen und die unsere dynamische Entwicklung erst möglich gemacht hat. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Übernahme von Verantwortung und Initiative durch hochmotivierte Mitarbeiter. Sie setzen kontinuierlich neue Maßstäbe für exzellente Produktqualität und Kundenorientierung sowie beispiellose Serviceleistungen für unsere Kunden in aller Welt.

Verantwortung und Sicherheit

Das Engagement und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter sind zentrale Bestandteile der Unternehmenspolitik. In der Verantwortung des Unternehmens liegt es, diese Leistungsträger mit Respekt und Würde zu behandeln, sie zu fördern und ihren Schutz zu gewährleisten. Die Unfallverhütung und die körperliche Unversehrtheit der Mitarbeiter gehört zur Unternehmensphilosophie. Eine Zertifizierung unseres Arbeitsschutz Management Systems (AMS) mit hohen Sicherheitsauflagen stärkt das Vertrauen unserer Mitarbeiter und unserer Kunden in unser Unternehmen.

Ausbildung

Jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu geben, ist die Aufgabe der ganzen Gesellschaft. Heidolph Instruments beteiligt sich aktiv an der qualifizierten Ausbildung einer neuen Generation von Mitarbeitern. Sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich leisten wir einen bedeutenden Beitrag. In 2012 lag die Ausbildungsquote bei Heidolph Instruments mit 6 % deutlich über dem nationalen Durchschnitt.



www.heidolph.de

➤ Heidolph Instruments Zertifizierung



➤ Ihre Ansprechpartner im Außendienst

In Deutschland



Anja Christensen

Regionalbüro Nord

PLZ: 20-31, 37-38, 49

Mobil: 0160/97240465
 Anja.Christensen@Heidolph.de



Manuela Paetz

Regionalbüro Ost

PLZ: 01-19, 39, 98-99

Mobil: 0170/6322579
 Manuela.Paetz@Heidolph.de



Dr. Michaela
 Barlmeyer-Hülsmann

Regionalbüro NRW

PLZ: 32-33, 40-48, 50-53, 57-59

Mobil: 0160/90780840
 Michaela.Barlmeyer@Heidolph.de



Alexandra Risch

Regionalbüro West

PLZ: 34-36, 54-56, 60-69, 97

Mobil: 0170/9267595
 Alexandra.Risch@Heidolph.de



Yvonne Thäter

Regionalbüro Süd

PLZ: 70-96

Mobil: 0170/7966406
 Yvonne.Thaeter@Heidolph.de

In Österreich und in der Schweiz



Andreas Helle

NATEL: +41 79/5449289

Andreas.Helle@Heidolph.ch

› Ihre Ansprechpartner im Innendienst

Frau Kroboth, Frau Grothe und Frau Winkler betreuen Sie im Innendienst zu technischen Fragen, Liefertermin- und Preisanfragen, bei der Auftragsabwicklung und dem After-Sales-Service



Cornelia Kroboth

Kundenbetreuung D-A-CH

Durchwahl: 09122/9920-67
Cornelia.Kroboth@Heidolph.de



Anja Grothe

Kundenbetreuung D-A-CH

Durchwahl: 09122/9920-69
Anja.Grothe@Heidolph.de



Anna Winkler

Kundenbetreuung D-A-CH

Durchwahl: 09122/9920-62
Anna.Winkler@Heidolph.de



Kevan White

Marketing- & Gesamtvertriebsleiter

Herr White leitet den nationalen und internationalen Vertrieb

Durchwahl: 09122/9920-59
Kevan.White@Heidolph.de



Lisa Gjarmati

Assistentin des Marketing- & Gesamtvertriebsleiters

Frau Gjarmati assistiert Herrn White in allen Fragen des nationalen und internationalen Vertriebs

Durchwahl: 09122/9920-85
Lisa.Gjarmati@Heidolph.de

Impressum

Herausgeber: **Heidolph Instruments GmbH & Co. KG**
Walpersdorfer Straße 12
D - 91126 Schwabach

Auflage: 01/2013

© Copyright 2013, **Heidolph Instruments GmbH & Co. KG**
Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung.

Abbildungen zeigen ggf. Zubehör und Dekorationsartikel, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Technische Änderungen & Irrtümer bleiben vorbehalten.



Heidolph Instruments GmbH & Co. KG

Walpersdorfer Str. 12 • 91126 Schwabach/Germany
Phone 09122/9920-67 • Fax 09122/9920-65
Cornelia.Kroboth@heidolph.de • www.heidolph.de

FreeCall -D- 0800-Heidolph
FreeCall -A/CH- 00800-Heidolph